

Lo scopo di questa guida è quello di facilitare gli operatori e/o gli assistenti nella scelta dell'imbracatura più appropriata per il paziente.

INDICAZIONI CLINICHE PREVALENTI	Trasferimento letto - carrozzina	Trasferimento carrozzina - carrozzina
Amputazione femorale	<ul style="list-style-type: none"> ■ Imbracatura Amputati ■ Imbracatura Comfort Standard o Alta 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Imbracatura Amputati ■ Imbracatura Comfort Standard o Alta
Amputazione sotto rotula	<ul style="list-style-type: none"> ■ Imbracatura Amputati ■ Imbracatura Easy Fit a gambe separate ■ Imbracatura Comfort Standard o Alta ■ Imbracatura Universale Standard 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Imbracatura Amputati ■ Imbracatura Easy Fit a gambe separate ■ Imbracatura Comfort Standard o Alta
Assenza di tonicità degli arti inferiori	<ul style="list-style-type: none"> ■ Imbracatura Easy Fit a gambe separate ■ Imbracatura Comfort Standard o Alta ■ Imbracatura Universale Bassa ■ Imbracatura Universale Standard 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Imbracatura Easy Fit a gambe separate ■ Imbracatura Comfort Standard o Alta ■ Imbracatura Universale Bassa ■ Imbracatura Universale Standard
Poco controllo del tronco o del capo, movimenti distonici	<ul style="list-style-type: none"> ■ Imbracatura Comfort Alta ■ Imbracatura Universale Alta 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Imbracatura Universale Alta
Assenza di controllo del capo	<ul style="list-style-type: none"> ■ Imbracatura Universale Alta Plus 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Imbracatura Universale Alta Plus
Emiplegia totale	<ul style="list-style-type: none"> ■ Imbracatura Easy Fit a gambe separate ■ Imbracatura Comfort Alta ■ Imbracatura Universale Alta ■ Imbracatura Universale Alta Plus 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Imbracatura Easy Fit a gambe separate ■ Imbracatura Comfort Alta ■ Imbracatura Universale Alta ■ Imbracatura Universale Alta Plus
Emiplegia parziale	<ul style="list-style-type: none"> ■ Imbracatura Easy Fit a gambe separate ■ Imbracatura Comfort Standard o Alta ■ Imbracatura Universale Standard 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Imbracatura Easy Fit a gambe separate ■ Imbracatura Comfort Standard o Alta ■ Imbracatura Universale Standard
Paraplegia con controllo del tronco	<ul style="list-style-type: none"> ■ Imbracatura Comfort Standard ■ Imbracatura Universale Bassa ■ Imbracatura Universale Standard 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Imbracatura Comfort Standard ■ Imbracatura Universale Bassa ■ Imbracatura Universale Standard
Paraplegia senza controllo del tronco	<ul style="list-style-type: none"> ■ Imbracatura Easy Fit a gambe separate ■ Imbracatura Comfort Alta ■ Imbracatura Universale Standard ■ Imbracatura Universale Alta ■ Imbracatura Universale Alta Plus 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Imbracatura Easy Fit a gambe separate ■ Imbracatura Comfort Alta ■ Imbracatura Universale Standard ■ Imbracatura Universale Alta ■ Imbracatura Universale Alta Plus
Tetraplegia	<ul style="list-style-type: none"> ■ Imbracatura Easy Fit a gambe separate ■ Imbracatura Comfort Alta ■ Imbracatura Universale Alta ■ Imbracatura Universale Alta Plus 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Imbracatura Easy Fit a gambe separate ■ Imbracatura Comfort Alta ■ Imbracatura Universale Alta ■ Imbracatura Universale Alta Plus
Buon controllo del tronco e degli arti superiori in combinazione con il sollevatore verticalizzante (tipo Reliant 350)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Imbracatura Stand Assist, con buon tono muscolare ■ Imbracatura Stand Assist di Trasferimento, con scarso tono muscolare 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Imbracatura Stand Assist, con buon tono muscolare ■ Imbracatura Stand Assist di Trasferimento, con scarso tono muscolare

Tutte queste imbracature sono compatibili con sollevatori con bilancino a due o a quattro punti
(*Birdie, Birdie Compact, Reliant 350*)

Imbracature Invacare: posizionamento ed utilizzo



Imbracatura Universale con appoggiatesta - sollevamento a partire dal letto

Questo video mostra come applicare l'imbracatura...
[...guarda il video](#)



Imbracatura Universale Standard - sollevamento a partire dalla posizione orizzontale

Questo video mostra come applicare l'imbracatura...
[...guarda il video](#)



Imbracatura Universale Standard - sollevamento a partire dal letto

Questo video mostra come applicare l'imbracatura...
[...guarda il video](#)



Imbracatura Easy Fit a gambe separate

Questo video mostra come applicare l'imbracatura...
[...guarda il video](#)

Consulta i video presenti sul nostro sito www.invacare.it

INDICAZIONI CLINICHE PREVALENTI	Trasferimento nella vasca o nella doccia	Trasferimento su WC o per la vestizione
Amputazione femorale	<ul style="list-style-type: none"> ■ Imbracatura Amputati ■ Imbracatura Comfort Standard o Alta 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Imbracatura Amputati ■ Imbracatura Comfort Standard o Alta
Amputazione sotto rotula	<ul style="list-style-type: none"> ■ Imbracatura Amputati ■ Imbracatura Comfort Standard o Alta ■ Imbracatura Comfort con foro WC ■ Imbracatura Universale Standard 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Imbracatura Amputati ■ Imbracatura Comfort con foro WC ■ Imbracatura Toeletta Vestizione
Assenza di tonicità degli arti inferiori	<ul style="list-style-type: none"> ■ Imbracatura Comfort con foro WC ■ Imbracatura Universale Standard 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Imbracatura Toeletta Vestizione
Poco controllo del tronco o del capo, movimento distonico	<ul style="list-style-type: none"> ■ Imbracatura Universale Alta 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Imbracatura Toeletta Vestizione Alta
Assenza di controllo del capo	<ul style="list-style-type: none"> ■ Imbracatura Universale Alta Plus 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Imbracatura Toeletta Vestizione Alta
Emiplegia totale	<ul style="list-style-type: none"> ■ Imbracatura Comfort Alta ■ Imbracatura Universale Alta ■ Imbracatura Universale Alta Plus 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Imbracatura Comfort Alta ■ Imbracatura Toeletta Vestizione Alta
Emiplegia parziale	<ul style="list-style-type: none"> ■ Imbracatura Comfort Standard o Alta ■ Imbracatura Comfort con foro WC ■ Imbracatura Universale Standard 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Imbracatura Comfort con foro WC ■ Imbracatura Toeletta Vestizione
Paraplegia con controllo del tronco	<ul style="list-style-type: none"> ■ Imbracatura Comfort Standard ■ Imbracatura Comfort con foro WC ■ Imbracatura Universale Standard 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Imbracatura Comfort Standard ■ Imbracatura Comfort con foro WC ■ Imbracatura Toeletta Vestizione
Paraplegia senza controllo del tronco	<ul style="list-style-type: none"> ■ Imbracatura Comfort con foro WC ■ Imbracatura Universale Standard ■ Imbracatura Universale Alta 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Imbracatura Comfort con foro WC ■ Imbracatura Toeletta Vestizione Alta
Tetraplegia	<ul style="list-style-type: none"> ■ Imbracatura Comfort ■ Imbracatura Comfort con foro WC ■ Imbracatura Universale Alta 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Imbracatura Comfort con foro WC ■ Imbracatura Toeletta Vestizione Alta
Buon controllo del tronco e degli arti superiori in combinazione con il sollevatore verticalizzante (tipo Reliant 350)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Imbracatura Stand Assist, con buon tono muscolare ■ Imbracatura Stand Assist di Trasferimento, con scarso tono muscolare 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Imbracatura Stand Assist, con buon tono muscolare ■ Imbracatura Stand Assist di Trasferimento, con scarso tono muscolare



Comfort e facilità d'applicazione

La gamma di imbracature Invacare è stata appositamente studiata in collaborazione con un team di fisioterapisti e tecnici occupazionali per garantire agli utilizzatori la massima sicurezza e il massimo comfort. Le diverse imbracature, disponibili in tre tessuti diversi, in cinque taglie e con ampie possibilità di regolazione, sono in grado di soddisfare le più svariate esigenze di utilizzatori ed assistenti. Un'etichetta verde posizionata sul fondo dell'imbracatura consente all'assistente di controllare costantemente il corretto posizionamento dell'imbracatura rispetto alla colonna vertebrale del paziente, in modo da garantire massima sicurezza e comfort.

Trusted Solutions, Passionate People






Invacare Imbracatura Universale Alta

Supporta interamente corpo e testa, dando all'utilizzatore una posizione confortevole e leggermente inclinata. E' consigliata per quei pazienti che hanno un controllo limitato del capo, del tronco e dei fianchi oppure per trasferimenti da e per la posizione supina. Può essere usata anche per trasferimenti dalla posizione seduta. Completa di stecche di supporto rimovibili nella zona del capo.

Size	A	B	C	D
XS	1040	740	610	340
S	1080	840	730	380
M	1420	1000	830	400
L	1550	1100	920	510
XL	1680	1150	920	550

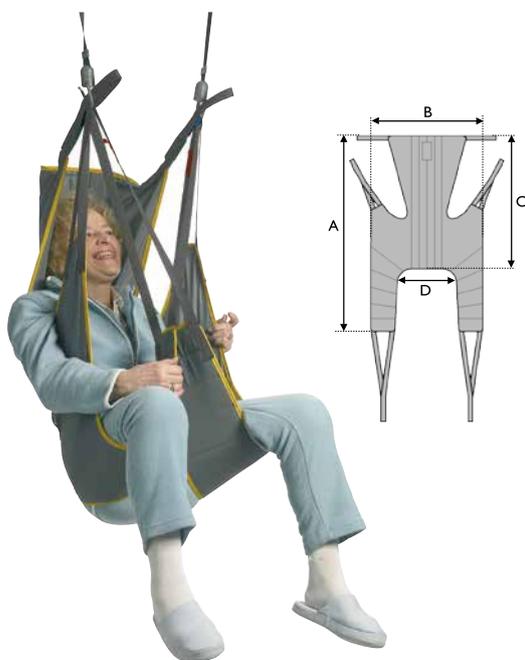


Invacare Imbracatura Universale Alta Plus

Supporta l'intero corpo inclusa la testa dando all'utilizzatore una posizione confortevole e leggermente inclinata.

Permette all'utilizzatore di tenere le braccia all'esterno dell'imbracatura. E' consigliata per quei pazienti che hanno un controllo limitato del capo, del tronco e dei fianchi o per trasferimenti da e per una posizione supina. Può essere usata anche per trasferimenti da posizione seduta a posizione seduta. Il tessuto, rinforzato nella sezione posteriore, è tale da assicurare un'ottima distribuzione dei pesi e il massimo comfort per l'utilizzatore.

Size	A	B	C	D
S	1380	840	880	340
M	1510	950	930	450
L	1580	1100	970	560
XL	1590	1190	970	630

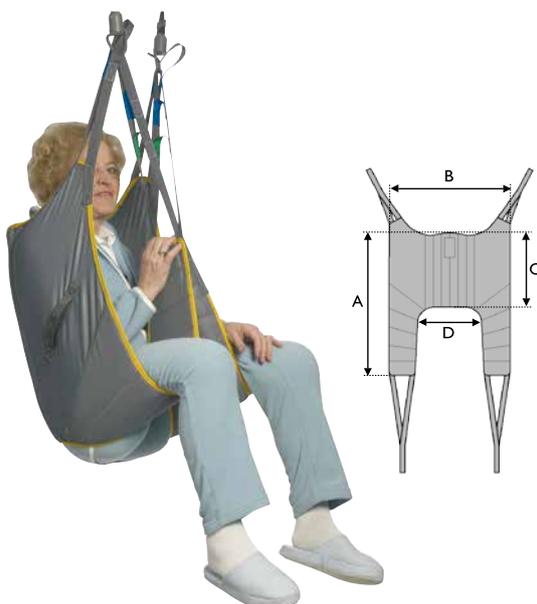


Invacare Imbracatura Universale Standard

Supporta l'intero corpo, comprese le spalle. E' consigliata per persone con un buon controllo del capo. Viene considerata un'imbracatura adatta per la vecchiaia, poiché supporta l'intero corpo e dà all'utilizzatore una sensazione di comfort ed una visuale massima. Può essere usata per trasferimenti da posizione seduta a posizione seduta ed è facile da utilizzare.

Il tessuto, rinforzato nella sezione posteriore, è tale da assicurare un'ottima distribuzione dei pesi ed il massimo comfort.


Size	A	B	C	D
S	1000	920	510	410
M	1090	1050	560	480
L	1180	1090	580	560
XL	1240	1250	585	710

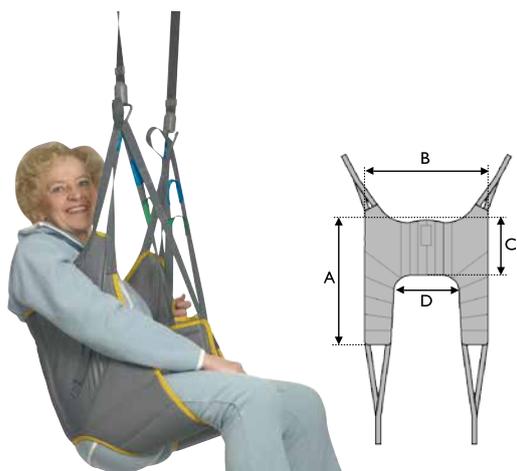

Invacare Imbracatura Universale Bassa

Supporta i fianchi e la parte inferiore della tronco. **L'Imbracatura Universale Bassa** può essere usata per pazienti con controllo totale di testa e tronco. E' usata per trasferimenti da posizione seduta a posizione seduta ed è facile da applicare. Anche questo modello ha un tessuto rinforzato nella sezione posteriore, così da assicurare un'ottimale distribuzione dei pesi e il massimo comfort per l'utilizzatore.

Size	A	B	C	D
S	850	800	350	410
M	920	940	375	480
L	950	1075	405	575

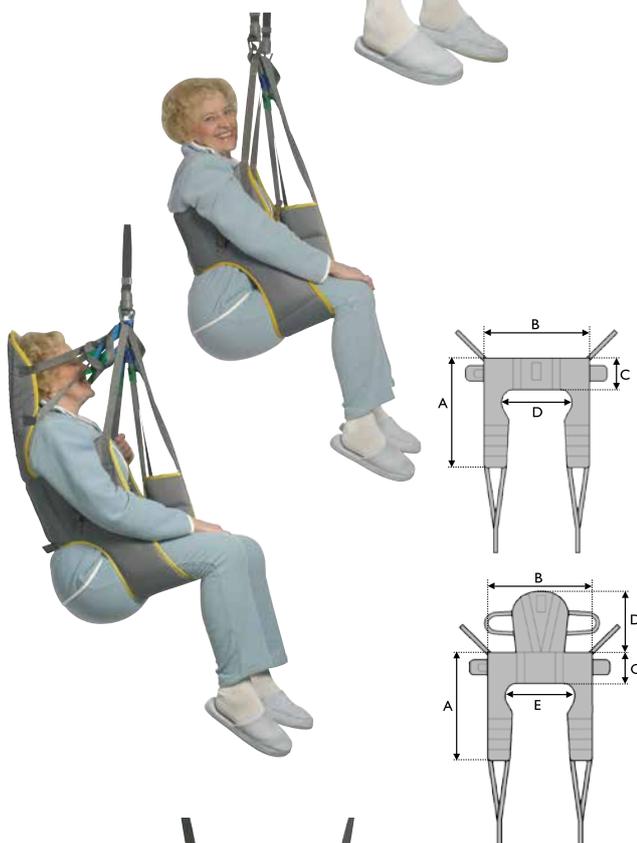


Invacare Imbracatura Toeletta Vestizione

Nella gamma imbracature Invacare sono presenti due imbracature da trasferimento alla toeletta con e senza supporto per la testa. Entrambi i modelli sono forniti di una cintura che aumenta il supporto intorno al corpo e facilita un migliore posizionamento. **L'Imbracatura Toeletta Vestizione** è adatta per coloro che hanno una limitata mobilità. Il modello con supporto per la testa è studiato per utilizzatori con scarso controllo del capo. **L'Imbracatura Toeletta Vestizione** è adatta per quegli utilizzatori che vogliono potersi vestire e svestire durante il trasferimento al WC. E' studiata per trasferimenti da posizione seduta a posizione seduta ed è molto facile da applicare. Completa di stecche di supporto rimovibili solo nella versione con supporto del capo.

Size	A	B	C	D
S	870	710	200	430
M	950	800	230	490
L	1020	900	230	600
XL	1100	1080	270	760

Invacare Imbracatura Toeletta Vestizione Alta





Size	A	B	C	D	E
S	870	710	200	400	430
M	950	800	230	470	490
L	1020	900	230	470	600
XL	1100	1080	270	470	760

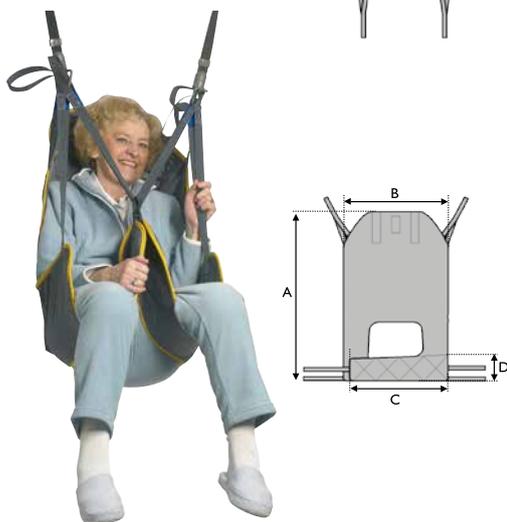

Invacare Imbracatura Easy-fit

Supporta l'intero corpo e la testa ed è perciò adatta per gli utilizzatori con disabilità fisiche più debilitanti. E' molto semplice da applicare e garantisce all'utilizzatore una seduta particolarmente comoda e confortevole. Questo modello è anche indicato per persone amputate. Completa di stecche di supporto rimovibili nella zona del capo.

Size	A	B	C	D
XS	1100	710	595	170
S	1130	760	640	180
M	1200	800	675	190
L	1270	860	720	210
XL	1390	940	780	220

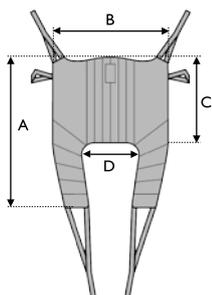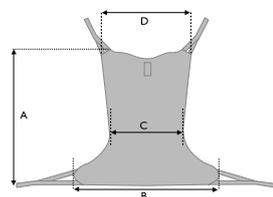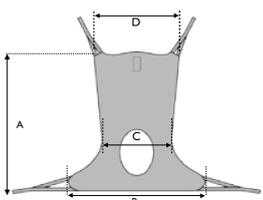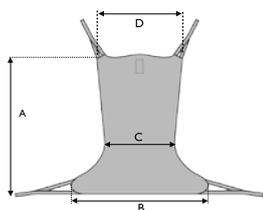

Invacare Imbracatura Comfort e Imbracatura Comfort con foro per WC (Imbracatura ad amaca con contenzione del capo) e **Comfort Standard**

Questo modello è disponibile in due versioni: l'**Imbracatura Comfort** che offre un completo supporto del corpo, incluso il capo, e l'**Imbracatura Comfort Standard** che garantisce un buon controllo del corpo e delle spalle, ma non del capo. Questo tipo di imbracature sono indicate per quelle persone che soffrono di dolori cronici, amputati parziali e per chi necessita, per motivi posturali, di restare in posizione seduta. Entrambe sono applicabili durante i trasferimenti dalla posizione supina a quella seduta. L'**Imbracatura Comfort** è inoltre disponibile con il foro WC.

Imbracatura Invacare Comfort con o senza foro WC

Size	A	B	C	D
XS	1040	970	510	960
S	1150	1050	550	1020
M	1395	1170	610	1160
L	1445	1290	675	1280
XL	1460	1330	745	1470


Imbracatura Invacare Comfort Standard

Size	A	B	C	D
S	960	1050	550	1000
M	1020	1170	610	1050
L	1160	1290	675	1110

Invacare Imbracatura Amputato

Il modello è disegnato specificatamente per un trasferimento sicuro di utilizzatori con singola o doppia amputazione. L'imbracatura permette all'utilizzatore un supporto confortevole in una posizione leggermente reclinata. E' importante che l'utilizzatore abbia un buon controllo della testa.

Size	A	B	C	D
S	1100	930	490	320
M	1160	970	520	360
L	1360	1230	570	430
XL	1400	1350	570	480

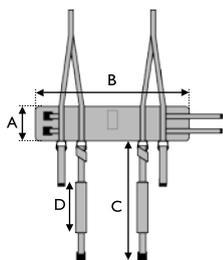

Invacare **Imbracatura per la deambulazione Standing**


L'imbracatura per la deambulazione si applica attorno al fianco.

L'utilizzatore deve essere in grado di stare in posizione eretta e i suoi piedi devono toccare il pavimento. Questa imbracatura è consigliata per chi ha un ridotto bilanciamento e/o una scarsa autonomia nella deambulazione.

Facilita, inoltre, il lavoro dell'assistente perché il trasferimento avviene in maggiore sicurezza.

Sono disponibili delle fasce per garantire maggiore supporto all'utilizzatore (accessorio).


Size	A	B	C	D
XS	150	750	850	300
S	150	850	850	300
M	180	950	950	350
L	180	1050	950	350
XL	180	1200	950	350

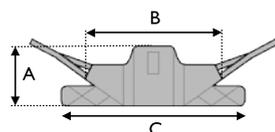

Invacare **Imbracatura Stand Assist**

Progettata per l'uso con il sollevatore *Invacare Reliant 350*, l'imbracatura *Invacare Stand Assist* offre un trasferimento sicuro e confortevole per utilizzatori che hanno una residua capacità di sostegno, ma che non riescono a rimanere in piedi autonomamente. Inoltre, l'utilizzatore dovrebbe essere mentalmente lucido, avere un buon controllo del corpo e del capo e l'abilità di afferrare l'asta di sollevamento durante il trasferimento. L'imbracatura è di un materiale antiscivolo che assicura la massima sicurezza durante il trasferimento.

Size	A	B	C
S	260	840	950
M	330	895	1170
L	360	950	1270
XL	360	1020	1810

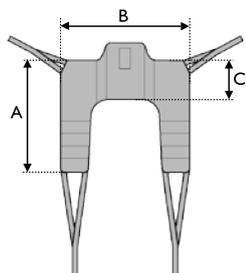

Invacare **Imbracatura Stand Assist di Trasferimento**

L'imbracatura *Invacare Stand Assist di Trasferimento* può essere usata con il sollevatore *Invacare Reliant 350* e permette un semplice trasferimento da seduto. L'imbracatura è indicata per quegli utilizzatori dotati di un buon controllo di corpo e capo e che sono in grado di afferrare l'asta di sollevamento.

Size	A	B	C
S	860	840	240
M	1020	895	260
L	1180	950	330
XL	1230	1020	350

Modello	Tessuti			Misure				
	Compatto	Rete	Spacer	XS	S	M	L	XL
Universale Bassa	●				●	●	●	
Universale Standard	●	●	●		●	●	●	●
Universale Alta	●	●	●	●	●	●	●	●
Universale Alta Plus	●	●	●		●	●	●	●
Toeletta Vestizione	●				●	●	●	●
Toeletta Vestizione Alta	●				●	●	●	●
Easy Fit	●		●	●	●	●	●	●
Amputato	●				●	●	●	●
Comfort		●	●	●	●	●	●	●
Comfort WC	●	●		●	●	●	●	●
Comfort Standard		●	●		●	●	●	
Imbracatura per la deambulazione Standing	●			●	●	●	●	●
Stand Assist	●				●	●	●	●
Stand Assist di trasferimento	●				●	●	●	●

Tessuti



Poliestere Compatto¹

Un materiale standard:

- facile da applicare (si stende facilmente nella posizione desiderata);
- veloce nell'asciugatura (dopo il lavaggio).



Rete¹

Da usarsi per i bagni o per persone che stazionano nell'imbracatura per un periodo di tempo considerevole.




Spacer¹

Tessuto leggermente elastico che si adatta alla forma del corpo dell'utilizzatore. Molto adatto a chi ha problemi di integrità della pelle.

^{1/} E' importante compiere una valutazione del rischio di piaghe da decubito per pazienti che sono destinati a rimanere a lungo nell'imbracatura.

Scelta della taglia

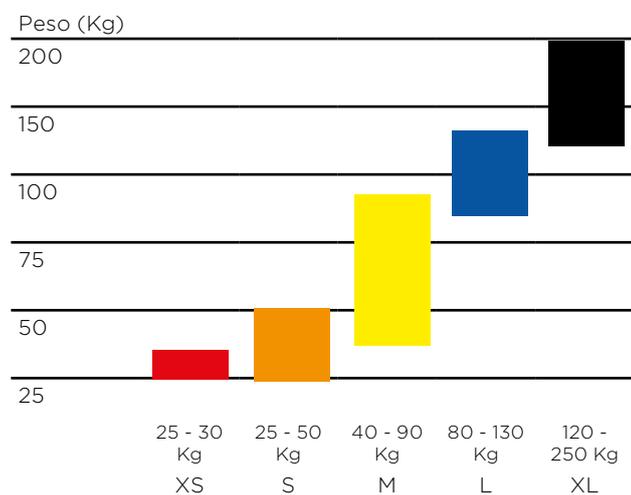

200 kg*



95°



Tutte le imbracature dovrebbero essere testate e regolate in modo specifico per ogni utilizzatore, così da assicurare un ottimo comfort e la massima sicurezza durante i trasferimenti. Per un uso corretto si consiglia di consultare il personale medico.

Codici NT: 12.36.03.103 (Imbracatura ad amaca con contenzione del capo.)

Nr. Repertorio DM: 108664/R

CODICI ISO PURAMENTE INDICATIVI E SOGGETTI AD APPROVAZIONE DA PARTE DEL MEDICO PRESCRIVENTE
PRODOTTO COMMERCIALIZZATO

*250kg per la taglia XL

