


CAREBED, la qualità antidecubito...
e il risparmio è in atto!

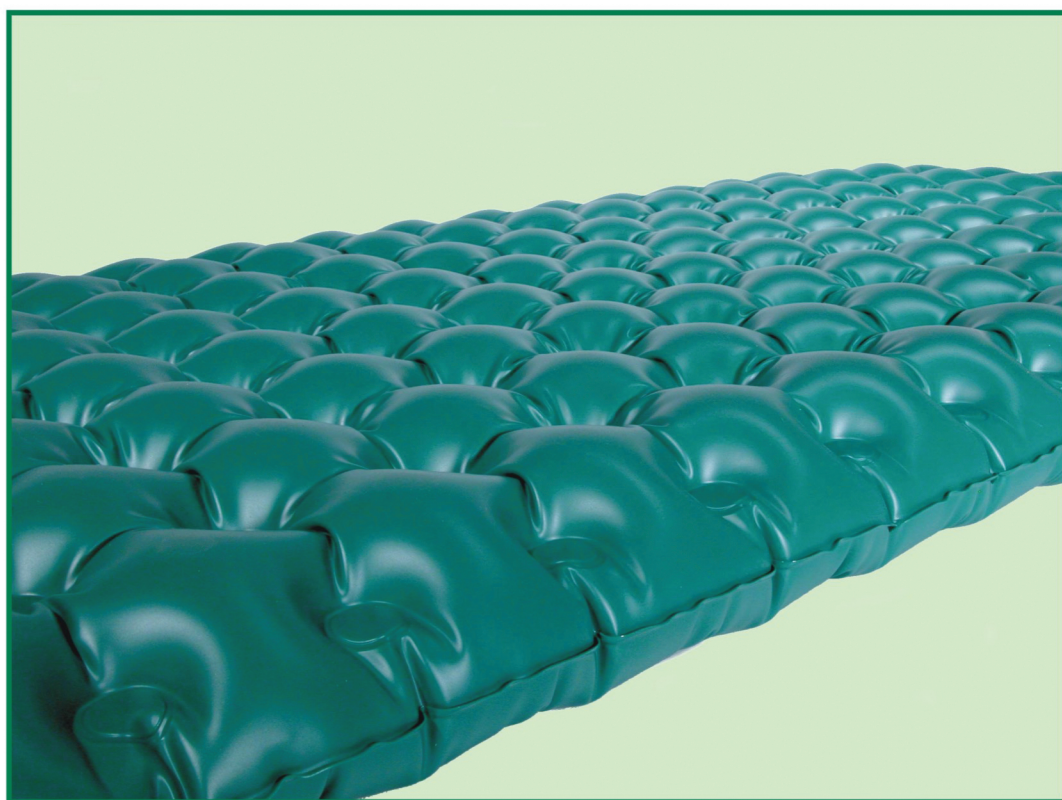


Materasso antidecubito pneumostatico
senza compressore collegato

Perché utilizzare CAREBED

- Indicato per la prevenzione e il trattamento delle piaghe da decubito
- Facile da lavare e disinfettare
- Stabile e confortevole per il paziente
- Assenza di una pompa costantemente collegata
- Adattabile a qualsiasi tipologia di letto, anche letti articolati
- Indicato per pazienti fino a 130 Kg
- Una pompa utilizzabile per più materassi
- Gonfiaggio personalizzato in base al peso del paziente
- Garantisce il mantenimento della vascolarizzazione periferica
- Pompa garantita a vita
- Lunga durata del materasso
- Di facile riparazione e manutenzione
- Marcatura CE
- Test allergologici: Hospital University MAS Malmo, Sweden
- Test infiammabilità secondo: NT 037/EN 597-1 e NT 037/EN597-2

Pompa elettrica 700MFE:

Regola in modo del tutto automatico il gonfiaggio del materasso in modo da garantire una contropressione ottimale al di sotto della pressione di occlusione dei vasi periferici. Una pompa è sufficiente per l'attività ordinaria di un intero reparto.

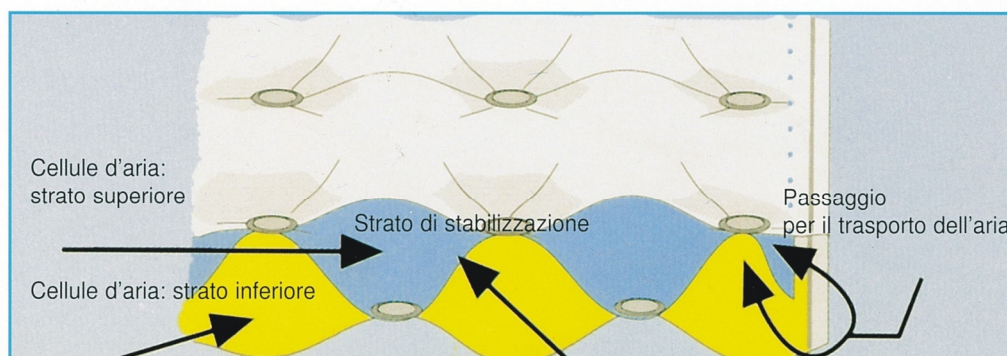

CAREBED:

è costituito da oltre 300 celle intercomunicanti tra loro e riempite con aria. L'aria viene ridistribuita tra le celle istante per istante, generando una contropressione uniforme lungo tutta la superficie del corpo in base alla sagoma ed al peso del paziente

Carebed:



Caratteristiche:

- Valvola RCP per sgonfiaggio rapido (4" circa)
- Lacci angolari per ancoraggio al materasso sottostante
- Materiale decontaminabile a 90°C e senza isteresi elastica
- Superficie facile da pulire (senza intercapedini a presidio sgonfio)
- Regolazione gonfiaggio personalizzata ed automatica
- Assenza di compressore collegato costantemente
- Riparazione senza ausilio di toppe tramite apposito kit
- Tempo di gonfiaggio 1 min circa

Caresit:



Caratteristiche:

- Idoneo alla prevenzione e coadiuvante alla cura di LDD
- Facilità di lavaggio in acqua corrente
- Facile riparazione
- Disponibile versione per pazienti con postura non autonoma
- Disponibile telo di copertura traspirante



- Varie misure a catalogo per ogni tipologia di sedia
- Pompa di gonfiaggio manuale o a batteria
- Stabile e confortevole

Come utilizzare CAREBED



Posizionare CAREBED su un normale materasso di degenza e adagiare il paziente su CAREBED. Gonfiare CAREBED usando l'apposita pompa per circa 60 secondi. La prevenzione ed il trattamento delle piaghe è in atto!

Codice	Descrizione	Dimensioni	Codice	Descrizione
630 MFE	Materasso Carebed per sala operatoria	103x48	T601MFE	Telo copertura per CARESIT 661MFE, 661MFE2
640 MFE	Materasso Carebed per sala operatoria	170x48	T602MFE	Telo copertura per CARESIT 662MFE, 662MFE2
645 MFE	Materasso Carebed per sala operatoria	200x48	T603MFE	Telo copertura per CARESIT 663MFE, 663MFE2
650 MFE	Materasso Carebed	190x90	T604MFE	Telo copertura per CARESIT 664MFE, 664MFE2
661 MFE	Cuscino CARESIT gonfiabile	40x40	T610MFE	Telo copertura per CAREBED
661 MFE2	Cuscino CARESIT gonfiabile diviso	40x40	700MFE	Pompa elettrica per CAREBED
662 MFE	Cuscino CARESIT gonfiabile	45x40	703MFE	Pompa manuale per CARESIT
662 MFE2	Cuscino CARESIT gonfiabile diviso	45x40	704MFE	Pompa a batteria per CARESIT
663 MFE	Cuscino CARESIT gonfiabile	45x45	705MFE	Pompa manuale per Carexit e Carebed (particolarmente indicata per home care)
663 MFE2	Cuscino CARESIT gonfiabile diviso	45x45	501MFE	Valvola immissione/scarico aria
664 MFE	Cuscino CARESIT gonfiabile	50x45	502MFE	Tappo per valvola
664 MFE2	Cuscino CARESIT gonfiabile diviso	50x45	503MFE	Kit riparazione