

UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE
Facoltà di Medicina - ROMA

Corso di Perfezionamento

Tecnologie per l'autonomia e l'integrazione sociale
delle persone con disabilità

Anno Accademico 2006-2007

FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS
Centro S. Maria della Pace - ROMA

“Gli ausili nei trasferimenti dei pazienti lungodegenti”

Unità Didattica

Dott. Paolo Tessari

Scheda di movimentazione

Sig.....

Reparto.....

Data.....

<i>Attività di movimentazione</i>	<i>Abilità/difficoltà dell'assistito</i>	<i>Procedura delle manovre assistenziali</i>	<i>Ausili ergonomici indicati</i>
Spostamento verso il bordo del letto			
Passaggio posturale da supino al decubito laterale			
Spostamento verso la testiera del letto			
Passaggio posturale da supino a seduto con le gambe fuori dal letto e viceversa			
Trasferimento letto-carrozzina			
Trasferimento carrozzina - letto			
Trasferimento carrozzina - wc e viceversa			
Trasferimento carrozzina /sacca da bagno e viceversa			
Spostamento sulla carrozzina per riposizionamento			
Passaggio da seduto in piedi e viceversa			
Assistenza alla deambulazione			

Per presa visione:

Equipe di lavoro

Istruttore di Reparto

Consulenti formatori





training



teli di scivolamento

Sacco di trasferimento "EasySlide"
(Demarca)

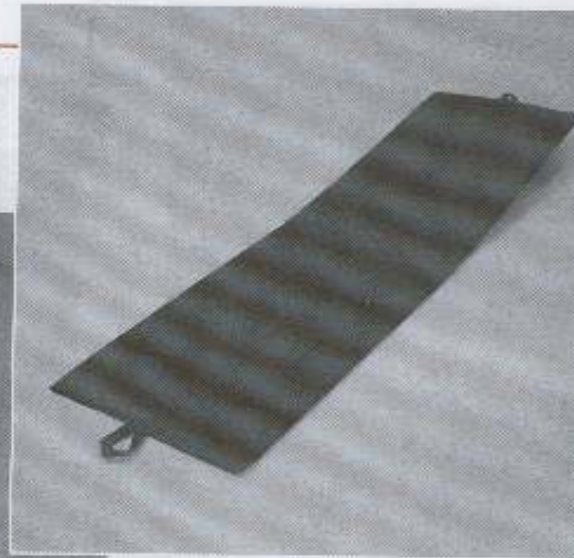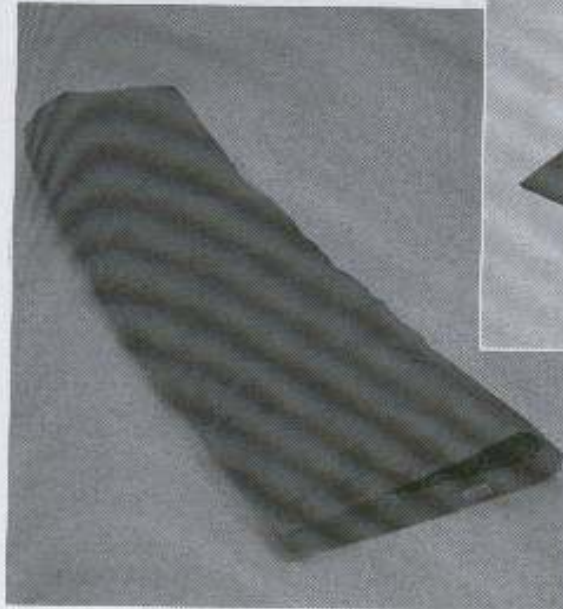

Asse di trasferimento "SuperSlide"
(Demarca)

DENOMINAZIONE	SISTEMI PER TRASFERIMENTO E SOLLEVAMENTO
DESCRIZIONE	<i>Costruiti in poliestere, con nylon a basso attrito all'interno dei sacchi. La fodera esterna in nylon ruota su se stessa, mentre la parte interna è imbottita.</i>
FUNZIONE	<i>Facilitare il trasferimento e il sollevamento del paziente durante la fase di spostamento da una superficie a un'altra, riducendo gli attriti e gli sfregamenti e limitando, inoltre, il rischio di infortuni sia per gli assistenti sia per i pazienti stessi.</i>
ADDESTRAMENTO	<i>Apprendimento della tecnica da parte dei familiari e degli assistenti.</i>
MANUTENZIONE	<i>Lavaggio in autoclave a 130 °C, in lavatrice a 60 °C o disinfezione con alcool.</i>
ACCESSORI E MODIFICHE	<i>Imbottitura interna con fibre siliconate utilizzata in presenza di ammassamenti e/o piaghe sacrali.</i>
FORNITURA	<i>Ausili non prescrivibili e rintracciabili nei negozi ortopedici specializzati.</i>



supino-decubito laterale






verso la testiera del letto



parziale collaborazione




presa crociata

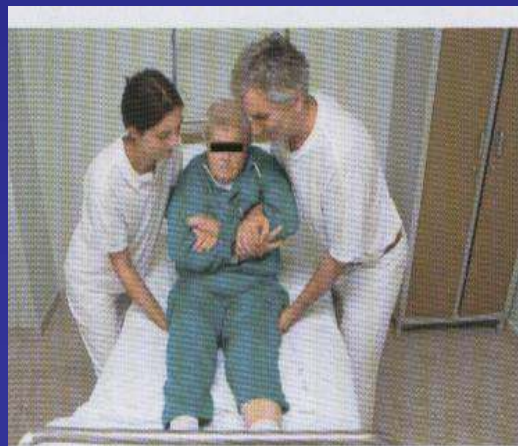




***telo piccolo
di scivolamento***

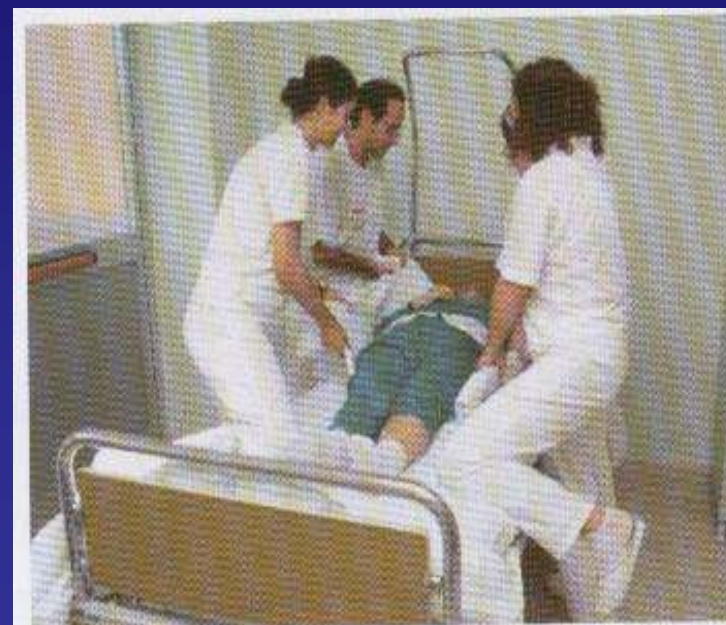

traversa

supino-gambe fuori dal letto

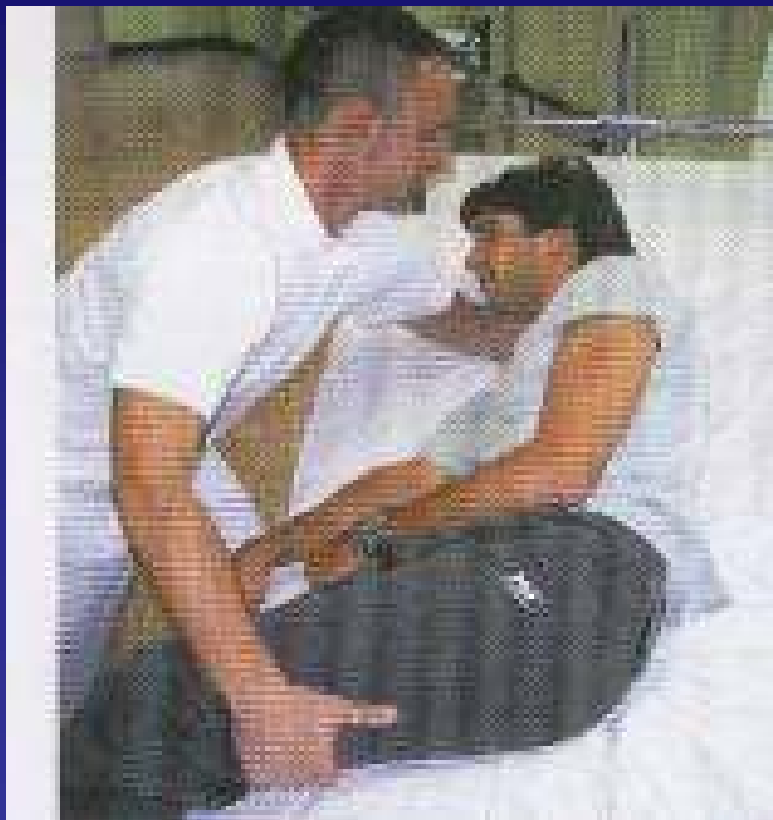



cintura ergonómica



Sollevatore elettrico
(Mecc. San)



Diversi modelli di sollevatore
(Furnagalli)

Ш
Д
Р
О
Н
А
К
П
Г
О
С



POSIZIONAMENTO IMBRAGATURA





LETTO-CARROZZINA

DENOMINAZIONE**SOLLEVAPERSONE****DESCRIZIONE**

- Ausili mobili con azionamento manuale, elettrico o idraulico, dotati di ruote con una base regolabile in larghezza e un'imbrocatura che avvolge e sostiene la persona e dispositivi di sicurezza indispensabili come antiscivolo, discesa di emergenza, blocco per sovraccarico
- Ausili fissi a muro composti da un braccio lungo con imbrocatura e sedia
- Ausili fissi a soffitto composti da un binario di guida rettilineo o curvo sul quale scorre il sollevapersona che consente il trasferimento in stanze diverse

FUNZIONE

Ausili in uso in caso di paziente anziano completamente dipendente con gravi disabilità motorie, che facilitano il trasferimento dal letto alla carrozzina o alla vasca e viceversa. Consentono pratiche assistenziali corrette e complete, riducendo il rischio di sovraccarico meccanico della colonna vertebrale degli operatori e dei familiari

ADDESTRAMENTO

Necessario per gli assistenti e i familiari

MANUTENZIONE

Seguire le indicazioni date dalla ditta fornitrice. Prestare attenzione alla carica delle batterie nei modelli elettrici

ACCESSORI E MODIFICHE

Diversi tipi di imbrocature: integrale, a due cinghie, a sostegno sottoascellare, ad amaca, a barella, per uso WC e uso bagno

CONTROINDICAZIONI

In presenza di fratture agli arti inferiori, di protesi d'anca ecc.

FORNITURA

Ausilio prescritto dal medico specialista con modello 03 con i seguenti codici ISO del Nomenclatore Tariffario: 1.2.36.03.003 (sollevatore manuale), 1.2.36.03.006 (sollevatore elettrico) e aggiuntivi





assetto





Carrozzina-letto





cintura

disco girevole





Cintura ergonomica "FlexiBelt"
(Demarta)



Cintura ergonomica "FlexiBelt"
(Demarta)



Cintura ergonomica "FlexiBelt"
(Demarta)

DENOMINAZIONE

CINTURE PER TRASFERIMENTO E SOLLEVAMENTO

DESCRIZIONE

Costruite in materiale sintetico, con alcune maniglie posizionate lateralmente, anteriormente o posteriormente, verticali o orizzontali

FUNZIONE

Facilitare il trasferimento della persona riducendo gli attriti e gli sfregamenti e limitando il rischio di infortuni sia per gli assistenti sia per i pazienti stessi

ADDESTRAMENTO

Necessario per assistenti e familiari. La cintura, se indossata sul paziente, aiuta l'operatore ad alzarlo, a tenerlo e a farlo deambulare con facilità e sicurezza; se indossata sull'operatore, crea delle prese ottimali alla vita che aiutano il paziente a tenersi o ad aiutarsi nei sollevamenti

MANUTENZIONE

Lavaggio con sapone a 60 °C

ACCESSORI E MODIFICHE

Disponibili in varie dimensioni

FORNITURA

Ausili non prescrivibili e rintracciabili nei negozi ortopedici specializzati

Disco girevole "TurnTable"
(Demarta)



Disco girevole "TurnTable"
(Demarta)



DENOMINAZIONE

DISCO GIREVOLE

DESCRIZIONE

Costruito in materiale plastico, composto di due dischi antiscivolo all'esterno e lisci all'interno: quello sottostante è a contatto con il pavimento, quello sopra è mobile e gira sull'altro. È leggero e maneggevole; è sicuro grazie proprio al materiale antiscivolo che evita perdite di equilibrio nel momento dello spostamento

FUNZIONE

Facilitare lo spostamento da seduto e da in piedi, facendo eseguire una rotazione con appoggio sui piedi, con l'aiuto di una persona (es., dalla carrozzina al letto, alla tazza WC, alla sedia e viceversa)

ADDESTRAMENTO

Training per la tecnica d'uso per l'operatore e i familiari

MANUTENZIONE

Lavaggio a 60 °C con sapone

ACCESSORI E MODIFICHE

Esiste di diverse misure, con o senza maniglie


FORNITURA

Ausilio non prescrivibile e rintracciabile nei negozi ortopedia specializzati

riposizionamento

da seduto



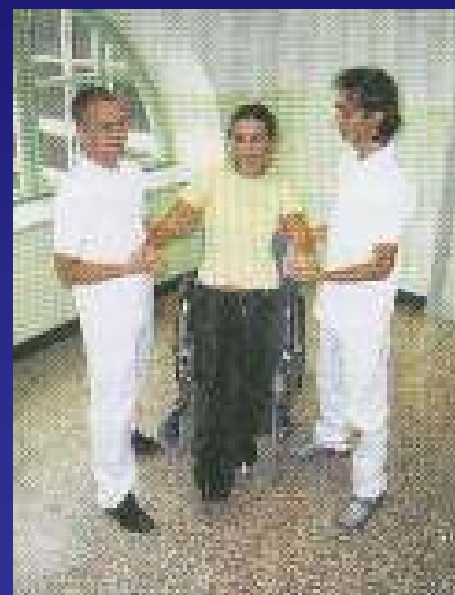

seduto-in piedi



con cintura ergonomica



assistenza alla deambulazione