

Le sacche di raccolta dell'urina nascono da una propria progettazione e produzione e sono realizzate nel nostro stabilimento a Lobbach mediante una saldatrice ad alta frequenza. La varietà di forme, di misure e delle caratteristiche dell'equipaggiamento rispondono il più ampiamente possibile alle esigenze e ai desideri dei Clienti.

Sacche di raccolta dell'urina

Sacche da gamba, sacche rettangolari, sacche sportive, sacche ad alta discrezione, sacche funzionali, sacche da letto



Sacche da gamba SAUER

Le sacche da gamba nella forma anatomica piegata ad angolo, sono state studiate appositamente per persone in carrozzina, rispettando la posizione seduta. Particolarmente confortevoli nell'indossarle, offrono maggiore libertà e sicurezza. Grazie alla varietà delle caratteristiche dell'equipaggiamento, è possibile adattare i vari elementi alle esigenze individuali.

L'elevata capienza: 1,3 l consentono di essere indipendenti anche nel caso in cui i servizi igienici siano irraggiungibili, dando così sicurezza durante gli spostamenti e sul lavoro. Le sacche da 0,7 l sono indicate soprattutto per bambini e persone deambulanti.

La forma anatomica piegata ad angolo: con tubo di immissione obliquo è la premessa indispensabile per un corretto funzionamento di queste sacche stando seduti in carrozzina: comode da indossare, invisibili esteriormente, garantiscono un sicuro deflusso dell'urina e sono facili da svuotare.

Sacche rettangolari SAUER

Grazie alla loro forma sono particolarmente adatte alle persone deambulanti, ma anche alle persone in carrozzina e ai bambini e si possono indossare sia sulla gamba destra che sulla sinistra. Un'ulteriore particolarità che rende queste sacche ancora più confortevoli è rappresentata dal rivestimento in cotone.

Capienza: con la loro capienza da 0,6 o 1,0 l sono concepite principalmente per persone deambulanti, le quali generalmente non hanno difficoltà a svuotare le sacche. Inoltre una piccola sacca risulta meno ingombrante e più discreta.

Tubicino flessibile lungo: che può essere accorciato a seconda delle diverse esigenze personali e caratteristiche fisiche; ciò permette di fissare la sacca sulla coscia o sul polpaccio. L'adattatore allegato, liscio o a gradini, viene infilato nel tubicino accorciato della sacca; in questo modo è possibile effettuare un collegamento sicuro con tutti i condom e i cateteri comuni.

Rivestimento in cotone: costituito da fiocchi di cotone naturale. La sacca è rivestita solo su un lato, mentre l'altro è trasparente. Un'alternativa è rappresentata dal Stoff-Cover SAUER collegato ad una sacca non rivestita ► pag. 32



Foglio di rivestimento in cotone



Foglio strutturato

Il controllo al 100%

Ciascuna sacca viene sottoposta a severi controlli per testare la sua tenuta e la sua funzionalità, garantendo così a chi ne fa uso un alto grado di sicurezza.

Le sacche di raccolta d'urina SAUER hanno, a seconda del modello, le seguenti caratteristiche.

1 Il raccordo

con o senza adattatore permette un collegamento semplice e sicuro a tutti i tipi di condom aventi il tubo flessibile incorporato e ai cateteri.

2 Il tubicino di immissione

rigido o morbido, disponibile in diverse lunghezze, può essere accorciato a piacere tenendo conto dell'altezza individuale.

3 La valvola

garantisce un deflusso regolare dell'urina nella sacca, anche nel caso in cui quest'ultima non sia in posizione del tutto corretta.

4 La valvola antireflusso

blocca il reflusso dell'urina, ad esempio durante i trattamenti fisioterapici.

5 Gli occhielli

assieme alle cinture da gamba regolabili, permettono di fissare in modo sicuro e secondo le proprie esigenze la sacca da gamba.

6 Le valvole di scarico

- Valvola a saracinesca, facile da azionare anche in caso di ridotta motilità delle dita, in vendita anche con un anello di sicurezza complementare per evitare un'apertura involontaria.
- Valvola girevole: compatta e discreta soprattutto per piccole sacche, rende possibile un collegamento sicuro anche ad una sacca da letto.
- Valvola a pressione: per manovrare con una sola mano; la sacca può essere indossata a destra o a sinistra.

7 Il materiale

è molto robusto e la sua superficie è realizzata in modo da ostacolare la formazione di sudore e l'appiccicarsi della sacca sulla pelle.

8 La saldatura

Tutte le valvole vengono incorporate e saldate a pressione nella sacca. Le doppie cuciture saldate a pressione garantiscono la tenuta della sacca anche in caso di sovraccarico.



Tipi speciali di sacche da gamba SAUER


La gamma dei nostri prodotti per l'incontinenza urinaria è articolata in modo tale da offrire, in quasi tutti i casi, non solo alternative di serie, ma anche soluzioni che soddisfino il più possibile le esigenze individuali. Uno dei nostri sforzi principali è inoltre quello di trovare altre soluzioni a tutti quei problemi individuali che non sono stati contemplati nel nostro catalogo.

Pertanto Vi preghiamo di metterVi in contatto con noi telefonicamente non solo in caso di problemi, ma anche qualora abbiate domande riguardanti il nostro programma. Potremo così consigliarVi in maniera più completa possibile e trovare insieme a Voi la soluzione ottimale.

Immissione e scarico

Specialmente per le sacche da gamba abbiamo varie possibilità di adattarle esattamente ai Vostri desideri, applicando un modico sovrapprezzo. Sono possibili le seguenti modifiche:

- tubicini di immissione più lunghi o più corti (► fig. a destra)
- tubicini di immissione più rigidi o più morbidi
- un altro tipo di adattatore
- scarico semplice al posto di valvole da scarico a saracinesca o a pressione

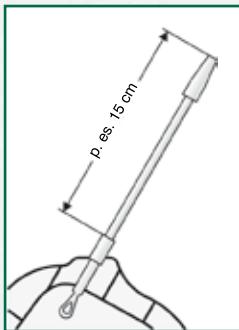

La lunghezza dei tubicini di immissione si misura così

Valvola a saracinesca per persone che usualmente indossano la sacca a sinistra

Per queste persone offriamo una sacca da gamba (► pag. 22–24) con una valvola a saracinesca girata di 180°, in modo che si trovi all'interno della gamba e sia protetta da un'apertura accidentale. Le alette sono gialle. Il nr. d'ordine va completato aggiungendo ".L" (p. es. 701.1212.L).

Rivestimento in cotone

Per impedire il contatto diretto della sacca con la pelle, è possibile, applicando un sovrapprezzo, rivestire le sacche da gamba SAUER (► pag. 22–26, 28–30) con uno strato di cotone. Per motivi tecnici il rivestimento è praticabile solo su un lato della sacca, perciò questi tipi di sacche sono adatti per essere indossati sulla gamba destra.

Avvertenze riguardanti le ordinazioni

Produzioni speciali hanno un tempo di consegna di circa 30 giorni; le sacche sterili invece, qualora non siano immediatamente disponibili, hanno un tempo di consegna di circa 10 settimane.

Le confezioni speciali non possono essere cambiate o ritirate.

In caso di domande riguardanti le confezioni speciali, il nostro personale specializzato è a Vostra disposizione.

Vi consigliamo tuttavia di usare uno "Stoff-Cover" (► pag. 32), che può essere utilizzato e lavato ripetutamente, risultando perciò più economico e più ecologico.

Sacche di raccolta dell'urina sterili

Una serie di sacche di raccolta dell'urina SAUER sono a disposizione in confezione sterile. A richiesta forniamo tutte le sacche sterili in confezione singola.

Consulenza

Qualora abbiate domande, dubbi o problemi riguardanti il nostro programma di trattamento dell'incontinenza urinaria, Vi invitiamo a telefonarci. Spesso infatti è sufficiente un colloquio con il nostro personale esperto per risolvere in modo soddisfacente la maggior parte dei problemi.


Fornitura

In Italia è prevista la fornitura gratuita di alcuni prodotti per l'incontinenza urinaria ed esiste un nomenclatore tariffario che elenca i quantitativi mensili che possono essere forniti e la relativa spesa massima che lo Stato si assume. La procedura per ottenere le forniture viene fatta tramite le Aziende Sanitarie Locali di appartenenza.

Manfred Sauer Italia ha predisposto delle confezioni che corrispondono alle descrizioni del tariffario, illustrate dettagliatamente a pag. 8 e 22 di questo stesso catalogo.

Modalità di fornitura

Tutti i nostri prodotti possono essere forniti dai negozi specializzati nella vendita di apparecchiature sanitarie e dalle farmacie.

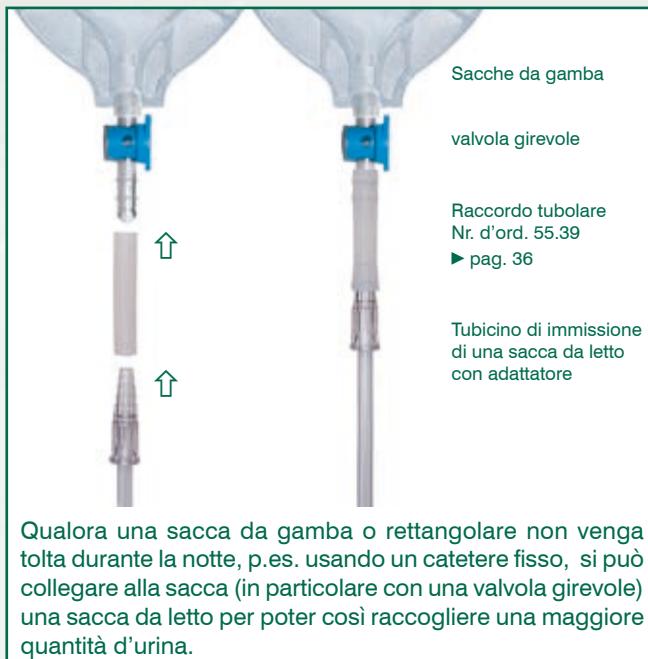

Stoff-Cover SAUER	► pag. 32
Cintura da gamba e cintura da vita	► pag. 33
Fodera per sacche	► pag. 34
Sacche da letto	► pag. 35
Pezzi di ricambio	► pag. 36+37

Possibilità d'uso

	C	D	L	
Sacche da gamba SAUER.....senza adattore	●	◎	○	► pag. 22
Sacche da gamba SAUER.....adattore fisso.....	●	◎	○	► pag. 23
Sacche da gamba SAUER.....adattore smontabile	●	◎	○	► pag. 24
Sacche rettangolari SAUER	●	●	○	► pag. 25
Sacche rettangolari SAUER	●	●	○	► pag. 26
Sacche rettangolari	●	●	○	► pag. 27
Sacche sportive SAUER	◎	●	○	► pag. 28
Sacche sportive SAUER	◎	●	○	► pag. 28
Sacche ad alta discrezione SAUER	◎	●	○	► pag. 29
Sacche funzionali SAUER	◎	◎	●	► pag. 30
Sacche da letto	○	○	●	► pag. 31

C = Persone in carrozzina D = Persone deambulanti L = Assistenza a letto ● = adatto ◎ = condizionatamente adatto ○ = non adatto

Sacche da gamba SAUER senza adattatore



Per persone in carrozzina. Il collegamento al condom SAUER avviene tramite un tubicino flessibile (53.xx, 56.xx, 97.xx, 97.xxxx.xx), perciò senza adattatore. Il tubo di immissione va accorciato tenendo conto dell'altezza individuale.

- Forma anatomica piegata ad angolo; immissione obliqua; capienza: 1,3 l o 0,7 l.
- **Immissione:** senza adattatore; tubo di immissione rigido da 20 cm, accorciabile; valvola anti-reflusso.
- **Scarico:** valvola a saracinesca, girevole o a pressione.

	valvola a saracinesca		valvola girevole		valvola a pressione	
<p>senza adattatore tubicino flessibile rigido di 20 cm accorciabile</p>						
Nr. d'ord.	701.1020	702.1020	701.3020	702.3020	701.2020	702.2020

■ **Confezione da 8 pezzi.** Tutte le cinture da gamba prescelte devono essere ordinate separatamente ► pag. 33, Stoff-Cover ► pag. 32.

Confezione di sacche

Manfred Sauer Italia ha predisposto delle confezioni che corrispondono alle descrizioni contemplate nel “Regolamento per le prestazioni di assistenza protesica” (nomenclatore tariffario), ed in alcuni casi **ricongducibili per omogeneità funzionale** (D.M. 332/99 art. 1 comma 5).

Inoltre l'art. 8 “Tariffe e prezzi di acquisto dei dispositivi protesici” al comma 2, cita: “... al fine di garantire la capillarità della distribuzione dei dispositivi protesici, il rispetto di standard di qualità e la disponibilità di una gamma di modelli idonea a soddisfare specifiche esigenze degli assistiti.”; questo comma prevede che le A.S.L. garantiscano la fornitura dei materiali richiesti dall'utente.

Le nostre sacche da gamba corrispondono alle descrizioni:

- **codice ISO 09.27.04.006 – tipo riutilizzabile;** quantitativo massimo mensile 8 pezzi.

Disponiamo invece di due tipi di sacche da letto:

- **codice ISO 09.27.07.003 – tipo monouso** quantitativo massimo mensile 30 pezzi.

- **codice ISO 09.27.07.006 – tipo riutilizzabile** quantitativo massimo mensile 8 pezzi.



Sacche da gamba SAUER con adattatore fisso

Per persone in carrozzina. Adatte per il collegamento a tutti i tipi di condom e cateteri.

- Forma anatomica piegata ad angolo; immissione obliqua; capienza: 1,3 l o 0,7 l.
- **Immissione:** con adattatore fisso; tubicino flessibile morbido lungo 12 o 22 cm, non accorciabile; valvola antireflusso.
- **Scarico:** valvola a saracinesca, girevole o a pressione.

	valvola a saracinesca	valvola girevole	valvola a pressione
con adattatore tubicino flessibile morbido lungo 12 cm non accorciabile			
Nr. d'ord.	701.1112 702.1112	701.3112 702.3112	701.2112 702.2112

	valvola a saracinesca	valvola girevole	valvola a pressione
con adattatore tubicino flessibile morbido lungo 22 cm non accorciabile			
Nr. d'ord.	701.1122 702.1122	701.3122 702.3122	701.2122 702.2122

■ **Confezione da 8 pezzi.** Tutte le cinture da gamba prescelte devono essere ordinate separatamente ► pag. 33, Stoff-Cover ► pag. 32.

Sacche da gamba SAUER con adattatore smontabile

Per persone in carrozzina. Adatte per il collegamento a tutti i tipi di condom ed ai cateteri.



- Forma anatomica piegata ad angolo; immissione obliqua; capienza: 1,3 l o 0,7 l.
- **Immissione:** adattatore estraibile; tubicino flessibile morbido lungo 35 cm accorciabile; valvola antireflusso.
- **Scarico:** valvola a saracinesca, girevole o a pressione.

	valvola a saracinesca		valvola girevole		valvola a pressione	
<p>con adattatore tubicino flessibile morbido lungo 35 cm accorciabile</p>						
	Nr. d'ord.	701.1335	702.1335	701.3335	702.3335	701.2335

- Confezione da 8 pezzi. Tutte le cinture da gamba prescelte devono essere ordinate separatamente ► pag. 33, Stoff-Cover ► pag. 32.