

Basi per interno ed esterno



Wave



Flipper



Basculamento da 0° a 30°
o da -10° a +20°.

Specifiche tecniche

Peso max utente
Altezza max utente
Ampiezza seduta
Profondità seduta
Altezza schienale alle ascelle
Distanza ascelle - sommità schienale
Angolazione anche

Misura 1
80 kg
125 - 160 cm
34 - 39 cm
33 - 46 cm
31 - 47 cm
16 cm
-20° / +40°

Misura 2
115 kg
150 - 185 cm
41 - 46 cm
39 - 50 cm
31 - 50 cm
18 cm
-20° / +40°

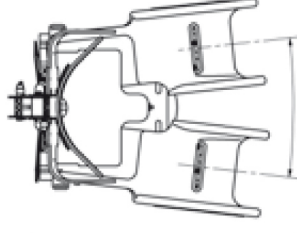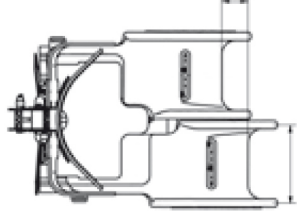

Differenza lunghezza arti

Misura 1 - 7 cm
Misura 2 - 5 cm

Larghezza

Misura 1 - 14 cm
Misura 2 - 17 cm

Abduzione

Misura 1 - 10°
Misura 2 - 10°

Timbro del Rivenditore Autorizzato

AUSILI



Sharky

Dopo parecchi anni di apprezzamenti per la funzionalità di Delfi, è maturata la convinzione che un analogo sistema fosse indispensabile anche per giovani ed adulti.

SHARKY entra in gioco laddove termina il compito di Delfi, ed è stato progettato specificamente per giovani ed adulti con tono fluttuante e tono estensore attivo particolare. Questo sistema è stato pensato per utenti con diversi tipi di deformità muscolo-scheletriche (cifosi, retroversione del bacino e sublussazione dell'anca). La fascia di utenza è compresa tra gli 11 anni e l'età adulta.

SHARKY consente all'utente una maggiore stabilità posturale, prolungando la tolleranza nei confronti della posizione seduta e favorendo la possibilità di movimenti attivi.



Accessori

Il sistema SHARKY è corredato di diversi accessori opzionali.

È interfacciabile con la maggior parte delle basi interno/esterno presenti sul mercato.



Poggiatesta taglia 1 lungo



Poggiatesta taglia 2



Poggiatesta taglia 2 lungo



Poggiatesta morbido 10"



Poggiatesta morbido 14"



Poggiatesta serie Pro



Poggiatesta serie Pro Junior



Schienale regolabile




Supporto pelvico



Supporto arti superiori



Supporto braccio/avambraccio

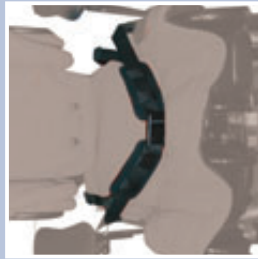

Cintura pelvica



Poggiapiedi



Supporto separato per piedi/polpacci



Imbottiture per poggiapiedi



Tavolino



Maniglia di spinta



Struttura ludica



Pettorina



Pettorina con zip



Pettorina a incrocio



Pettorina ad H



Piasta di supporto universale



Parasole/parapioggia



Sharky

Una seduta in continua evoluzione

Il sistema SHARKY può essere regolato in diversi modi. Lo schienale può essere reclinato e regolato indipendentemente in altezza. I poggiatesta possono essere regolati per consentire l'abduzione o l'adduzione indipendente delle anche, oltre che per conformarsi ad eventuali differenze di lunghezza degli arti. Attraverso queste regolazioni è possibile ottenere una posizione di seduta ottimale, oltre che consentire l'evoluzione del sistema in funzione della crescita dell'utente.




I cosciali possono essere regolati per consentire l'abduzione o l'adduzione indipendente delle anche, oltre che per conformarsi ad eventuali differenze di lunghezza degli arti. I cosciali possono essere regolati anche per conformarsi ad un'obliquità pelvica fissa.

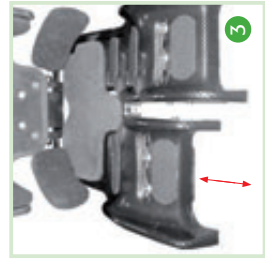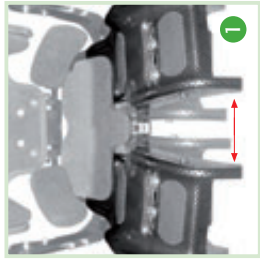

1 Obliquità pelvica

2 Abduzione

3 Differenza di lunghezza degli arti

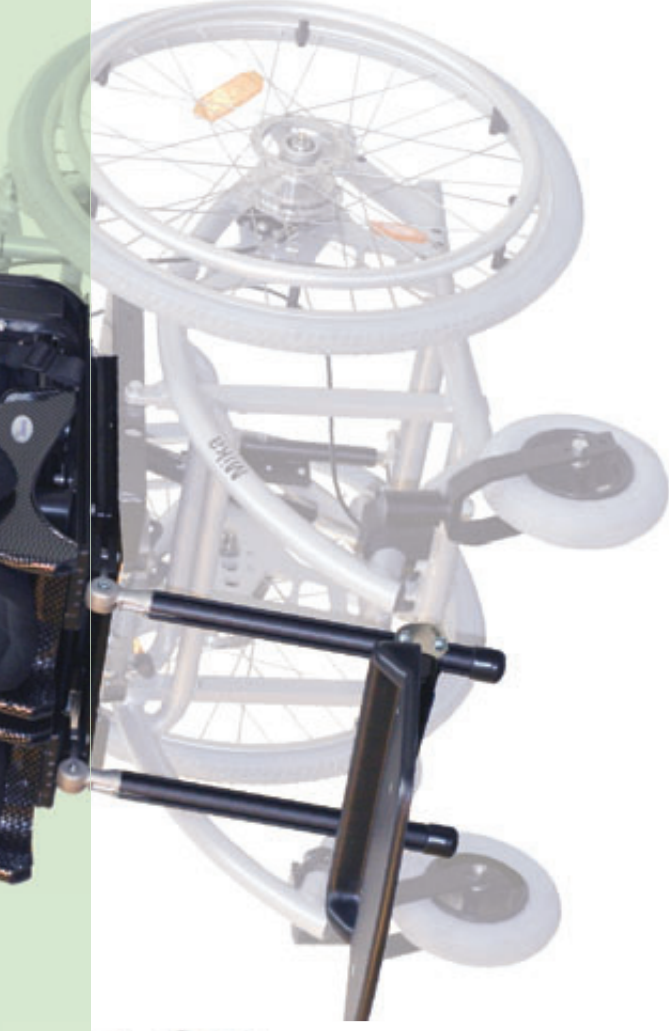

Schienale con regolazione toracale

Questo sistema è particolarmente indicato per gli utenti affetti da scoliosi. I supporti per il tronco possono essere regolati indipendentemente in altezza e larghezza



Schienale flessibile

L'inclinazione della seduta può essere regolata tra 5° in avanti e 30° all'indietro (partendo da un'angolazione iniziale delle anche di 90°).