


## COMFORT

Espressamente progettata per offrire grande **comfort** assieme ad una altrettanto **grande praticità** di utilizzo e di manutenzione, è la linea di cinture specifica per persone adulte che privilegiano la comodità, pur mantenendo l'attenzione ad un aspetto decoroso e gradevole.

Realizzate in microfibra, un materiale traspirante e morbido dalla piacevole texture e facile da lavare, ha una soffice imbottitura in espanso a cellula aperta per lasciar respirare liberamente le parti del corpo a contatto e la fodera rivolta alla persona in Sanygenical trattato in Hygienical, uno speciale tessuto con un trattamento anallergico ed antibatterico che assicura il mantenimento nel tempo delle importanti caratteristiche di igiene.

Una linea di cinture, quindi, essenziali e pratiche ma che esprimono grande attenzione e competenza, realizzate con materiali di avanguardia, frutto di avanzate tecnologie!

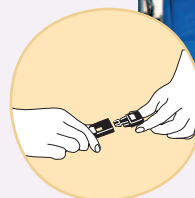

## AUSILI PER IL CONTROLLO POSTURALE DEL TRONCO

### PETTORINA CON BRETELLE codice 403902/3 senza zip

Pettorina che consente il mantenimento di un buon assetto posturale, mantenendo il tronco eretto ma lasciando libera la zona diaframmatica anteriore grazie alla sua particolare conformazione, con aggancio a 45° bilaterale sulle creste iliache. La morbida imbottitura assicura un comfort ottimale ed una traspirazione adeguata anche con le taglie più grandi.



### PETTORINA CON BRETELLE codice 403902A/3A con zip

Pettorina simile alla precedente, caratterizzata da una conformazione che permette il contenimento del tronco in modo confortevole, senza comprimere la zona diaframmatica anteriore, e realizzata con un'imbottitura che assicura una buona traspirazione. Questa versione è dotata di zip anteriore che permette di aprire il pad per effettuare con maggiore comodità i trasferimenti della persona.



## AUSILI PER IL CONTROLLO POSTURALE DEL BACINO

### DIVARICATORE ANATOMICO A PRESA PELVICA VERSIONE INTERO codice 406001/2/3

Cintura a presa pelvica con regolazione indipendente facilitata dei lembi di divaricazione per intervenire su eventuali asimmetrie. Realizzato in versione intera per assicurare un controllo maggiore e con imbottitura confortevole e molto traspirante, risulta apprezzato anche dagli utilizzatori di taglia molto robusta.



| DESCRIZIONE            | CODICE           | TAGLIA | DIMENSIONE PAD |
|------------------------|------------------|--------|----------------|
| PETTORINA CON BRETELLE | 403902 - 403902A | media  | cm 52x42       |
|                        | 403903 - 403903A | grande | cm 54x52       |

| DESCRIZIONE                                   | CODICE | TAGLIA  | PESO DELLA PERSONA |
|-----------------------------------------------|--------|---------|--------------------|
| DIVARICATORE ANATOMICO A PRESA PELVICA INTERO | 406001 | piccola | da kg 15 a kg 35   |
|                                               | 406002 | media   | da kg 35 a kg 60   |
|                                               | 406003 | grande  | da kg 60 a kg 90   |

**DIVARICATORE ANATOMICO  
A PRESA PELVICA  
VERSIONE CON DUE FASCE  
codice 406011**

Simile al precedente, è realizzato in due fasce separate per ottimizzare l'intervento sulla divaricazione anche con particolari asimmetrie.

Molto confortevole e facile da regolare, è adatto anche a persone di taglia molto robusta.



**CINTURA POLIVALENTE  
PER TRONCO  
codice 404602/3**


Una cintura speciale, adatta alle persone che necessitano un sicuro e deciso controllo solo a livello del torace.

Dona grande sensazione di contenimento ed insieme libertà nei movimenti, senza risultare opprimente.




A seconda delle specifiche necessità, la cintura polivalente è utilizzabile in due modi:

con incrocio posteriore  
per il controllo della caduta in avanti  
e maggiore libertà laterale

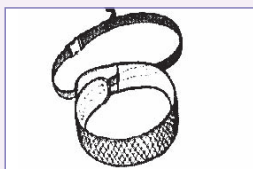

oppure

con incrocio anteriore  
per il sostegno del tronco  
ed un maggior contenimento laterale

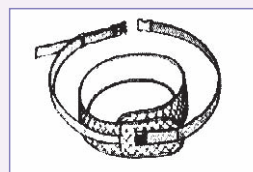

| DESCRIZIONE                                        | CODICE | TAGLIA | PESO DELLA PERSONA |
|----------------------------------------------------|--------|--------|--------------------|
| DIVARICATORE ANATOMICO A PRESA PELVICA A DUE FASCE | 406011 | unica  | da kg 35 a kg 90   |
| CINTURA POLIVALENTE PER TRONCO                     | 404602 | media  | da kg 35 a kg 60   |
|                                                    | 404603 | grande | da kg 60 a kg 90   |

## INDICAZIONI

### COME INDIVIDUARE LA TAGLIA

Indichiamo una tabella di riferimento che vi permetterà di individuare la taglia più corretta sulla base del peso e dell'altezza dell'utilizzatore. Nel caso in cui i parametri rilevati si discostassero molto da questi valori, scegliete in base

alla vostra esperienza, tenendo sempre presente il fatto che le parti imbottite devono essere adeguate alle forme della persona e coprire le sue asperità ossee, mentre la lunghezza delle cinghie è ampiamente e facilmente modificabile.

| PESO KG           | 9/14 | 11/17 | 14/20 | 17/23 | 21/28 | 25/35 | 30/45 | 37/55 | 45/65 | 54/75 | 63/85 | 70/95 |
|-------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ALTEZZA CM        | 80   | 90    | 100   | 110   | 120   | 130   | 140   | 150   | 160   | 170   | 180   | 190   |
| 403902 MEDIA      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 403903 GRANDE     |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 406001 PICCOLA    |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 406002 MEDIA      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 406003 GRANDE     |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 406011 REGOLABILE |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

### COME EFFETTUARE UNA CORRETTA MANUTENZIONE

Tutte le parti possono essere lavate ad acqua, a bassa temperatura (max 40°) a mano o in lavatrice con programma per tessuti delicati. Evitare l'uso di solventi o detersivi aggressivi, che possono danneggiare le cinghie e le parti in plastica, compromettendone la funzionalità. Il tessuto dei pad e delle pettorine è trattato Hygienical®; il trattamento è permanente e non si perde con i lavaggi, purché vengano rispettate le indicazioni.

### ATTENZIONE:

nessuna delle cinture Fumagalli può sostituire la cintura di sicurezza per l'automobile.

Le cinture possono essere usate per controllare ed aiutare la posizione seduta anche sul sedile dell'automobile, ma devono essere integrate da quelle di sicurezza.