


FLEX

Appartengono a questa linea diversi modelli e taglie di cinture che hanno come caratteristica essenziale la **flessibilità unita alla tenuta ed al comfort**. Sapienti accostamenti di tessuti diversi hanno infatti permesso di ottenere un risultato veramente speciale: una elasticità misurata che consente piccoli movimenti ed aggiustamenti posturali, ma controllati.

Confortevolmente, queste cinture permettono alla persona di muoversi, ma la aiutano anche a "ritornare in posizione". Al neoprene, un "classico" della flessibilità, sono stati associati tessuti che ne controllano l'elasticità permettendo il movimento soltanto nelle direzioni volute e un materiale con anima in espanso a cellule aperte, permeabile all'aria, per disperdere la naturale umidità corporea e favorire un'eccellente traspirazione. L'ultimo strato, a contatto con l'utilizzatore, è in Sanygenical trattato in Hygienical, per mantenere nel tempo le caratteristiche di igiene.

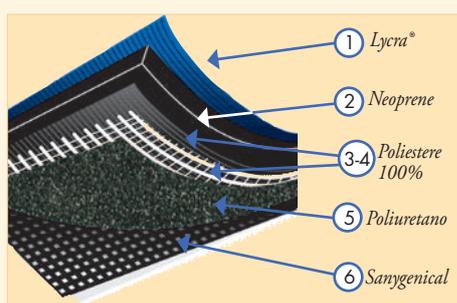

La superficie in Lycra® bielastica disponibile nei colori BLU e NERO (1) è facilmente lavabile e protegge lo strato più interno in Neoprene (2), un espanso a cellula chiusa di 3 mm di spessore ed estremamente elastico.

Seguono due strati in tessuto poliestere 100% (3-4), per garantire la tenuta in verticale e in orizzontale. Infine, lo strato di 2 mm di poliuretano a cellula aperta (5) permette il passaggio dell'aria e favorisce la traspirazione, mentre l'ultimo a contatto con l'utilizzatore, è in Sanygenical trattato in Hygienical (6), uno speciale tessuto antibatterico.



AUSILI PER IL CONTROLLO POSTURALE DEL TRONCO


BRETELLE CON CINTURA

codice 414001/2/3/4 blu

codice 414001N/2N/3N/4N nero

Nuovo modello che fascia le spalle e si adatta perfettamente alle forme dell'utilizzatore senza comprimere nessuna parte del torace. La particolare composizione elastica dell'imbottitura, inoltre, permette di effettuare delle minime inclinazioni in avanti mantenendo l'adeguato controllo del tronco.

Disponibile in diverse misure per soddisfare le necessità di bambini e adulti.

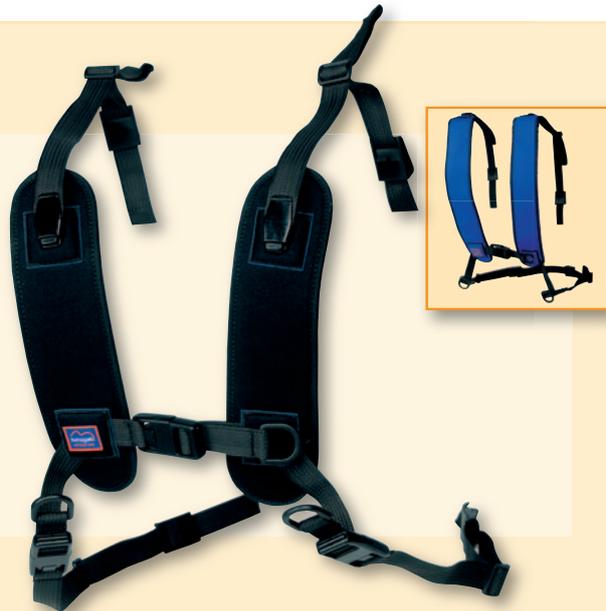

PETTORINA CON BRETELLE

codice 414101/2/3 blu

codice 414101N/2N/3N nero

Pettorina pensata per soddisfare le esigenze di tutti gli utilizzatori, dalle dimensioni più piccole alle più grandi. Il sostegno offerto dall'imbottitura segue perfettamente il corpo, senza comprimere il torace e senza rischiare di causare irritazioni o infiammazioni ed assicura una buona traspirazione delle parti coperte. Questo modello realizzato nella nuova imbottitura elastica, inoltre, consente di effettuare dei movimenti limitati, come ad esempio l'inclinazione in avanti del tronco, riportando poi il corpo nella giusta posizione.

Attenzione! Il modello è disponibile solo nella versione chiusa per mantenere le caratteristiche di elasticità dei pad. Per una pettorina con zip anteriore che ne permette l'apertura vedere nella sezione "Linea Tecnica".



DESCRIZIONE	CODICE	TAGLIA	DIMENSIONE PAD
BRETELLE CON CINTURA	414001 - 414001N	piccola	cm 26x6
	414002 - 414002N	media	cm 35x6
	414003 - 414003N	grande	cm 45x6
	414004 - 414004N	extra grande	cm 52x6
PETTORINA CON BRETELLE	414101 - 414101N	piccola	cm 42x28
	414102 - 414102N	media	cm 52x34
	414103 - 414103N	grande	cm 62x42

PETTORINA A FARFALLA

codice 414201/2/3 blu

codice 414201N/2N/3N nero

Una pettorina dal design speciale, che si adatta perfettamente alle forme femminili senza comprimerle e che non crea irritazioni lungo i bordi, grazie anche all'imbottitura Flex molto morbida. Questa pettorina risulta idonea anche per gli utilizzatori più sportivi, che necessitano di un controllo elastico e di maggiore libertà durante i movimenti.



DESCRIZIONE	CODICE	TAGLIA	DIMENSIONE PAD
PETTORINA A FARFALLA	414201 - 414201N	piccola	cm 28x22
	414202 - 414202N	media	cm 40x29
	414203 - 414203N	grande	cm 50x32



**AUSILI PER IL CONTROLLO
POSTURALE DEL BACINO**

**DIVARICATORE ANATOMICO
A PRESA PELVICA**

codice 414301/2/3 blu
codice 414301N/2N/3N nero

Permette di stabilizzare meglio il bacino fasciando le cosce in modo morbido, senza comprimerle, e facilita l'intervento su eventuali asimmetrie. L'imbottitura morbida e flessibile, infatti, contiene in modo confortevole la persona evitando gli scivolamenti ma consente un minimo spostamento degli arti.



**CINTURA PELVICA A 45° A DUE
PUNTI CON PAD E FIBBIA IN
PLASTICA**

codice 414401/2/3/4 blu
codice 414401N/2N/3N/4N nero

Speciale cintura dotata di un sistema di aggancio universale a due punti. I pad nell'imbottitura Flex garantiscono una tenuta sicura ed elastica, lasciando una limitata possibilità di movimento all'utilizzatore senza costringerlo.



DESCRIZIONE	CODICE	TAGLIA	PESO DELLA PERSONA
DIVARICATORE ANATOMICO A PRESA PELVICA	414301 - 414301N	piccola	kg 15-35
	414302 - 414302N	media	kg 35-60
	414303 - 414303N	grande	kg 60-90

DESCRIZIONE	CODICE	TAGLIA	DIMENSIONE PAD
CINTURA PELVICA A 45° A DUE PUNTI CON FIBBIA IN PLASTICA	414401 - 414401N	piccola	cm 12x6
	414402 - 414402N	media	cm 16x6
	414403 - 414403N	grande	cm 21x6
	414404 - 414404N	extra grande	cm 27x6

**CINTURA PELVICA A 45°
A QUATTRO PUNTI CON PAD
E FIBBIA IN PLASTICA**

codice 414501/2/3/4 blu

codice 414501N/2N/3N/4N nero

Simile alla precedente, questa cintura grazie ai quattro punti di aggancio garantisce una maggiore sicurezza per quelle persone che più facilmente tendono a scivolare in avanti con il bacino. L'imbottitura elastica garantisce sempre un contenimento confortevole e non opprimente.



DESCRIZIONE	CODICE	TAGLIA	DIMENSIONE PAD
CINTURA PELVICA A 45° A QUATTRO PUNTI CON FIBBIA IN PLASTICA	414501 - 414501N	piccola	cm 12x6
	414502 - 414502N	media	cm 16x6
	414503 - 414503N	grande	cm 21x6
	414504 - 414504N	extra grande	cm 27x6





INDICAZIONI

COME INDIVIDUARE LA TAGLIA

Indichiamo una tabella di riferimento che vi permetterà di individuare la taglia più corretta sulla base del peso e dell'altezza dell'utilizzatore. Nel caso in cui i parametri rilevati si discostassero molto da questi valori, scegliete in base

alla vostra esperienza, tenendo sempre presente il fatto che le parti imbottite devono essere adeguate alle forme della persona e coprire le sue asperità ossee, mentre la lunghezza delle cinghie è ampiamente e facilmente modificabile.

ALTEZZA CM	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190
PESO KG	9/14	11/17	14/20	17/23	21/28	25/35	30/45	37/55	45/65	54/75	63/85	70/95
PICCOLA	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
MEDIA	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
GRANDE	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
EXTRA GRANDE	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

COME EFFETTUARE UNA CORRETTA MANUTENZIONE

Tutte le parti possono essere lavate ad acqua, a bassa temperatura (max 40°) a mano o in lavatrice con programma per tessuti delicati. Evitare l'uso di solventi o detersivi aggressivi, che possono danneggiare le cinghie e le parti in plastica, compromettendone la funzionalità. Il tessuto dei pad e delle pettorine è trattato Hygienical®; il trattamento è permanente e non si perde con i lavaggi, purché vengano rispettate le indicazioni.

ATTENZIONE:

nessuna delle cinture Fumagalli può sostituire la cintura di sicurezza per l'automobile.

Le cinture possono essere usate per controllare ed aiutare la posizione seduta anche sul sedile dell'automobile, ma devono essere integrate da quelle di sicurezza.