



POSIZIONAMENTI
Sistemi di posizionamento



Body Map

Cuscino posturale e preventivo Body Map



Il metodo del sottovuoto, levando l'aria all'interno permette ai granuli di polistirolo di configurare il dispositivo della forma e la durezza desiderata. La pompa fornita in dotazione permette di eseguire facilmente l'operazione

Il tessuto Activ Pren, appositamente studiato, aumenta i benefici di questi dispositivi. È un tessuto a quattro strati (quelli all'interno forati) concepito per fornire confort, circolazione dell'aria e assorbimento del sudore.

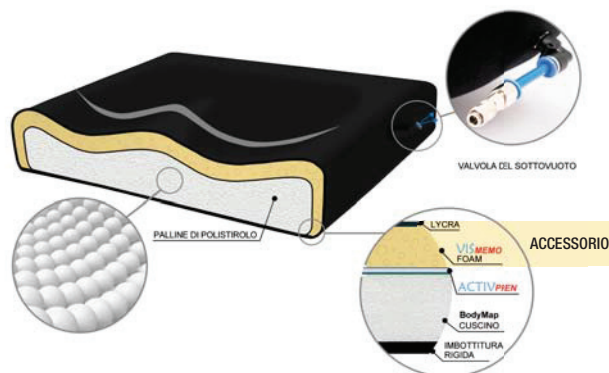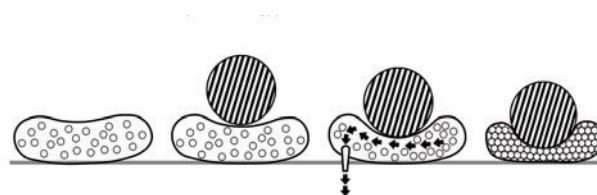

Grazie alla qualità della produzione, curata nella qualità dei materiali interni e delle cuciture, il sistema di sotto vuoto creato può essere mantenuto per alcune settimane. Non sono necessarie quindi "manutenzioni" giornaliere (generalmente un controllo settimanale è sufficiente). Viene viceversa consigliato di sfruttare questi "plus" di facile adattabilità e modellabilità, valutando la personalizzazione ogni volta che si posiziona l'ausilio in modo da mantenere efficacemente la distribuzione dei carichi scelta. La linea Body Map è stata sviluppata in una serie di forme e misure, utili a soddisfare una gamma ampia di esigenze posturali.






POSIZIONAMENTI
Sistemi di posizionamento

Body Map



Supporto per il tronco

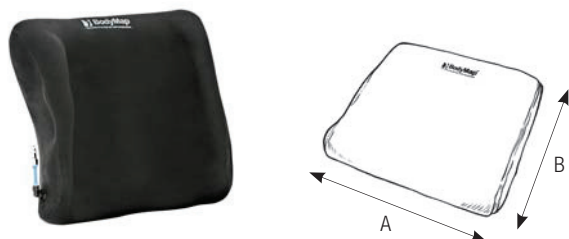


Riconducibile per omogeneità funzionale (a discrezione del medico specialista) al codice 18.09.39.018: unità posturale tronco bacino su calco (in abbinamento con un cuscino).




Disponibile in diverse misure.

Codice articolo	A	B
BODY B1 SC	40 cm	30 cm
BODY B2 SC	50 cm	40 cm
BODY B3 SC	60 cm	50 cm
BODY B4 SC	70 cm	60 cm

Supporto poggiatesta

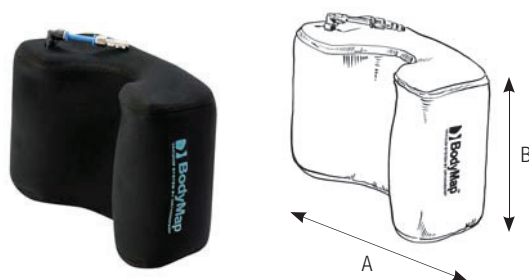


Riconducibile per omogeneità funzionale (a discrezione del medico specialista) al codice 18.09.39.024: unità posturale per il capo su calco.

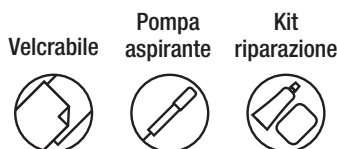


Disponibile in diverse misure.

Codice articolo	A	B
BODY D1 PT	40 cm	15 cm
BODY D2 PT	45 cm	17 cm
BODY D3 PT	52 cm	19 cm

Supporto per arto superiore

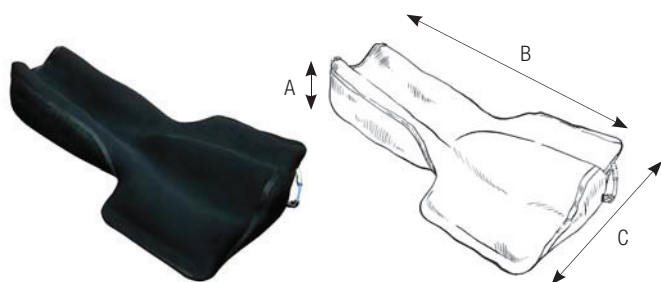

Riconducibile per omogeneità funzionale (a discrezione del medico specialista) al codice 18.09.39.030: unità posturale per arto superiore e 18.09.39.154: appoggio palmare.

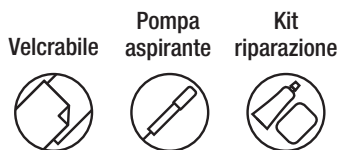

Utilizzabile sia su una carrozzina che per il posizionamento a letto.

Codice articolo	A	B	C
BODYJ1 BP	10 cm	55 cm	30 cm
BODYJ2 BP	18 cm	75 cm	50 cm

ACCESSORI Body Map

Sono disponibili diversi accessori come la **pompa elettrica** (utile per i dispositivi di maggiori dimensioni), **cover con inserto in memory foam** o **cover in cotone**, **fascette in velcro di posizionamento** o **sacche di materiale di riempimento** per modificare la consistenza e quindi il supporto dei dispositivi di maggiori dimensioni.



*La valvola di servizio, ove presente, consente il riempimento del cuscino con ulteriore materiale