

Jolly



PRODOTTO
IN ITALIA



**UNICO
AL MONDO**
CON SISTEMA
DI SICUREZZA
SENZA ABBANDONO
DELLA POSTAZIONE
DI GUIDA

TGR: il **made in Italy** che da oltre **40 anni** progetta, realizza e brevetta soluzioni per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Jolly è il prodotto di punta della gamma TGR, è un **montascale mobile a cingoli**, semplice e funzionale. Dotato di trazione elettrica, si contraddistingue per l'estrema versatilità, la compattezza, l'elevata manovrabilità e una lunga autonomia operativa.

Con un'ampia serie di **accessori ed agganci regolabili**, offre la possibilità di soddisfare le più svariate esigenze.

Queste le peculiarità che rendono **Jolly** idoneo al trasporto su scala di una **vastissima gamma di carrozzine**.

Grazie agli accorgimenti tecnici adottati è di **semplice utilizzo** e facilmente manovrabile dall'accompagnatore.

TGR, sempre attenta alle **esigenze del cliente**, mette a disposizione tutta la propria esperienza offrendo i seguenti servizi:

- **Sopralluogo dimostrativo senza impegno di acquisto** e relativa consulenza finalizzata ad una scelta consapevole dell'ausilio più adatto alle specifiche esigenze.
- **Educazione all'uso** presso il luogo di utilizzo.
- **Servizio di assistenza tecnica post-vendita** presso centri autorizzati T.G.R. presenti sul territorio nazionale.

PULSANTE SBLOCCO FRENO BREVETTATO*

Il montascale Jolly è l'**unico** al mondo **con sistema di sicurezza senza abbandono della posizione di guida** da parte dell'accompagnatore.


In caso di anomalia durante l'utilizzo sulla scala, grazie al pulsante di sblocco del freno è infatti possibile scendere a velocità ridotta e controllata fino al pianerottolo o fino al raggiungimento del punto di massima stabilità.

Questo dispositivo di sicurezza, posto comodamente sul manubrio è attivabile direttamente dall'accompagnatore senza necessità di allontanarsi dalla posizione di guida.



Massima sicurezza per accompagnatore e trasportato!

* Brevetto n. 256113

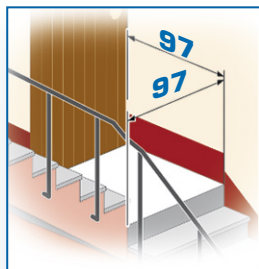


- Spazio minimo di manovra su pianerottolo 97x97 cm




STANDARD

Cod. D5000020

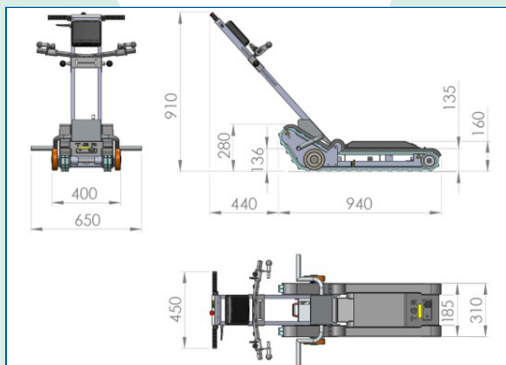

PESO 	
Jolly STANDARD	48
PORTATA* 	
Jolly STANDARD	130
*A richiesta versione rinforzata	150 - 170

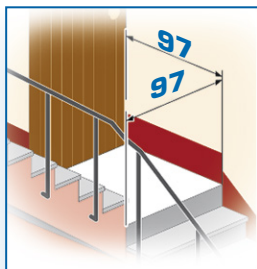

- Spazio minimo di manovra su pianerottolo 97x97 cm



JUNIOR 2

Cod. D7200020

PESO



Kg

Jolly JUNIOR 2

52


PORTATA




Kg

Jolly JUNIOR 2


130

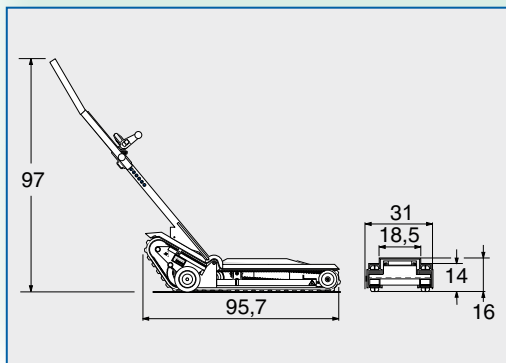

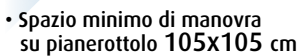

Cod. D6000020

[illegible]

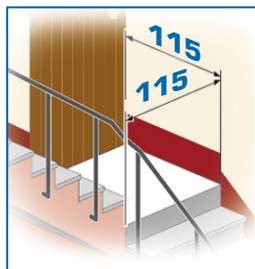

• Spazio minimo di manovra
su pianerottolo 115x115 cm

RAMP

Cod. D3000020



PESO



Jolly RAMP


70

PORTATA




Jolly RAMP

150

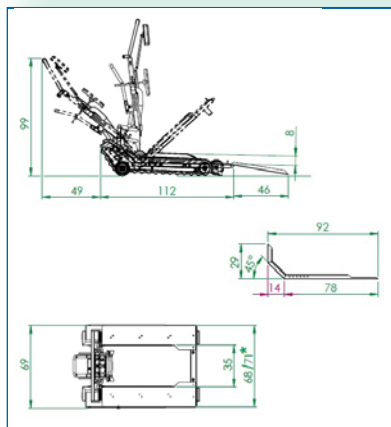


* Su richiesta

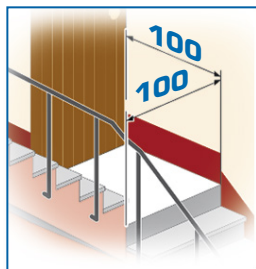

- Spazio minimo di manovra su pianerottolo 100x100 cm



PESO 	
Jolly 4R	48
PORTATA*	
Jolly 4R STD.	130
*A richiesta versione rinforzata	150

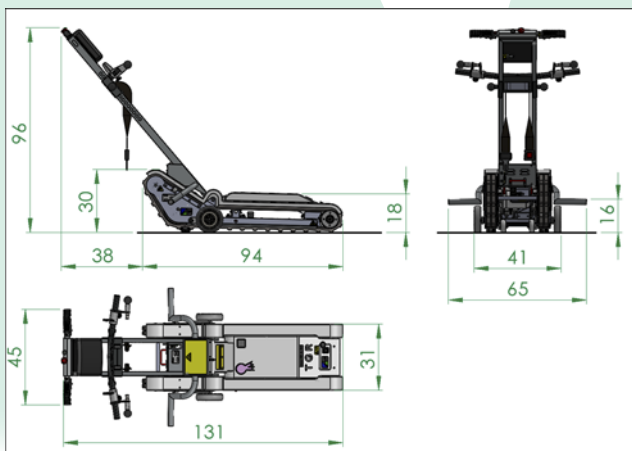

JOLLY 4R

Cod. D50000F0

ACCESSORI

Tutti gli accessori sono destinati esclusivamente all'applicazione sul modello JOLLY STANDARD.

PEDALIERA POSTERIORE

BREVETTATO*



L'UNICO OPTIONAL PENSATO PER FACILITARE CHI GUIDA

TGR, che da sempre è attenta alla sua clientela, ha pensato di dotare i montascale Jolly di una pedaliera posteriore che agevola l'accompagnatore nelle operazioni di carico e scarico della carrozzina.

Caricare la carrozzina è meno faticoso!

SU RICHIESTA


COPPIA DI PATTINI PER CARROZZINA RUOTE PICCOLE (DIAM. 300 MM)

BREVETTATO*

Cod. ND002



Cod. ND003A

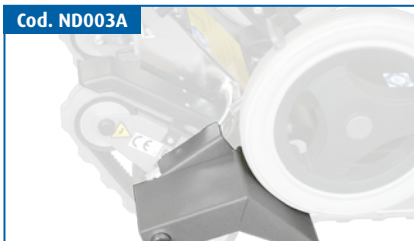

Indicati per il trasporto di carrozzine con ruote posteriori di piccolo diametro e/o ridotta distanza, ad esclusione delle carrozzine con ruote posteriori piroettanti. Consigliati per il trasporto di carrozzine con distanza tra le ruote posteriori compresa tra **34 e 63 cm** (per Cod. ND003A) e tra **41,5 e 62 cm** (per Cod. ND002).

KIT PER IL TRASPORTO DI CARROZZINE CON SCHIENALE BASCULANTE

BREVETTATO*

Cod. ND009



Adatto per il trasporto di alcuni modelli di carrozzine con schienale basculante.

L'asta blocca lo schienale, mentre i pattini e gli agganci sorreggono la carrozzina e la fissano al montascale.

* Brevetto n. 1299833

ACCESSORI

Tutti gli accessori sono destinati esclusivamente all'applicazione sul modello JOLLY STANDARD.

PATTINI

Serie di pattini da utilizzarsi in coppia per il trasporto di alcuni modelli di carrozzine elettroniche, di carrozzine prive di manici di spinta e in generale per tutte quelle tipologie di carrozzine che necessitano di essere sorrette dal basso (ad es. carrozzine dotate di manici telescopici).

I seguenti codici riguardano i pattini destinati al trasporto di carrozzine con distanza tra le ruote posteriori compresa tra le misure **A** e **B**.


La misura **A** indica la distanza minima interna delle ruote posteriori.

La misura **B** indica la distanza massima esterna delle ruote posteriori.

BREVETTATO*



CODICE	A (min)	B (max)
ND005	43 cm	63,5 cm
ND015	42 cm	66 cm
ND024	48 cm	71 cm
ND025	50 cm	73 cm

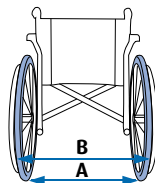

ACCESSORIO SUPPLEMENTO RAMP



Applicabili in diverse posizioni **solo sul modello Ramp**, consentono il corretto appoggio delle ruote posteriori delle carrozzine.



Supplemento
Barra Antiribaltamento Stabilizzatore*
solo per RAMP e MINIRAMP

* Brevetto n. 1299833


* Brevetto n. 102021000008039

ACCESSORI

Tutti gli accessori sono destinati esclusivamente all'applicazione sul modello JOLLY STANDARD.

AGGANCI CARROZZINA

Coppie di agganci per il trasporto di carrozzine con schienale di vari spessori.

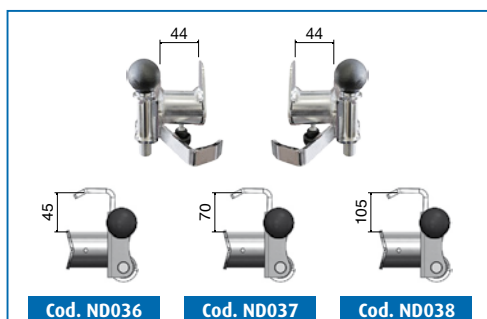

Misure espresse in millimetri



CARATTERISTICHE TECNICHE

Motore:	12V - 160W / 180W corrente continua.
Velocità:	5 metri al minuto.
Batteria:	Ricaricabile 12V 26Ah, sigillata al piombo, senza manutenzione.
Freno:	Elettromagnetico negativo 12V.
Trasmissione:	Cinghia dentata, riduttore con ingranaggi in acciaio Il freno è montato direttamente sul riduttore.
Caricabatteria:	Elettronico esterno.

IL MONTASCALE JOLLY È DOTATO DI:

- Agganci scorrevoli regolabili in altezza e larghezza per adattarsi alla maggior parte delle carrozzine (solo mod. Standard).
- Base strutturata per caricare anche carrozzine con crociere molto basse.
- Poggiatesta regolabile in altezza.
- Cintura di sicurezza regolabile.
- Interruttore a chiave per riservarne l'utilizzo solo al personale autorizzato.
- **Pulsante d'emergenza.**
- Dispositivo automatico di inserimento del freno.
- Comandi di salita/discesa posti sul manubrio di guida.
- Cingoli in gomma antisdrucchiolo ed antitraccia.
- 2 ruote di piccolo diametro, indispensabili per una facile manovrabilità sui piani orizzontali.
- **Caricabatteria esterno.**
- Led bicolore indicante il raggiungimento dello stato di carica della batteria.
- **Doppio dispositivo di sicurezza** che preclude sia l'avvio del montascale a dispositivo non inserito sia la possibilità di sgancio del timone a macchina in funzione.
- **Dispositivo di sicurezza brevettato***, che interviene in caso di anomalia bloccando automaticamente il mezzo.
- **Pulsante di sblocco del freno brevettato*** che, grazie al sistema di trasmissione a **potenza reversibile**, permette in caso di arresto involontario su scala di liberare il freno e scendere a velocità ridotta e controllata fino al pianerottolo o fino al raggiungimento del punto di massima stabilità senza dover abbandonare la posizione di guida.
- Strumento di segnalazione stato di carica della batteria.
- Indicatore del livello di pendenza della scala.
- **Autonomia di salita 50 piani con peso di 130 Kg.**
- Autonomia con indicatore di batteria in riserva: **3 piani.**
- **Inclinazione superabile fino a 35° pari al 70% di pendenza.**
- **24 mesi di garanzia.**

TGR si riserva, nell'evoluzione tecnica dei suoi prodotti, di modificare gli articoli illustrati. Le immagini ed i dati riportati potranno quindi subire variazioni. NB: Nell'uso seguire attentamente ed attenersi scrupolosamente alle prescrizioni, istruzioni ed avvertenze riportate sul libretto di uso e manutenzione.

* Brevetto n. 256113



TGR srl

Via Lombardia, 12 - 40064 Ozzano Emilia (Bologna) - Italy
Telefono: 051 6523511
www.tgr.it - email: tgr@tgr.it

T.G.R. GmbH

Löffelholzstraße 20, Haus 8 Ost
90441 Nürnberg - Germany
Tel. (+49) 0911 94184700 - Fax (+49) 0911 94184701
<http://www.tgr-deutschland.de>
e-mail info@tgr-deutschland.de