

Suprema



PRODOTTO
IN ITALIA



Suprema

SUPER • SLIDE • RELAX



La poltrona **SUPREMA**, dotata di **movimentazione verticale** in tutte le sue versioni, è stata progettata per restituire **libertà** e **autonomia** di movimento a chi desidera vivere pienamente la propria quotidianità a casa come sul posto di lavoro.

Pratica, silenziosa e confortevole, **SUPREMA** diventerà la vostra **indispensabile alleata** accompagnandovi in ogni momento della giornata.


Vi conquisterà con le sue **caratteristiche uniche**: linee essenziali, seduta ergonomica, dimensioni compatte, e capacità di **girare su se stessa** grazie alla base dotata di ruote piroettanti e ruote motrici sterzanti.

Scegliere la poltrona **SUPREMA** significa accedere **facilmente** e in **totale autonomia** a tutti gli ambienti interni, compresi spazi di ridotte dimensioni e servizi di uso comune.

Ti invitiamo a provarla, non vorrai più farne a meno!

ACCESSORI

cod. **NE001**

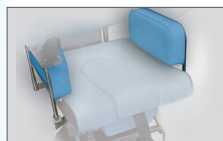

Fiancate laterali con cuscini rimovibili di spessore 5 cm

cod. **NE003** (destra)
cod. **NE004** (sinistra)
cod. **NE005** (Solo mod. Slide)



Appoggio laterale gambe

cod. **NE007**



Pedana poggipiedi in plastica.

cod. **NE008**



Appoggia gamba alzabile



mod. SUPER

Codice: E72000

Progettata per consentire la **movimentazione verticale** della seduta da un minimo di **43 cm** ad un massimo di **73 cm**.



mod. RELAX

Codice: E62000

Progettata per consentire non solo la **movimentazione verticale** della seduta da un minimo di **43 cm** ad un massimo di **65 cm** ma anche il **basculamento** della seduta fino ad un massimo di **12°**. Altezza massima basculata **84 cm**.



mod. SLIDE

Codice: E82000


Progettata per consentire non solo la **movimentazione verticale** della seduta da un minimo di **43 cm** ad un massimo di **73 cm** ma anche un'**escursione orizzontale** del sedile fino ad un massimo di **20 cm** in avanti.




DATI TECNICI

SUPREMA è stata progettata per l'**ESCLUSIVO UTILIZZO IN PIANO ED IN AMBIENTI INTERNI**.


Compatibilmente con le dimensioni riportate, è comunque possibile superare anche piccoli dislivelli.

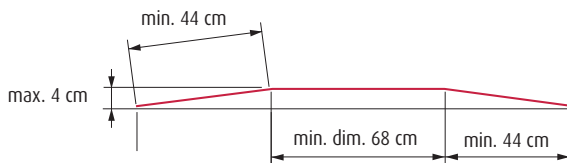

	 Portata max. Kg	Escursione verticale della seduta	Escursione orizzontale del sedile	Basculamento Seduta	Altezza max. basculata	Velocità KM/h
SUPREMA Super	53	120	Min. 43 - Max. 73 cm	-	-	max. 1,23
SUPREMA Slide	55	120	Min. 43 - Max. 73 cm	Min. 0 - Max. 20 cm	-	max. 1,23
SUPREMA Relax	55	120	Min. 43 - Max. 65 cm	-	Min. 0 - Max. 12°	84 cm

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Batteria ricaricabile 12V - 26 Ah, sigillata al piombo, senza manutenzione
- Indicatore dello stato di carica della batteria
- Movimentazioni tramite motori elettrici a 12V c.c.
- Caricabatteria esterno
- **Sistema automatico di selezione della batteria**
- Led indicante il raggiungimento della carica della batteria
- Joystick per impartire i comandi di marcia e graduare la velocità
- Pulsanti di selezione doppia velocità di marcia graduabile tramite Joystick
- Pulsanti movimentazione seduta del tipo "uomo presente" con azionamento ritardato del comando
- Azionamento verticale della seduta con partenza ed arresto graduale
- Autonomia media batteria 3,5 H con utilizzo in moto continuo
- **Spegnimento automatico** per soste oltre i **4 minuti**
- Pulsante spegnimento
- Sistema di sicurezza che disabilita la marcia al raggiungimento del punto di massima elevazione in sicurezza (circa 2/3 dell'escursione verticale possibile) (solo Mod. SUPER e SLIDE)
- Braccioli alzabili in tutte le versioni
- Poggiatesta regolabile
- Poltrona con imbottitura anatomica a densità differenziata e con rivestimento ignifugo
- **Servizio di assistenza tecnica post-vendita presso centri autorizzati T.G.R. presenti sul territorio**
- **Garanzia 24 mesi**

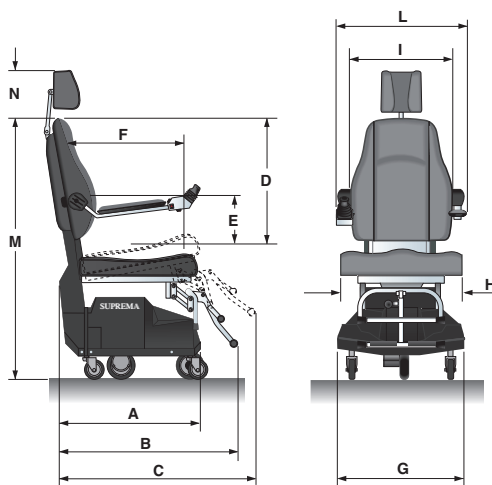

Dimensioni in cm.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
SUPREMA Super	62	72	-	56	19,5	47	45,5	42,5	42,5	58	98÷128	-
SUPREMA Slide	62	72	-	56	19,5	47	45,5	42,5	42,5	58	98÷128	-
SUPREMA Relax	62	72	81	56	19,5	47	45,5	42,5	42,5	58	98÷123	24÷29

TGR si riserva, nell'evoluzione tecnica dei suoi prodotti, di modificare gli articoli illustrati. Le immagini ed i dati riportati potranno quindi subire variazioni.
NB: Nell'uso seguire attentamente ed attenersi scrupolosamente alle prescrizioni, istruzioni ed avvertenze riportate sul libretto di istruzioni.