

Cinture

Sistemi per garantire un buon contenimento
e controllo posturale

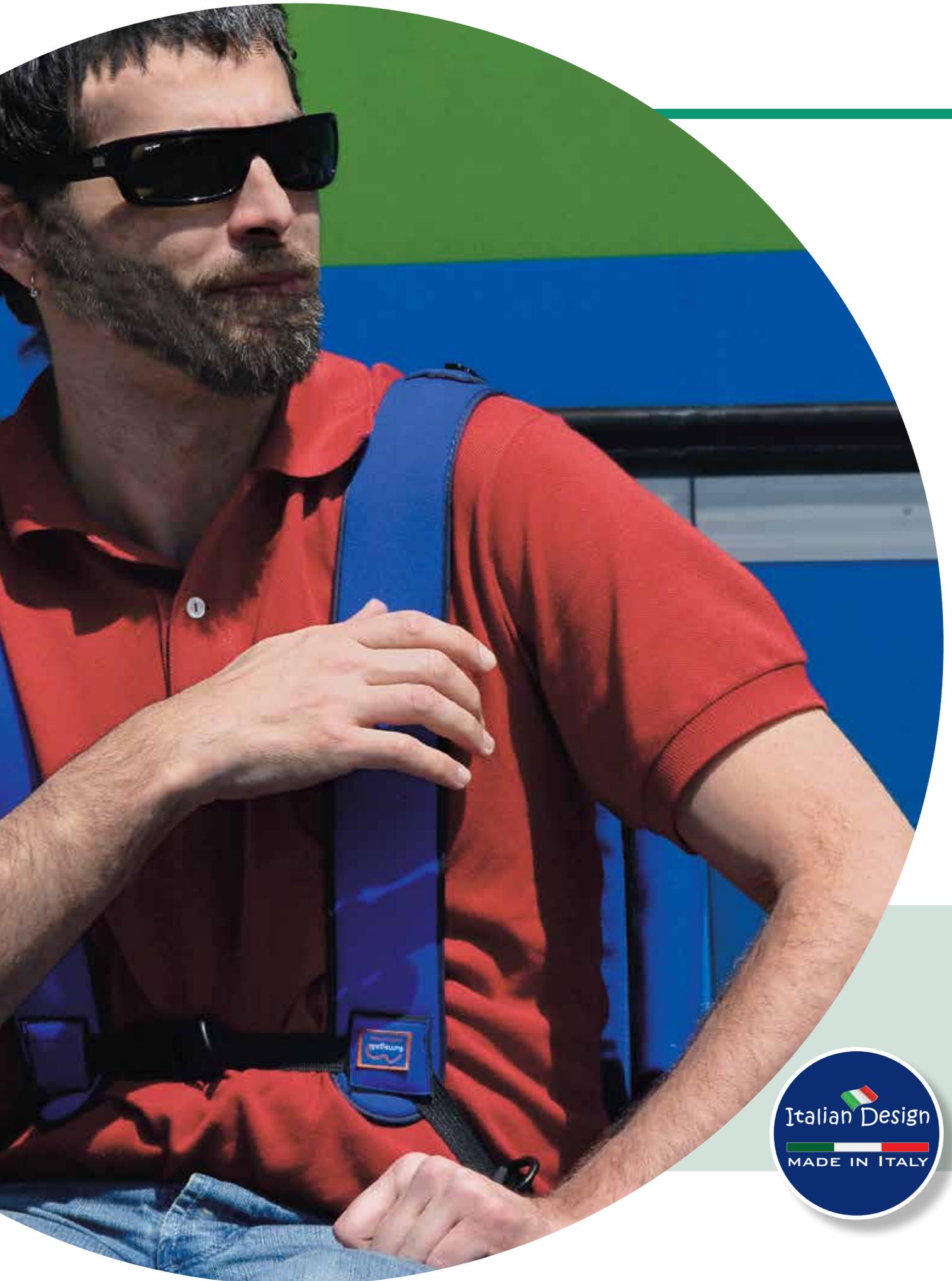

Cinture

per il contenimento ed il controllo posturale

Primo passo per posizionare una persona con difficoltà di controllo del tronco su una carrozzina o un'unità posturale è la gestione della basculazione, che consente di variare l'assetto complessivo spostando il baricentro dell'utente e mantenendo inalterato l'angolo tra seduta e schienale: in questo modo può essere evitato lo scivolamento in avanti del bacino, una complicazione che può causare lesioni da frizioni e forze di taglio.

Tuttavia, se anche il basculamento non è sufficiente si può ricorrere all'utilizzo di cinture che consentono il contenimento puntuale del bacino e del tronco, senza comprimere, e che lasciano il giusto grado di libertà all'utilizzatore a seconda delle sue esigenze e capacità.


Seguendo gli specifici bisogni degli utilizzatori sono state progettate diverse linee di cinture, ognuna caratterizzata dall'utilizzo di materiali differenti per la composizione dell'imbottitura e da pad con varie forme e modelli:

LINEA TECNICA: serie sportiva e grintosa, consente un controllo più sicuro grazie ai pad con imbottitura in espanso a cellula chiusa e agli inserti elastici che mantengono le cinture sempre a posto.

LINEA COMFORT: due cinture caratterizzate da pad con imbottitura molto confortevole, morbida e traspirante, destinate principalmente alle persone adulte.

LINEA FLEX: una serie completa di cinture morbide, molto confortevoli ma al contempo contenitive, realizzate in una speciale imbottitura elastica ottenuta unendo al neoprene altri materiali traspiranti.

Ogni cintura delle diverse linee è caratterizzata da alcuni accorgimenti che permettono di indossare ogni articolo con molta semplicità:

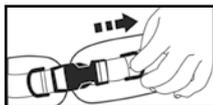

... il **REGOLATORE FACILITATO**, che consente una regolazione delle cinghie anche dopo che la cintura è stata indossata;



... lo **SGANCIO RAPIDO**, che permette di sganciare la cintura lasciando le cinghie fissate alla seduta, non modificandone la lunghezza.

Tutte le cinture vengono fornite con due sistemi di aggancio universali: un sistema non fisso, a fascia, adatto a tutti i tipi di sedute, e un sistema che permette di fissare la cintura al telaio della carrozzina quando si necessita di un aggancio più fermo.

Richiedi un preventivo al nostro Customer Care:

tel (+39) 031 33 56 811
ordini@fumagalli.org

Linea Tecnica

La linea dedicata alle persone più attive

È una serie che possiamo definire sportiva sia per l'immagine grintosa dei modelli sia per i materiali impiegati e per le speciali caratteristiche costruttive che permettono un controllo più accentuato dell'atteggiamento posturale.

I pad con imbottitura in cellula chiusa (morbidi ma sostenuti) e sapienti inserti elastici accrescono il comfort, danno una controllata libertà di movimento e mantengono "sempre a posto" le cinture.


All'interno, dal lato verso la persona, ogni pad è rivestito in un tessuto sanificato che garantisce le caratteristiche di igiene anche con un uso prolungato.

ALTEZZA CM	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190
PESO KG	9/14	11/17	14/20	17/23	21/28	25/35	30/45	37/55	45/65	54/75	63/85	70/95
PICCOLA	■	■	■	■	■							
MEDIA				■	■	■	■	■				
GRANDE							■	■	■	■	■	
EXTRA GRANDE									■	■	■	■


COME INDIVIDUARE LA TAGLIA

Indichiamo una tabella di riferimento generica che vi permetterà di individuare la taglia più corretta sulla base del peso e dell'altezza dell'utilizzatore. Nel caso in cui i parametri rilevati si discostassero molto da questi valori e da quelli indicati nelle tabelle successive, consigliamo di scegliere in base alla vostra esperienza, tenendo sempre presente il fatto che le parti imbottite devono essere adeguate alle forme della persona e coprire le sue asperità ossee, mentre la lunghezza delle cinghie è ampiamente e facilmente modificabile.

ATTENZIONE: nessuna delle cinture Fumagalli può sostituire la cintura di sicurezza per l'automobile. Le cinture possono essere usate per controllare ed aiutare la posizione seduta anche sul sedile dell'automobile, ma devono essere integrate da quelle di sicurezza.

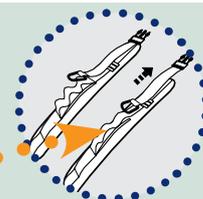

Gli inserti elastici all'altezza delle spalle assicurano una libertà di movimento più controllata e mantengono la cintura sempre nella corretta posizione.

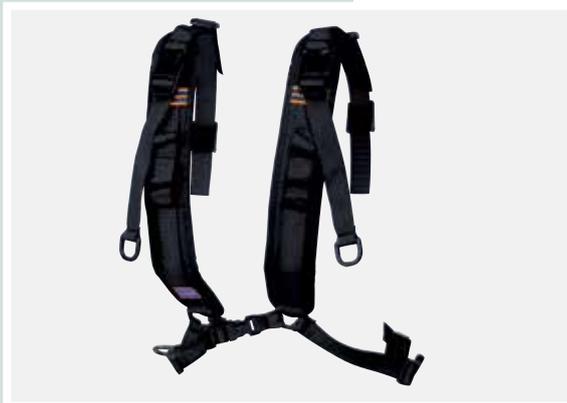

BRETELLE CON CINTURA A 45°

Bretelle con inserto elastico a livello delle spalle che permette di eseguire dei movimenti controllati ed offre un sostegno sicuro. Sono adatte a persone attive, che necessitano di una maggiore libertà nei movimenti associata sempre ad un adeguato controllo.

Codici

413001/2 - Bretella con cintura a 45°

DESCRIZIONE	CODICE	TAGLIA	DIMENSIONE PAD
BRETELLE CON CINTURA A 45°	413001	extra piccola	cm 25x4,5
	413002	piccola	cm 35x4,5



CINTURA PELVICA A 45°

A 2 e 4 punti

Cinture a 2 o 4 punti di aggancio al telaio della carrozzina, con pad imbottiti in un poliuretano espanso a cellula chiusa.

La versione a 4 punti permette di distribuire meglio la tensione e di mantenere un posizionamento corretto della cintura anche nel tempo.

Codici

413301/2/3 - Cintura pelvica a 45° - 2 punti di aggancio

413601/2/3 - Cintura pelvica a 45° - 4 punti di aggancio

	CODICE	TAGLIA	DIMENSIONE PAD
CINTURA PELVICA A 45° A DUE PUNTI	413301	piccola	cm 12x4,2
	413302	media	cm 16x4,2
	413303	grande	cm 21x6,5
CINTURA PELVICA A 45° A QUATTRO PUNTI	413601	piccola	cm 12x4,2
	413602	media	cm 16x4,2
	413603	grande	cm 21x6,5

Linea Flex

Flessibilità e comfort

Appartengono a questa linea diversi modelli e taglie di cinture che hanno come caratteristica essenziale la flessibilità unita alla tenuta ed al comfort. Accostamenti di tessuti diversi hanno infatti permesso di ottenere un risultato veramente speciale: una elasticità misurata che consente piccoli movimenti ed aggiustamenti posturali, sempre controllati.


Il neoprene, flessibile, è associato a tessuti che ne controllano l'elasticità permettendo il movimento soltanto nelle direzioni volute. Verso l'utilizzatore c'è un materiale con anima in espanso a cellule aperte, permeabile all'aria, per disperdere la naturale umidità corporea e favorire un'eccellente traspirazione; infine, questo strato è rivestito in un tessuto sanificato, per mantenere nel tempo le caratteristiche di igiene.

ALTEZZA CM	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190
PESO KG	9/14	11/17	14/20	17/23	21/28	25/35	30/45	37/55	45/65	54/75	63/85	70/95
PICCOLA												
MEDIA												
GRANDE												
EXTRA GRANDE												

COME INDIVIDUARE LA TAGLIA

Indichiamo una tabella di riferimento generica che vi permetterà di individuare la taglia più corretta sulla base del peso e dell'altezza dell'utilizzatore. Nel caso in cui i parametri rilevati si discostassero molto da questi valori e da quelli indicati nelle tabelle successive, consigliamo di scegliere in base alla vostra esperienza, tenendo sempre presente il fatto che le parti imbottite devono essere adeguate alle forme della persona e coprire le sue asperità ossee, mentre la lunghezza delle cinghie è ampiamente e facilmente modificabile.

ATTENZIONE: nessuna delle cinture Fumagalli può sostituire la cintura di sicurezza per l'automobile. Le cinture possono essere usate per controllare ed aiutare la posizione seduta anche sul sedile dell'automobile, ma devono essere integrate da quelle di sicurezza.

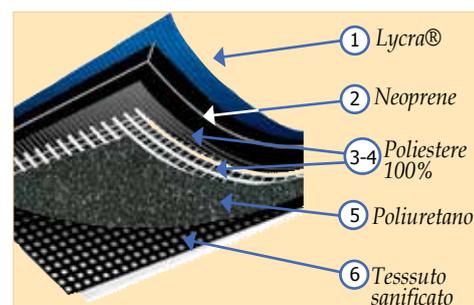

La superficie in Lycra® bielastica NERA (1) è facilmente lavabile e protegge lo strato più interno in Neoprene (2), un espanso a cellula chiusa di 3 mm di spessore ed estremamente elastico.

Seguono due strati in tessuto poliestere 100% (3-4), per garantire la tenuta in verticale e in orizzontale. Infine, lo strato di 2 mm di poliuretano a cellula aperta (5) permette il passaggio dell'aria e favorisce la traspirazione, mentre l'ultimo a contatto con l'utilizzatore, è in uno speciale tessuto sanificato antibatterico (6).

Attenzione: foto d'archivio, le nostre cinture Linea Flex sono ora disponibili solo in colore NERO.



BRETELLE CON CINTURA A 45°

Modello che fascia le spalle e si adatta perfettamente alle forme dell'utilizzatore senza comprimere nessuna parte del torace. La particolare composizione elastica dell'imbottitura, inoltre, permette di effettuare delle minime inclinazioni in avanti mantenendo l'adeguato controllo del tronco.

Disponibile in diverse misure per soddisfare le necessità di bambini e adulti.

Codici

414001N/2N/3N - Bretella con cintura a 45°

DESCRIZIONE	CODICE	TAGLIA	DIMENSIONE PAD
BRETELLE CON CINTURA A 45°	414001N	piccola	cm 26x6
	414002N	media	cm 35x6
	414003N	grande	cm 45x6



PETTORINA CON BRETELLE

Pettorina pensata per soddisfare le esigenze di tutti gli utilizzatori, dalle dimensioni più piccole alle più grandi. Il sostegno offerto dall'imbottitura segue perfettamente il corpo, senza comprimere il torace e senza rischiare di causare irritazioni o infiammazioni ed assicura una buona traspirazione delle parti coperte. Questo modello realizzato con l'imbottitura elastica, inoltre, consente di effettuare dei movimenti limitati, come ad esempio l'inclinazione in avanti del tronco, riportando poi il corpo nella giusta posizione.

Il modello è disponibile solo nella versione chiusa per mantenere le caratteristiche di elasticità dei pad.

Codici

414101N/2N/3N - Pettorina con bretelle

DESCRIZIONE	CODICE	TAGLIA	DIMENSIONE PAD
PETTORINA CON BRETELLE	414101N	piccola	cm 42x28
	414102N	media	cm 52x34
	414103N	grande	cm 62x42



PETTORINA A FARFALLA

Una pettorina dal design speciale, che si adatta perfettamente alle forme femminili senza comprimerle, che non crea irritazioni lungo i bordi grazie anche all'imbottitura molto morbida.

Questa pettorina risulta idonea anche per gli utilizzatori più sportivi, che necessitano di un controllo elastico e di maggiore libertà durante i movimenti.

Codici

414201N/2N/3N - Pettorina a farfalla

	CODICE	TAGLIA	DIMENSIONE PAD
PETTORINA A FARFALLA	414201N	piccola	cm 28x22
	414202N	media	cm 40x29
	414203N	grande	cm 50x32



DIVARICATORE ANATOMICO A PRESA PELVICA

Permette di stabilizzare meglio il bacino fasciando le cosce in modo morbido, senza comprimerle, e facilita l'intervento su eventuali asimmetrie.

L'imbottitura morbida e flessibile, infatti, contiene in modo confortevole la persona evitando gli scivolamenti ma consente un minimo spostamento degli arti.

Codici

414301N/2N/3N - Divaricatore a presa pelvica

	CODICE	TAGLIA	PESO DELLA PERSONA
DIVARICATORE ANATOMICO A PRESA PELVICA	414301N	piccola	kg 15-35
	414302N	media	kg 35-60
	414303N	grande	kg 60-90



CINTURA PELVICA A 45° A 2 e 4 punti

Cintura a 2 o 4 punti di aggancio al telaio della carrozzina e pad imbottiti che garantiscono una tenuta sicura ed elastica, lasciando una limitata possibilità di movimento all'utilizzatore senza costringerlo.

La versione a 4 punti di aggancio garantisce una maggiore sicurezza per quelle persone che più facilmente tendono a scivolare in avanti con il bacino, mentre l'imbottitura elastica garantisce sempre un contenimento confortevole e non opprimente.

Codici

414401N/2N/3N - Cintura pelvica a 45° - 2 punti di aggancio

414501N/2N/3N - Cintura pelvica a 45° - 4 punti di aggancio

	CODICE	TAGLIA	DIMENSIONE PAD
CINTURA PELVICA A 45° A 2 PUNTI	414401N	piccola	cm 12x6
	414402N	media	cm 16x6
	414403N	grande	cm 21x6
CINTURA PELVICA A 45° A 4 PUNTI	414501N	piccola	cm 12x6
	414502N	media	cm 16x6
	414503N	grande	cm 21x6

Linea Comfort

Le cinture universali

Espressamente progettata per offrire grande comfort assieme ad una altrettanto grande praticità di utilizzo e di manutenzione, è la linea di cinture specifica per persone adulte che privilegiano la comodità, pur mantenendo l'attenzione ad un aspetto decoroso e gradevole.

Realizzate in microfibra, un materiale traspirante e morbido dalla piacevole texture e facile da sanificare, ha una soffice imbottitura in espanso a cellula aperta per lasciar respirare liberamente le parti del corpo a contatto, e la parte rivolta verso la persona è in tessuto sanificato che assicura il mantenimento nel tempo delle importanti caratteristiche di igiene.

PESO KG	9/14	11/17	14/20	17/23	21/28	25/35	30/45	37/55	45/65	54/75	63/85	70/95
ALTEZZA CM	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190
406001 PICCOLA												
406002 MEDIA												
406003 GRANDE												

COME INDIVIDUARE LA TAGLIA

Indichiamo una tabella di riferimento per il divaricatore 406001/2/3 che vi permetterà di individuare la taglia più corretta sulla base del peso e dell'altezza dell'utilizzatore. Nel caso in cui i parametri rilevati si discostassero molto da questi valori e da quelli indicati nella tabella successiva, consigliamo di scegliere in base alla vostra esperienza, tenendo sempre presente il fatto che le parti imbottite devono essere adeguate alle forme della persona e coprire le sue asperità ossee, mentre la lunghezza delle cinghie è ampiamente e facilmente modificabile.

ATTENZIONE:

nessuna delle cinture Fumagalli può sostituire la cintura di sicurezza per l'automobile. Le cinture possono essere usate per controllare ed aiutare la posizione seduta anche sul sedile dell'automobile, ma devono essere integrate da quelle di sicurezza.



Per tutte le età, in qualsiasi ambiente!



CINTURA POLIVALENTE PER TRONCO

Una cintura speciale, adatta alle persone che necessitano un controllo sicuro e deciso solo a livello del torace. Dona grande sensazione di contenimento ed insieme libertà nei movimenti, senza risultare opprimente.

Codici

404602/3 - Cintura polivalente


A seconda delle specifiche necessità, la cintura polivalente è utilizzabile in due modi:



con incrocio posteriore
per maggiore libertà laterale



con incrocio anteriore
per un maggior
contenimento laterale

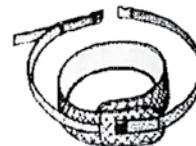

	CODICE	TAGLIA	PESO DELLA PERSONA
CINTURA POLIVALENTE PER TRONCO	404602	media	da kg 35 a kg 60
	404603	grande	da kg 60 a kg 90



DIVARICATORE ANATOMICO A PRESA PELVICA

Cintura a presa pelvica che permette di mantenere una posizione seduta corretta e previene lo scivolamento, ha regolazione indipendente facilitata dei lembi di divaricazione per intervenire su eventuali asimmetrie.

L'imbottitura è confortevole e molto traspirante, apprezzata anche dagli utilizzatori di taglia molto robusta.

Codici

406001/2/3 - Divaricatore a presa pelvica

	CODICE	TAGLIA	PESO DELLA PERSONA
DIVARICATORE ANATOMICO A PRESA PELVICA INTERO	406001	piccola	da kg 15 a kg 35
	406002	media	da kg 35 a kg 60
	406003	grande	da kg 60 a kg 90



Fumagalli Care&Reha srl
Piazza Puecher 2 - 22037 Ponte Lambro
tel (+39) 031 33 56 811
info@fumagalli.org - www.fumagalli.org