

J3 CARBON

FEEL THE DIFFERENCE

E' COSÌ LEGGERO...

Il carbonio è leggero e resistente ed è quindi il materiale ideale per questo schienale. Resistente come l'alluminio (ma più leggero del 60 %), lo Schienale J3 Carbon riduce il peso che un utente in carrozzina deve spingere, giorno dopo giorno.

Sentirete la differenza!



... ED ELEGANTE

Lo Schienale J3 Carbon vi colpirà con il suo stile davvero unico. Un design attivo e pulito unito ad un aspetto elegante: la scena è vostra!



IL SUPPORTO DI CUI AVETE BISOGNO PER UNA VITA ATTIVA

Lo Schienale J3 Carbon fornisce grande stabilità e comfort. Il corretto supporto pelvico stabilizza la parte superiore del tronco e favorisce la curva ottimale della colonna vertebrale. In questo modo migliora la stabilità di cui avete bisogno per condurre una vita molto attiva, si riducono i dolori alla schiena ed aumenta il comfort.

In più, la forza generata durante la spinta della carrozzina viene trasferita in modo più efficace ed efficiente al telaio attraverso lo schienale rigido. In questo modo potrete generare una spinta maggiore con uno sforzo minore.

Fate una prova!



Per tutti i tipi di carrozzina

Sia che utilizziate un telaio rigido sia che utilizziate un telaio pieghevole, J3 Carbon è il vostro schienale. La versione fissa o quella ad estrazione rapida si adattano a tutti i tipi di carrozzina.

→ Veloce e facile da rimuovere


Con il meccanismo di sgancio ad estrazione rapida opzionale lo schienale J3 Carbon è veloce e facile da rimuovere: ideale per le carrozzine pieghevoli.



Dove sono le mie chiavi?

Ora, con la nuova tasca per accessori, avrete finalmente un posto dove mettere quelle cose che non si trovano mai. E non ha solo questa funzione: infatti coprirà in modo discreto anche lo spazio tra la schiena e il cuscino. Vi domanderete come avete potuto farne a meno fino ad ora!

La tasca per accessori
utile ed elegante

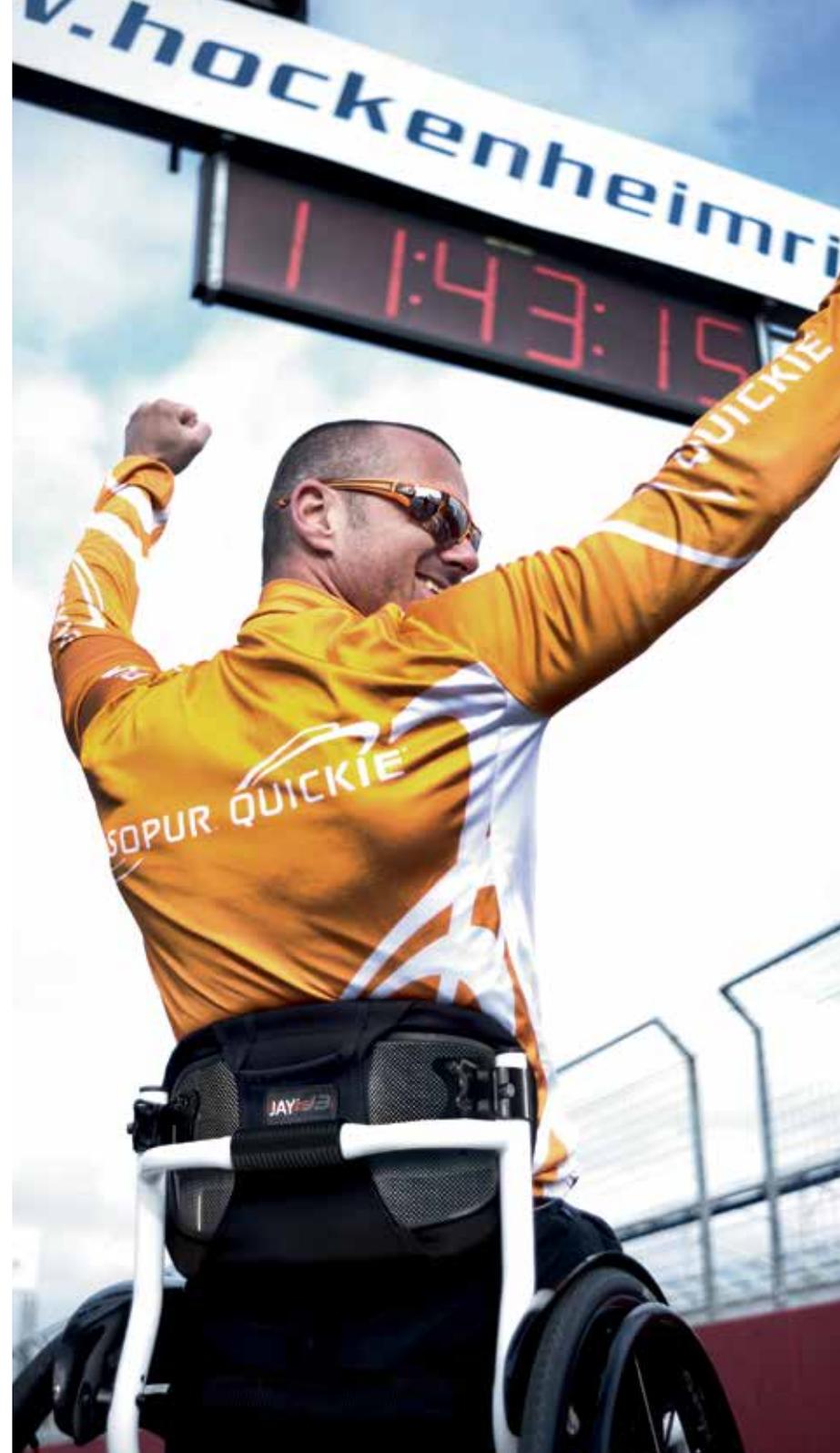

REGOLABILE IN BASE AI VOSTRI BISOGNI

Due differenti sistemi di montaggio per carrozzine pieghevoli e rigide

Lo Schienale J3 Carbon è disponibile con due differenti sistemi di montaggio.

L'attacco fisso offre agli utenti di carrozzine rigide la possibilità di ottimizzare al massimo il peso. In alternativa, l'attacco ad estrazione rapida consente di rimuovere facilmente lo schienale, perfetto per carrozzine pieghevoli. Indipendentemente dalla scelta, entrambi i sistemi sono stati disegnati per essere gestiti con facilità, con 2 punti di montaggio ed offrono le stese regolazioni in angolazione, profondità, altezza e larghezza per aiutarvi ad adattare lo Schienale J3 Carbon ai vostri bisogni.



Sistema di montaggio ad estrazione rapida
ideale per carrozzine pieghevoli



Sistema di montaggio fisso
la soluzione più leggera per carrozzine rigide





→ **Sagomatura attiva**

Supporto laterale moderato del tronco per merito della sagomatura di 5 cm



→ **Differenti livelli di supporto**

Sempre il giusto supporto (quattro altezze da 17 a 38 cm)

Scegliete il vostro schienale...!

Bisogni differenti richiedono soluzioni adeguate.

Le quattro altezze disponibili (da 17 a 38 cm) sono dedicate ad utenti attivi con un bisogno di supporto per il tronco da basso a moderato. Un moderato supporto laterale per il tronco è dato anche dalla sagomatura di 5 cm in profondità.



Look cool and stay cool con la fodera microclimatica e lo strato in soffice schiuma

La fodera dello Schienale J3 Carbon utilizza il tessuto traspirante 3DX™ che consente di disperdere calore e umidità e migliora il passaggio dell'aria attraverso lo schienale. Lavabile in lavatrice a 60°C asciuga velocemente e copre tutto il guscio per darvi una protezione ancora maggiore. Potrete perfino adattare la forma della fodera ai vostri bisogni personali con le imbottiture per il supporto lombare.

→ **Fodera J3 Carbon**

La tecnologia 3DX™ offre una confortevole sensazione microclimatica.



DATI TECNICI

Portata massima utente	125 kg
Larghezza	32, 36, 41, 46 cm
Altezza	17, 24, 30, 38 cm
Profondità sagomatura	5 cm
Angolo	± 20°
Peso	Da 690 g
Attacchi	Versione fissa e versione ad esrazione rapida
Accessori	Tasca per accessori e supporti lombari

Per maggiori informazioni su specifiche tecniche, opzioni ed accessori fare riferimento alla scheda d'ordine.
Tutte le informazioni possono essere soggette a modifiche senza notifica. Contattare Sunrise Medical per ogni dubbio.
Per gli utenti ipovedenti questo documento può essere visualizzato in formato PDF sul sito www.SunriseMedical.it.



Sunrise Medical S.r.l.

Via Riva, 20 - Montale

29122 Piacenza

Tel.: +39 0523 573111

Fax: +39 0523 570060

E-Mail: info@sunrisemedical.it

www.SunriseMedical.it

