



JAY LITE

FEEL THE LITE



LEGGERRISSIMO...

Complemento perfetto per una carrozzina superleggera, il JAY LITE è il cuscino più leggero della sua classe. Con un'ottima resa in termini di protezione della cute, stabilità e comfort, ma con un peso di soli 660 grammi, il JAY LITE è il cuscino ideale per utenti attivi.



... ED ECCEZIONALMENTE TRASPIRANTE

Una vita attiva provoca aumento di calore. Per questa ragione il cuscino JAY LITE utilizza materiali molto traspiranti per facilitare il passaggio dell'aria anche mentre l'utente è seduto in carrozzina. Ad esempio, la fodera microclimatica 3DX™ e la base Olotex traspirante in schiuma ventilata disperdono calore ed umidità in modo straordinario.

Stay cool and look "cool"!





IDEATO PER LA VITA ATTIVA

Il Cuscino JAY LITE offre protezione per la cute, stabilità e comfort. Per ridurre al minimo il rischio di piaghe da decubito, l'avvallamento pelvico Optiwell (PLA), disegnato secondo i principi antropometrici, riduce con efficacia la pressione sulle tuberosità ischiatiche senza sovraccaricare i trocanteri. Il suo inserto in schiuma reticolata leggerissima aiuta a distribuire il carico con un minimo di peso. Inoltre, la base in schiuma sagomata vi offre il supporto di cui avete bisogno per mantenervi attivi!

Avvallamento pelvico (PLA)


redistribuisce il peso per ridurre il rischio di piaghe da decubito

Intaglio posteriore

protegge l'area sacrale

Intagli per tuberosità ischiatiche

riducono la pressione sotto le tuberosità ischiatiche per proteggere la pelle

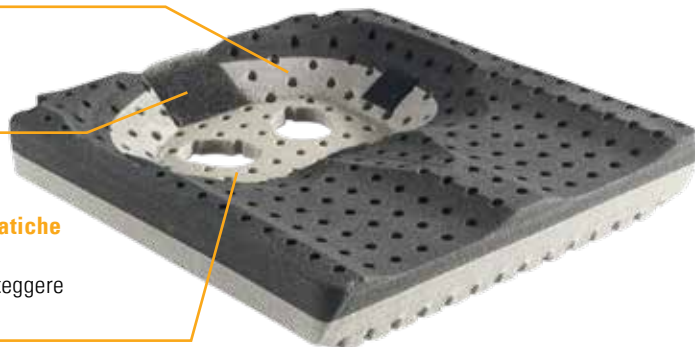


Inserto in schiuma reticolata

traspirante, lavabile e intercambiabile

Base in schiuma sagomata

aumenta la stabilità e il supporto per le gambe

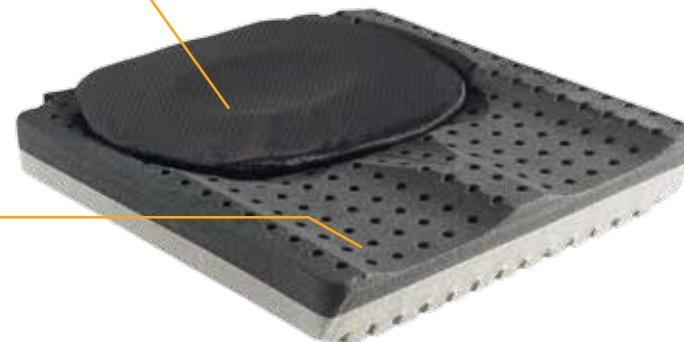



// 1 CUSCINO CON LA POSSIBILITÀ DI SCEGLIERE TRA 2 DIFFERENTI SAGOMATURE PER LA BASE.

Il cuscino JAY LITE offre due differenti versioni per la base. La base standard è ideale per la maggior parte degli utenti che hanno bisogno di comfort e redistribuzione della pressione. La sua sagomatura low-profile consente inoltre facili trasferimenti. In alternativa, per coloro che hanno bisogno di una maggiore stabilità posturale, la versione JAY LITE P offre un sostegno laterale e centrale per le gambe che migliora notevolmente la stabilità generale dell'utente.

**→ JAY LITE
con sagomatura
low profile**

Offre un supporto moderato per le gambe e facilita i trasferimenti.



**→ JAY LITE P
con sagomatura per
posizionamento**

Un maggiore sostegno laterale e centrale per le gambe consente un migliore posizionamento ed una migliore stabilità generale.



UN DESIGN FUNZIONALE BEN CONGEGNATO.

Il design del cuscino JAY LITE riflette i bisogni e lo stile di vita di un utente attivo. La parte anteriore smussata previene lo sfregamento contro la parte posteriore delle gambe, eliminando la necessità di utilizzare un cuscino di profondità minore. I bordi ritagliati nella parte inferiore del cuscino mantengono il cuscino in piano sui teli seduta e riducono la distanza tra la seduta e il terreno. La maniglia offre una facile presa e gli intagli per i tubi dello schienale bloccano il cuscino nella posizione corretta.



Fondo in gomma grigia
antiscivolo



Bordi tagliati
per evitare che la base si curvi



Parte anteriore smussata
previene lo sfregamento
contro la parte posteriore
delle gambe.

Maniglia
per una facile presa

Scegliete l'inserto per il vostro cuscino.

Il Cuscino JAY LITE offre due differenti inserti per la zona dell'avvallamento pelvico. L'inserto in schiuma reticolata utilizza una fodera traspirante e consente un eccezionale passaggio di aria. L'intero inserto è lavabile in lavatrice. L'inserto in schiuma poliuretanicca opzionale è fornito con fodera per incontinenza impermeabile ed è facile da pulire.

→ **Inserto in schiuma reticolata**
con fodera traspirante. Ventilazione eccezionale, lavabile in lavatrice.



→ **Inserto in schiuma poliuretanicca (optional)**
con fodera per incontinenza. La fodera dell'inserto è impermeabile e facile da pulire.



DATI TECNICI

Larghezza cuscino:	35 cm – 50 cm
Profondità cuscino:	35 cm – 50 cm
Altezza cuscino:	8 cm
Portata massima:	150 kg
Peso cuscino:	660 g - 1090 g
Inserito:	Inserito in schiuma reticolata con fodera traspirante (standard) e inserto in schiuma poliuretanicca con fodera per incontinenza (optional)
Fodera esterna:	Fodera microclimatica
Versioni base:	Versione standard e versione per il posizionamento (con base sagomata per un migliore posizionamento delle gambe)



Per maggiori informazioni su specifiche tecniche, opzioni ed accessori fare riferimento alla scheda d'ordine. Tutte le informazioni possono essere soggette a modifiche senza notifica. Contattare Sunrise Medical per ogni dubbio. Per gli utenti ipovedenti questo documento può essere visualizzato in formato PDF sul sito www.SunriseMedical.it.



Sunrise Medical S.r.l.

Via Riva, 20 - Montale
29122 Piacenza - Italia
Tel.: +39 0523 573111
Fax: +39 0523 570060
E-mail: info@sunrisemedical.it
www.SunriseMedical.it