

**Multistander** by JENX

**medimec**<sup>®</sup>



# Multistander by JENX

**Uno standing unico e versatile** disponibile in due dimensioni che offre un posizionamento 3 in 1 (prono, supino o eretto) per bambini con diverse esigenze da 9 mesi a 13 anni.

- Le molteplici possibilità di regolazione dell'altezza e della larghezza ed la portata massima di 60 kg prevista per la misura, rendono il Multistander la scelta perfetta per far crescere i bambini rispondendo alle diverse esigenze.
- La semplice e agevole regolazione dell'angolo di inclinazione permette al Multistander di passare dalla posizione orizzontale alla verticale, facilitando i trasferimenti.
- La vasta gamma di opzioni di supporto per la testa, il tronco, le gambe e i piedi, consentono la massima personalizzazione all'utente.
- La struttura volutamente aperta consente di posizionare l'utente con facilità e di intuire visivamente la corretta postura.
- L'eccezionale capacità di supporto pelvico e toracico, abbinata alle diverse possibilità di regolazione dei supporti per le gambe, rendono Multistander una scelta eccellente per la maggior parte dei bambini.

**Se avete bisogno di flessibilità Multistander è il prodotto giusto!**

# Multistander by JENX

**SUPPORTO PELVICO E TORACICO** con cinghie che si fissano al centro e si regolano indipendentemente ad entrambi su entrambi i lati consentendo di fare passaggi intermedi di posizionamento pria di ottenere quello definitivamente corretto. I supporti possono facilmente essere rimossi per agevolare i trasferimenti (posizione supina). I sistemi di fissaggio delle cinghie sono studiati per assicurare la massima sicurezza. Una volta regolati correttamente è molto difficile che fratelli o compagni di classe possano manometterli.

**TAVOLINO PRONO/SUPINO** innovativo e multiuso. Regolabile in altezza, inclinazione e profondità. Gli inserti interni di cui sono dotati i tavolini impediscono che le braccia rimangano bloccate quando il bambino si trova in posizione supina. Il tavolino è facilmente removibile per assicurare il massimo confort nella posizione prona. Può essere dotato di supporti per i gomiti (accessorio), mentre il bordo del piano di appoggio ha un profilo rialzato che aiuta a fornire una barriera visiva per i bambini, ma che può essere anche un utile punto di ancoraggio per attaccare giocattoli o altri strumenti sensoriali.

[medimec.it](http://medimec.it)



Molteplici **POGGIATESTA** per soddisfare le molteplici esigenze. Un supporto delicato offerto dal poggiatesta in PU oppure un supporto più sostenuto con il poggiatesta Multigrip™

Questo accessorio può essere utilizzato come **IMBOTTITURA DI PROTEZIONE** nella zona lombare oppure, nel Multistander mis. 2, come **PROTRATTORE** per le spalle nella posizione supina.

**TELAIO BIANCO** che fornisce un look moderno e fresco contribuendo ad individuare più facilmente lo sporco in modo da pulire il dispositivo prima che diventi pericoloso.

**BASE MANUALE** meccanica e resistente

**POGGIAPIEDI REGOLABILE IN ANGOLAZIONE** di serie su tutti i Multistander, facilita il posizionamento del dorso del piede o la flessione della pianta.

**INCLINAZIONE REGOLABILE** facilmente tramite il calibro angolare sul telaio anche con il bambino in piedi sul telaio. Il Multistander può essere posizionato completamente in orizzontale per facilitare i trasferimenti quando ci si trova in posizione supina. L'inclinazione è regolabile manualmente tramite un supporto con pistone a gas

# Multistander 1 – NUOVO ACCESSORIO ABDUZIONE

by JENX

REGOLAZIONE INDIVIDUALE DELLA  
GAMBE DA 0 A 30 GRADI DI ABDUZIONE



Su **MULTISTANDER 1** offre la possibilità di installare il sistema di abduzione individuale delle gambe di 0-30 gradi (con step di 5°). Questo accessorio può essere installato al momento dell'ordine permettendo una personalizzazione dell'ausilio in partenza, oppure può essere richiesto come accessorio per i **MULTISTANDER 1** con data di produzione a partire dal 2015. Questo accessorio ora rende **MULTISTANDER 1** un dispositivo che permette ai bambini di stare in piedi alla stessa altezza degli altri bambini sia in posizione neutra che abdotta.



**COMPATIBILITA'** L'accessorio per l'abduzione può essere installato su tutti i **MULTISTANDER 1** prodotti dopo LUGLIO 2015. Sulle pedane di questo accessorio è inoltre possibile installare sia i sandali mis. 1 e 2 e i fermaginocchia mis. 1 e 2 senza dover apportare modifiche..

**ALTEZZA UTILIZZATORE** E' stata prestata particolare attenzione nella progettazione di questo accessorio affinché garantisca che il bambino possa stare in piedi il più vicino possibile a terra in modo da stare alla stessa altezza degli altri bambini

**REGOLAZIONI SENZA ATTREZZI** Il meccanismo consente semplici regolazioni dell'angolazione della posizione della gamba dell'utente con il minimo sforzo.

**ABDUZIONE DELLE GAMBE** 0-30° possono essere regolati in ciascuna gamba in fasi incrementali da 5°. Il meccanismo di bloccaggio semplice ma robusto consente di posizionare le gambe nell'angolazione desiderata.

# Multistander by JENX



Il **POGGIATESTA MULTIGRIP™** ha un design unico e pionieristico, sviluppato per imitare il supporto accurato di mani premurose. La stessa tecnologia viene utilizzata anche per fornire supporto alle spalle o alla zona lombare (nella misura 2)

L' **ANGOLAZIONE DEL PIANO DI APPOGGIO** può essere regolata da orizzontale a verticale in base alle esigenze individuali del bambino.

Le **TAVOLE DI SUPPORTO** hanno uno speciale agente antimicrobico ed una superficie veloce e facile da pulire, soprattutto nei casi in cui il Multistander venga utilizzato da diversi utenti.

# Multistander by JENX ... sempre incoraggiante!

Stare in piedi è un ottimo modo per migliorare la prospettiva di tuo figlio sul mondo e il suo sviluppo fisico

Migliora la circolazione sanguigna e la pressione




Aiuta la digestione, l'intestino e lo svuotamento della vescica



Incoraggia lo sviluppo muscolare e delle ossa



I bambini traggono enormi vantaggi psicologici dalla posizione eretta e importanti benefici fisici e di sviluppo.

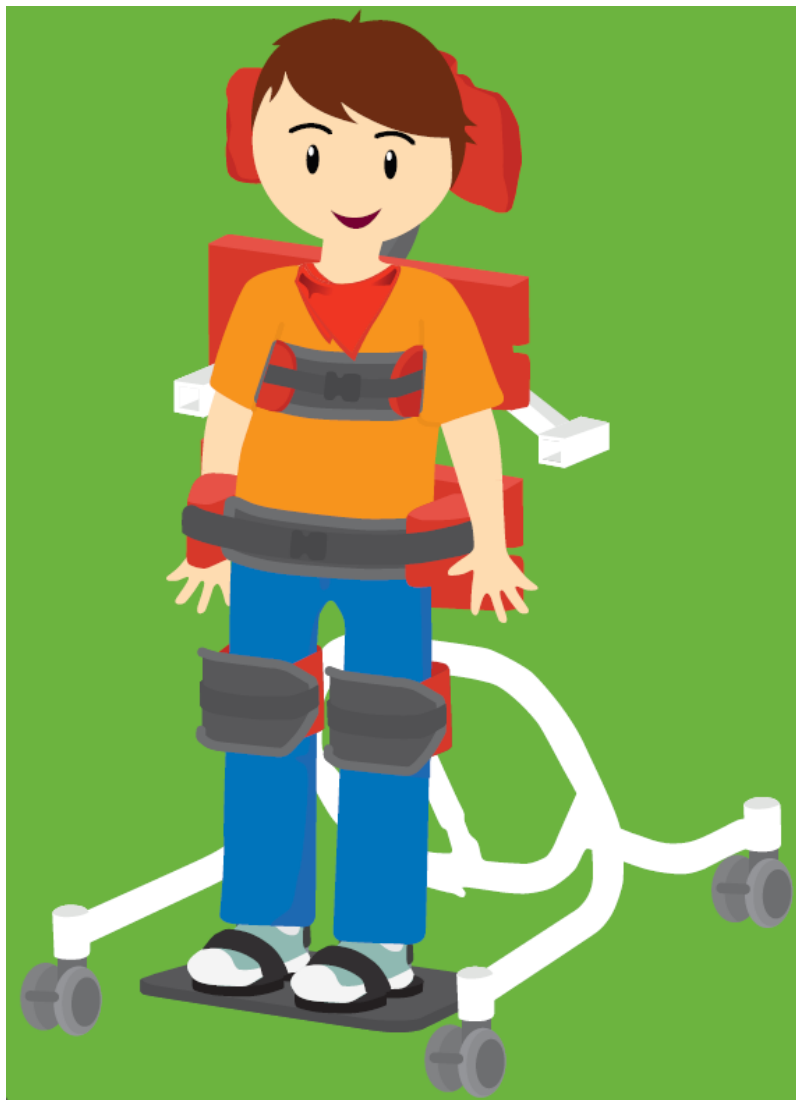

Fornisce nuove prospettive e modalità di partecipazione



Aiuta la respirazione e a dialogare



Aiuta ad alleviare la pressione creata dalla posizione seduta



Supporti bacino, cosce e piedi in modo che i bambini possano unirsi alle attività quotidiane



Fornisce opportunità per incrementare le abilità sociali

# Multistander by JENX

Il Multistander è un prodotto modulare, si ha quindi la possibilità di scegliere specifici accessori per rispondere alle esigenze di ogni bambino.

## Dotazione di base:

- Base con 4 ruote piroettanti bloccabili
- Staffe di aggancio per l'installazione dei supporti per il ginocchio
- Pedana regolabile
- Gruppo pistone per la regolazione manuale dell'inclinazione
- N. 2 tavole di supporto in PU
- N. 2 set di supporti standard per il posizionamento di tronco e bacino da scegliere fra le diverse misure disponibili. Tutti i supporti sono regolabili in altezza, larghezza e angolazione per offrire la massima possibilità di personalizzazione. Le imbottiture sono complete di cinturino anti-apertura.
- N. 1 set di supporti per il ginocchio da scegliere delle 2 misure disponibili. Completati di cinghie imbottite e anti-apertura, regolabili in altezza, larghezza, profondità e angolazione.
- Poggiatesta OVALE (incluso solo nella configurazione prona/supina). Montato su un supporto flessibile, consente la regolazione in altezza, profondità e angolazione.
- Tavolino per l'utilizzo sia in posizione prona che supina. Facile da agganciare e regolabile in altezza, angolazione e profondità.
- Sandaletti per il posizionamento del piede. Disponibili in tre diverse misure, Intercambiabili con i sandaletti degli altri standing e prodotti di Jenx.



# Multistander by JENX

## Accessori:

- POGGIATESTA MULTIGRIP TM => L'originale e innovativo poggiatesta Jenx Multigrip TM è disponibile in tre taglie differenti e ha staffe di aggancio altamente flessibili, regolabili in altezza, profondità e angolazione.



- POGGIATESTA ANATOMICO => Poggiatesta semplice e confortevole che da un minimo supporto alla testa del bambino. Montato su una staffa flessibile, consente la regolazione in profondità, altezza e inclinazione.



- PETTORINA => Fornisce ulteriore stabilità a tronco e spalle.



- BLOCCA GOMITI PER TAVOLINO => Aiutano le braccia a restare in appoggio sul tavolino e a bloccare un'eccessiva retrazione



- COVER => Fodere removibili che avvolgono i supporti di Multistander per dare un tocco di colore. Disponibili in vari colori.

- SUPPORTO PER IL PETTO => In gommapiuma, favorisce l'estensione del torace e aiuta a migliorare il controllo della testa. Da utilizzare in combinazione della relativa cover.



- SUPPORTO MULTIGRIP PER SPALLE E BACINO => Per un supporto extra a spalle e bacino (disponibile solo per Multistander 2).



- RIALZI PER SANDALETTI => Disponibili per ogni misura di sandalo, questi kit aumentano l'altezza dove serve anche singolarmente.



- ABDUZIONE => sistema di abduzione individuale delle gambe di 0-30 gradi (con step di 5°).





# Multistander by JENX

Colori disponibili:



Verde Lime

Rosso

Blu

Rosa

Nero


# Multistander by JENX

## Multistander 1

- Età approssimativa di utilizzo da 9 mesi a 6 anni;
- Altezza massima utilizzatore: 116 cm;
- Peso massimo utilizzatore: 35 Kg

## Multistander 2

- Età approssimativa di utilizzo da 3 anni a 13 anni;
- Altezza massima utilizzatore: 155 cm;
- Peso massimo utilizzatore: 60 Kg

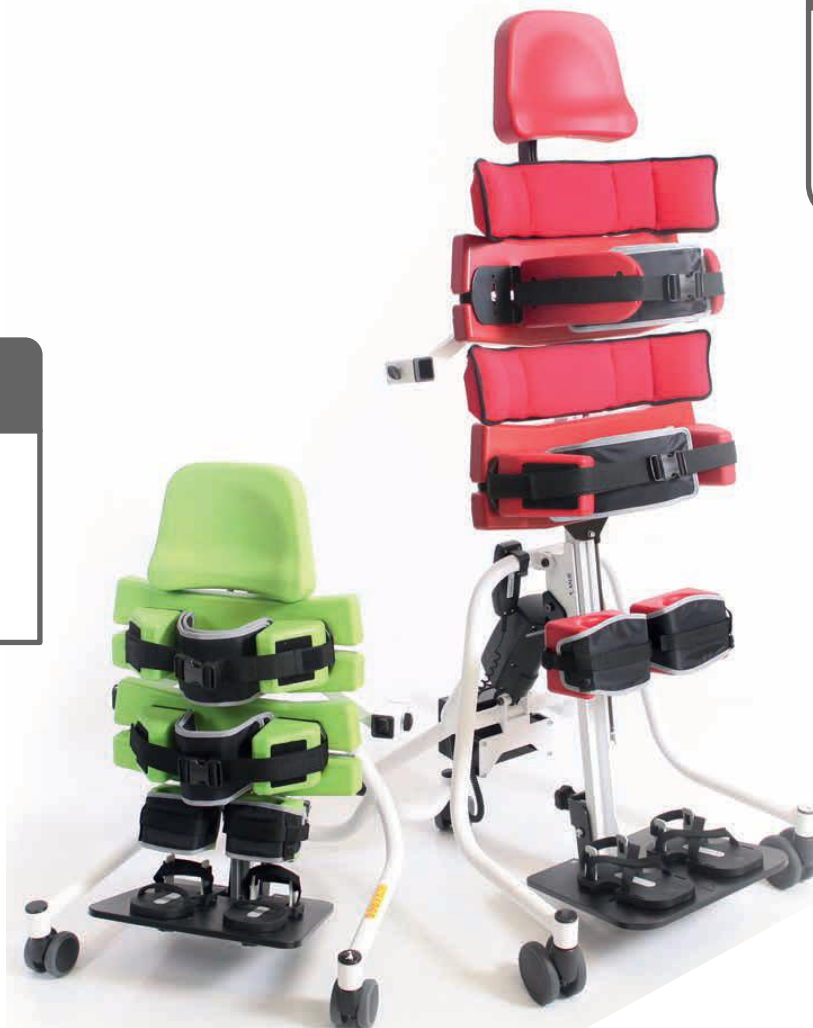

# Multistander by JENX

NB Alcune misure minime e massime si possono ottenere solo tramite l'utilizzo di accessori di Multistander	Misure	U.M.	Multistander 1 Prono	Multistander 1 Supino	Multistander 2 Prono	Multistander 2 Supino
Età di utilizzo	approx.	Mesi- anni	9 mesi - 6 anni	9 mesi - 6 anni	3 anni - 13 anni	3 anni - 13 anni
Altezza utente	max	mm	1160	1160	1550	1550
Peso utente	max	Kg	35	35	60	60
Larghezza torace	min-max	mm	105-240	105-240	160-350	160-350
Larghezza bacino	min-max	mm	130-280	130-280	160-350	160-350
Larghezza tra le ginocchia (da centro a centro)	min-max	mm	120-190	120-190	190-280	190-280
Altezza (da piano sandalo a parte alta tavola di supporto superiore)	min-max	mm	490-850	490-850	750-1200	750-1200
Altezza (da piano sandalo a parte superiore poggiatesta)	min-max	mm	-	620-1160	-	910-1350 (no supporto spalle Multigrip) 910-1500 (con supporto spalle Multigrip)
Altezza (da pavimento a parte alta tavola di supporto superiore)	min-max	mm	670-940	670-940	830-1280	830-1280
Angolazione pedana	Dorso-pianta	gradi	15° - 15°	15° - 15°	15° - 15°	15° - 15°
Inclinazione telaio	Orizz.-vertic.	gradi	10° - 90°	90° - 10°	10° - 80°	80° - 10°
Misura piede su pedana	Largh.x lung.	mm	610x770	610x770	675x1080	675x1080

**Multistander** by JENX

Per maggiori informazioni contattaci:

**medimec**<sup>®</sup>

**MEDIMEC INTERNATIONAL SRL**

Via Proventa n. 52 – 4808 Faenza (RA)

Tel. 0546/46870 Fax 0546/46467

[medimec@medimec.it](mailto:medimec@medimec.it)

[www.medimec.it](http://www.medimec.it)

