

# OCTUPUS



Thomashilfen

30 – 80 kg /  
66.1 – 176.4 lb  
GMFCS Level I-III



NEW

Imbragatura per il posizionamento in auto di adulti e ragazzi

# OCTOPUS IMBRAGATURA PER AUTO

by **Thomashilfen**

«Se un seggiolino auto per riabilitazione non si adatta (non più), ma la cintura a 3 punti offre un supporto troppo scarso, l'imbragatura di posizionamento **OCTOPUS** di THOMASHILFEN offre sicurezza. Offre a bambini e adulti una posizione stabile e un supporto senza costrizioni. Le fibbie bloccabili della cintura impediscono pericolose aperture durante la corsa. La maneggevolezza e la rapidità di installazione facilitano l'installazione ed il cambio del veicolo rendendo **OCTOPUS** il compagno perfetto per la mobilità nella vita quotidiana delle famiglie..»


## GIUBBOTTINO CON CHIUSURA A 7 PUNTI

Con il giubbottino imbottito con chiusura a 7 punti, l'utente si siede comodamente in posizione verticale senza perdere la sua stabilità perché:

- ✓ assicura la corretta postura seduta eretta, come prerequisito per il funzionamento ottimale della cintura di sicurezza a 3 punti del veicolo
- ✓ viene impedita l'inclinazione laterale o in avanti causata dal debole tono muscolare



**TIP => RIALZO SEDILE** L'Octopus può essere utilizzato con un rialzo da un peso corporeo di 30 kg / 66,1 libbre.

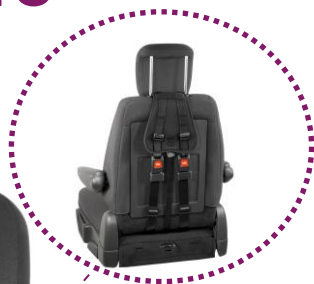

## GUIDE DELLE CINTURE

Il sistema di cinture è dotato di una base posteriore (incl. cintura) che può facilmente essere guidata e allacciata dietro lo schienale del sedile dell'auto.



## FIBBIE CON SERRATURA

Sette fibbie con serratura offrono ancora più sicurezza perché non sarà più possibile aprirle accidentalmente



## REGOLAZIONI

Le cinghie possono essere regolate in modo rapido e semplice, per l'adattamento individuale a diversi utenti.



## CINGHIA INGUINALE

La cinghia inguinale impedisce lo scivolamento in avanti e all'indietro nel sedile e garantisce una buona posizione pelvica; può anche essere rimosso se necessario.

## SET PROLUNGA CINTURA

Utile accessorio per l'installazione su sedili più avvolgenti (es. autobus) o quando il sedile o lo schienale sono saldamente collegati.

# OCTOPUS IMBRAGATURA PER AUTO

by Thomashilfen 

## Esempi di uso quotidiano



OCTOPUS garantisce sicurezza, ma deve **SEMPRE** essere utilizzato in combinazione con la cintura di sicurezza a 3 punti dell'auto.



La base posteriore di OCTOPUS rimane completamente installata nelle auto, solamente il giubbottino imbottito a 7 punti viene spostato sull'auto in cui deve essere utilizzato.



In caso di incidente, le cinture possono essere rapidamente tagliate con il taglia-cinture in dotazione.

Particolarmente indicato per:

- Limitazioni funzionali muscolari / instabilità posturale
- Tono muscolare debole (postura «lassa»)
- Iperattività / forte necessità di movimento
- Disturbi percettivi / Autismo
- Disabilità mentale (rischio di apertura involontaria delle cinture di sicurezza)
- Obesità



*Nota: l'imbracatura di posizionamento Octopus non è classificata come imbracatura di sicurezza, ma come **dispositivo medico per il posizionamento**. Per rispettare le norme di sicurezza, **la cintura di sicurezza del veicolo DEVE SEMPRE essere indossata sopra l'imbracatura di posizionamento Octopus**. Questa combinazione fornisce ulteriore sicurezza per l'utente.*

# OCTOPUS IMBRAGATURA PER AUTO

by Thomashilfen 

## Caratteristiche



Il **gilet con chiusura a 7 punti** offre comfort nella seduta e supporto ottimale per un posizionamento eretto della parte superiore del corpo



La **cinghia inguinale** impedisce lo scivolamento sul sedile e garantisce il mantenimento di una buona posizione pelvica; la cinghia può essere rimossa se necessario



Può essere utilizzato con quasi **tutti i sedili dei veicoli**, anche sedili singoli, panche o con rialzo (disponibile come accessorio una prolunga cintura opzionale per facilitare l'installazione)



Incluso nella dotazione il **martello con taglia-cinture** per le emergenze ed un kit di chiavi per la chiusura delle fibbie.

# OCTOPUS IMBRAGATURA PER AUTO

by Thomashilfen 

## ACCESSORI



### TIP



Raccomandato per un cambio veloce di veicolo.

Per es. : trasporto scolastico o per disabili, seconda auto...

La parte posteriore della base rimane completamente montata nel veicoli. Solamente il giubbottino imbottito con chiusura a 7 punti viene spostato nell'altro veicolo in modo rapido e semplice insieme all'utente.



Il set di prolunghe della cintura è utile quando il sedile del veicolo non ha apertura tra il sedile e lo schienale.



Poggiatesta per bambini e adulti, fornisce supporto laterale per la testa, con cuscinetti di supporto regolabili in altezza.

Base posteriore aggiuntiva: da installare su un secondo veicolo per un rapido cambio: ad es. scuola taxi, servizi di guida, seconda auto...

## Configurazione base:

- Base posteriore/schienale
- Giubbottino imbottito con chiusura a 7 punti
- Cinghie per posizionamento spalle
- Cinghie pelviche
- Cinghia inguinale
- 7 fibbie a sgancio laterale con serratura a chiave
- Taglia-cinture di sicurezza per emergenza
- Fodere e imbottiture in materiale idrorepellente

## Caratteristiche tecniche

Giubbottino imbottito con chiusura a 7 punti	Largh. 34 x h 42 cm
Base posteriore/schienale	Largh. 34 x h 84 cm
Altezza min. - max utilizzatore	130 – 185 cm
Peso min. - max utilizzatore	30 – 80 kg