

*Carrozze
manuali
basculanti*



FUZE T50

Carrozzina manuale con 50° di basculamento

Carrozzina manuale con l'esclusivo basculamento della seduta a 50°. Uno dei pochissimi sistemi di postura che consentono un reale scarico delle pressioni, ottenibile solamente con il basculamento del paziente oltre i 40°.

Il fulcro del meccanismo di basculamento è posizionato al di sopra del piano seduta rendendo la manovra estremamente semplice e leggera, anche da parte di assistenti con poca forza.

Grazie al posizionamento strategico del fulcro, pur basculando la carrozzina, gli ingombri non cambiano. Questa caratteristica rende la carrozzina perfetta per l'utilizzo in ambienti domestici o in spazi ristretti.

Il telaio garantito a vita è completamente regolabile in poche semplici mosse.



Configurazione Standard

- Telaio completamente regolabile
- Anelli di sicurezza per il bloccaggio in auto
- Ruote posteriori piene da 24" con estrazione rapida e corrimano
- Freni di stazionamento a spinta
- Ruote anteriori piene da 8"x1/4"
- Braccioli lunghi estraibili e regolabili in altezza
- Poggia-gambe fisso a 70° estraibili
- Pedane regolabili in inclinazione con ferma talloni
- Ruotine antiribaltamento
- Reclinazione schienale: 90/120° regolabile
- Senza schienale
- Senza cuscino
- Senza poggiatesta


Caratteristiche Tecniche

- Basculamento -5° + 50°
- Larghezza seduta da 33 a 50 cm
- Profondità seduta da 38 a 50 cm
- Altezza seduta da 33 a 50 cm
- Altezza schienale standard cm 50
- Angolo reclinazione schienale regolabile da 90° a 120°
- Portata massima 113 Kg
- Peso carrozzina 20,5 Kg
- Larghezza massima LS + 21 cm
- Profondità massima 71 cm (senza poggia-gambe)

Altezza
seduta
regolabile



Posizione
dell'asse

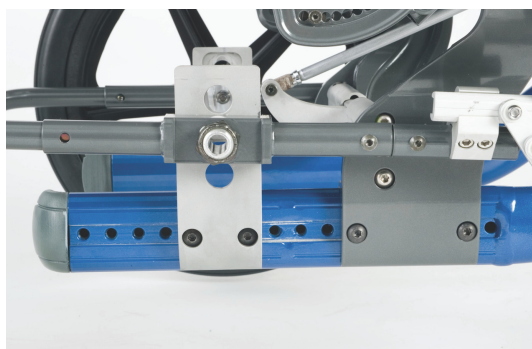

Profondità
seduta
regolabile
schienale
abbattibile
regolabile



Larghezza
seduta
regolabile



Il cerchio evidenzia la posizione del perno di basculamento sulla carrozzina.



Sistema Posturale

Il sistema posturale Stealth è composto da un cuscino Solution, da uno schienale ADI regolabile in altezza, e un supporto posturale per il capo Stealth (modello Comfort).

Solution è un cuscino in schiuma sagomata ad alta densità, che offre una profonda immersione e contenimento per proteggere la pelle.

Disegnato per persone a medio/alto rischio di piaghe o arrossamenti è strutturato per la redistribuzione dei carichi e la riduzione delle pressioni in modo che esse si distribuiscano sull'intera superficie.

Il rivestimento traspirante è realizzato con la tecnologia Coolcore® che garantisce il mantenimento di una temperatura confortevole ed appropriata per la pelle in tutte le stagioni.

StealthProducts

SKIN PROTECTION
AND POSITIONING



Cuscino Solution



Poggiatesta
Comfort

Punti Chiave

- Studiata per alleviare la pressione e posizionare il paziente
- Baricentro basculante
- Posizione delle ruote facilmente regolabile
- Basculamento senza sforzo

Applicazioni Standard

- Tutti gli utilizzi classici di una carrozzina basculante
- Telaio regolabile in molteplici modi per garantire un adattamento a lungo termine

Spinta a mano e a piede

- La spinta manuale è sempre consentita
- La spinta con i piedi non è possibile con carrozzina basculata

Caratteristiche tecniche ed estetiche possono essere modificate in qualsiasi momento a seguito di variazioni di mercato o errori tipografici. Le immagini sono puramente indicative.

ADI
ACCESSIBLE DESIGNS, INC.

Schienale
regolabile
in altezza



FUZE T50 JR Carrozzina manuale con 50° di basculamento

Carrozzina manuale con l'esclusivo basculamento della seduta a 50°. Uno dei pochissimi sistemi di postura che consentono un reale scarico delle pressioni, ottenibile solamente con il basculamento del paziente oltre i 40°.

Il fulcro del meccanismo di basculamento è posizionato al di sopra del piano seduta rendendo la manovra estremamente semplice e leggera, anche da parte di assistenti con poca forza.

Grazie al posizionamento strategico del fulcro, pur basculando la carrozzina, gli ingombri non cambiano. Questa caratteristica rende la carrozzina perfetta per l'utilizzo in ambienti domestici o in spazi ristretti.

Il telaio garantito a vita è completamente regolabile in poche semplici mosse.

Personalizzabile con un'ampia gamma di accessori.




Configurazione Standard

- Telaio completamente regolabile, rosso
- Anelli di sicurezza per bloccaggio in auto
- Ruote posteriori pneumatiche da 12"
- Freni di stazionamento a spinta
- Ruote anteriori piene da 5"x1/4"
- Braccioli desk regolabili in altezza
- Poggia-gambe fisso a 90° estraibili
- Pedane regolabili in inclinazione con ferma talloni
- Ruotine antiribaltamento
- Senza Schienale
- Senza Cuscino
- Senza Poggiatesta

Caratteristiche Tecniche

- Basculamento -5° + 50°
- Larghezza seduta da 30 a 43 cm
- Profondità seduta da 33 a 45 cm
- Altezza seduta da 30 a 45 cm
- Portata massima 80 kg
- Peso carrozzina 18,5 Kg
- Larghezza massima LS + 19 cm (con ruote da 12" o 16")
- Profondità massima 61 cm (senza poggia-gambe)

Altezza
seduta
regolabile

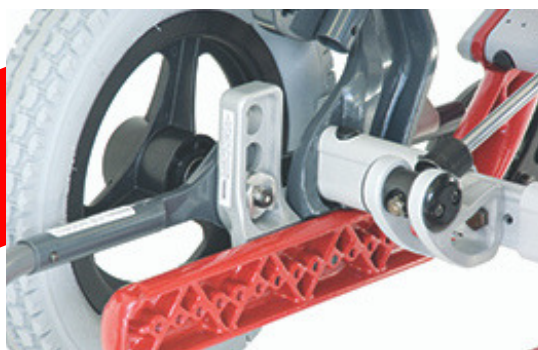

Posizione
dell'asse



Profondità
seduta
regolabile
schienale
abbattibile
regolabile



Larghezza
seduta
regolabile





Il cerchio evidenzia la posizione del perno di basculamento sulla carrozzina

Caratteristiche tecniche ed estetiche possono essere modificate in qualsiasi momento a seguito di variazioni di mercato o errori tipografici. Le immagini sono puramente indicative.

Punti Chiave

- Studiata per alleviare la pressione e posizionare il paziente
- Baricentro basculante
- Posizione delle ruote facilmente regolabile
- Basculamento senza sforzo

Applicazioni Standard

- Tutti gli utilizzi classici di una carrozzina basculante
- Telaio regolabile in molteplici modi per garantire un adattamento a lungo termine

Spinta a mano e a piede

- La spinta manuale è sempre consentita
- La spinta con i piedi non è possibile con carrozzina basculata



Bodytech Srl

Via Pratolino, snc
19037 Santo Stefano di Magra (SP)
Tel. +39 0187 940142 · Fax +39 0187 934142
www.bodytechitalia.it · info@bodytechitalia.it



@bodytechitalia

