



QUICKIE[®]
Live without limits.

JIVE[®] ***UP***
**ELEVATE YOUR
EXPERIENCE**

ELEVATE LA VOSTRA ESPERIENZA

Venite a conoscere l'ultima evoluzione della famiglia JIVE, la carrozzina verticalizzante JIVE UP. Unendo l'agilità nei luoghi chiusi e le elevate prestazioni all'aperto tipiche di JIVE M con una seduta multi-funzionale, potrete ora godere sia della posizione seduta sia della posizione eretta senza rinunciare al comfort della vostra JIVE UP. Con il semplice tocco di un pulsante, potrete trovarvi alla stessa altezza del mondo che vi circonda e sfruttare i benefici della posizione eretta, uniti alla libertà e all'indipendenza che solo JIVE UP può offrirvi.

Goditi la vita che desideri elevandoti con JIVE UP.





I BENEFICI DELLA POSIZIONE ERETTA...

JIVE UP consente di utilizzare la posizione eretta frequentemente e in modo autonomo.

I benefici per la salute e la vita quotidiana sono molteplici:

- aumenta il sollievo dalla pressione per coloro che hanno limitate abilità di spostamento o debbano rimanere seduti per lunghi periodi.
- agevola il raggiungimento di oggetti e la partecipazione alle attività del vivere quotidiano
- estende il range di mobilità con riduzione del rischio di contratture.
- aiuta le funzioni vitali come quella polmonare, intestinale, vescicale e circolatoria
- promuove la salute delle ossa e riduce il rischio di sviluppare deformità scheletriche.
- riduce l'anormale tono muscolare e la spasticità.

SCEGLIETE LA VOSTRA POSIZIONE...

JIVE UP utilizza una centralina che consente all'utente di scegliere tra 5 posizioni predefinite. Ogni posizione può essere raggiunta direttamente e indipendentemente dalla posizione corrente dell'utente. Le cinque posizioni possono essere memorizzate utilizzando i semplici pulsanti programmabili, così da rispondere alle esigenze individuali degli utenti.



→ CENTRALINA PER GESTIRE LE POSIZIONI DELLA SEDUTA

Il pulsante superiore porta l'utente nella posizione indicata nell'icona. Il pulsante inferiore riporta l'utente in posizione seduta.

Sul pulsante "M" è possibile programmare una posizione personalizzata per l'utente.



OGNI POSIZIONE POSSIBILE



→ POSIZIONE DI TRASFERIMENTO

Se un utente ha bisogno di essere trasferito in carrozzina o fuori dalla carrozzina, questa funzione permette il basculamento in avanti per facilitare il trasferimento.



→ POSIZIONE DI RELAX

Utilizzando questa funzione si bascula la seduta e si sollevano le gambe.



→ POSIZIONE VERTICALIZZATA

Questa funzione porta l'utente in posizione eretta. Raggiunto un certo angolo di basculamento in avanti, il meccanismo di blocco delle ruote anteriori entra in funzione.



→ POSIZIONE SEDUTA

Questa è la posizione in cui l'utente può guidare la carrozzina. E' anche definita posizione standard; tutti gli attuatori conducono a questa posizione se il joystick viene tirato all'indietro mentre è in modalità "seating/memory position".



→ POSIZIONE SDRAIATA

Questa funzione porta l'utente in posizione orizzontale.



// CON JIVE AVRETE TUTTO SOTTO CONTROLLO

Potrete inoltre personalizzare la vostra Jive espandendo il sistema di comando con R-net. Personalizzate la vostra carrozzina assegnando ad un pulsante le funzioni che utilizzate più frequentemente.

Rimanete sempre in contatto con i vostri social media preferiti utilizzando l'opzione Bluetooth di Jive per smartphone o tablet.

Oppure tenete sotto controllo lo spazio intorno a voi con il comando Omni di Jive. Siete pronti per vedere un film? Abbassate le luci, selezionate "Play" ed alzate il volume, tutto questo senza mai lasciare andare il joystick. E se il joystick non dovesse essere lo strumento adatto per voi, potrete controllare la vostra Jive scegliendo uno dei molti comandi speciali disponibili.

TECNOLOGIA SPIDERTRAC®

Guida regolare, sicura e confortevole su diversi terreni. L'innovativo sistema di sospensioni SpiderTrac® porta molti benefici con un unico meccanismo.






→ Ecco il video del sistema
SpiderTrac®!



COME FUNZIONA IL SISTEMA DI SOSPENSIONI SPIDERTRAC®?


SpiderTrac® è un sistema di sospensioni a gas che smorza l'impatto senza aumentare la pressione sulle ruote piroettanti. Massimizzando la capacità di articolazione delle ruotine anteriori e posteriori, Jive UP ha l'abilità tipica dei ragni di superare gli ostacoli lentamente e senza scossoni: quando salirete e scenderete da un gradino il sistema a gas smorzerà l'impatto delle ruote anteriori. Questo vi assicurerà non solo una guida priva di sobbalzi, vibrazioni e beccheggio in avanti, ma vi darà anche la certezza di essere sempre seduti in posizione orizzontale.

Le sospensioni delle ruote anteriori e delle ruote posteriori sono collegate e si muovono in direzione opposta per compensare il movimento delle ruote motrici. In questo modo, quando si deve affrontare un cambio di pendenza (o salire su una rampa) ogni ruota mantiene il contatto con il terreno massimizzando la trazione. Il sistema di molle a gas assorbe i colpi sulle ruote piroettanti offrendo una guida confortevole anche su terreni sconnessi. Dovete davvero provare per credere.

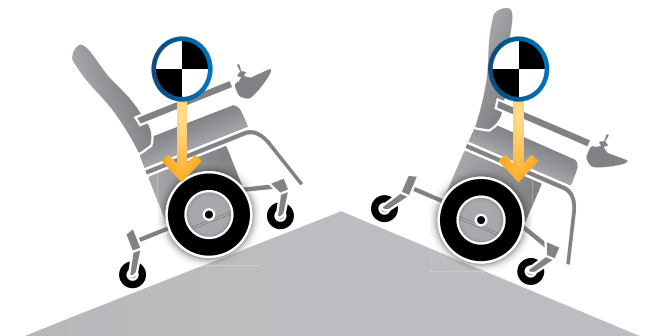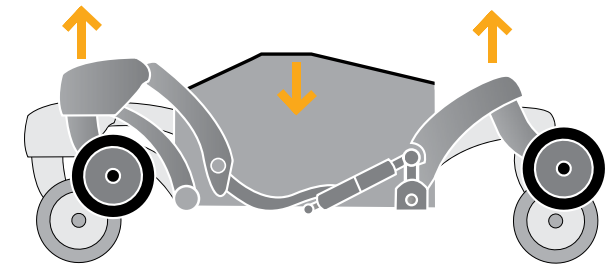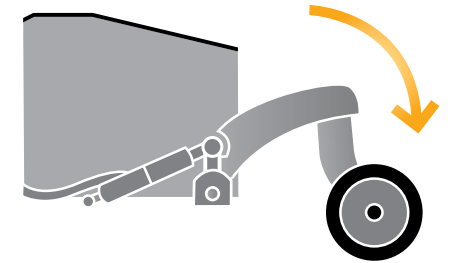

MANOVRABILITÀ SUPERIORE

La Jive Up è una trazione centrale a tutti gli effetti. La guida risulta facile ed intuitiva per tutti gli utenti, anche quando si utilizzano comandi speciali. Questo perché il centro di rotazione della carrozzina corrisponde al suo centro geometrico permettendo così un movimento naturale in ogni direzione. La posizione di seduta, inoltre, aggiunge maggior peso sulle ruote motrici, aumentando di fatto la trazione e riducendo il rischio di slittamento quando ci si trova all'aperto.

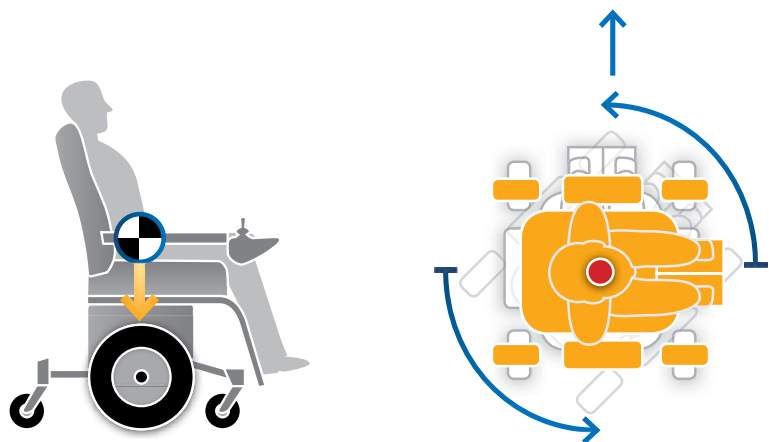



ECCELLENTE MANOVRABILITÀ AL CHIUSO

Poiché il centro di rotazione è situato proprio sotto di voi, JIVE M può girare su se stessa con un raggio di sterzata veramente ridotto e consentirvi di muovervi in tutta la casa con un'eccellente manovrabilità.

Passare da una stanza all'altra, salire in ascensore e girare in spazi ristretti diventa davvero facile con le dimensioni compatte di JIVE. L'altezza della seduta di soli 430 mm (con il modulo di basculamento) consente di avvicinarsi ai tavoli ed il trasporto su un veicolo senza problemi, mentre gli angoli pedana a 90° assicurano un buon posizionamento delle gambe.

GRANDI PRESTAZIONI ALL'APERTO

Non dimenticate, con JIVE UP stare all'aperto sarà confortevole come essere a casa. Con le sospensioni SpiderTrac guiderete in modo fluido anche su terreni sconnessi con una superba trazione, stabilità eccellente e un minimo beccheggio in avanti anche quando scenderete da marciapiedi alti 10 cm!

Con una velocità sino a 13 Km/h (10 Km/h std), le batterie da 60 o 70 Ah (std) e un'autonomia di 40 km, avrete sempre a portata di mano una grande potenza. Sistemi di comando espandibili (con moduli opzionali R-Net) controllano questa potenza e sono pronti ad interagire con il mondo intorno a voi.



JIVE[®] UP

APPROVATA PER IL TRASPORTO IN UN VEICOLO

JIVE UP ha superato il crash test secondo la norma ISO 7176-19. I test sono stati effettuati con un sistema di ancoraggio a 4 punti.



JIVE UP offre un'ampia gamma di opzioni. Configurate la carrozzina in base alle vostre esigenze. Ottenete il meglio per voi!
Per maggiori informazioni consultate la scheda d'ordine.



// SISTEMA DI SEDUTA JAY COMFORT

Questo sistema di seduta è standard ed è composto da una gamma di cuscini e di schienali comfort che forniscono grande sostegno.



// SCHIENALE CON RIDUZIONE DELLO SCIVOLAMENTO

JIVE UP è dotata di uno schienale con meccanismo di riduzione dello scivolamento azionato da un attuatore. Riduce le forze di attrito e compensa i movimenti relativi dell'appoggiatesta, dei contenimenti laterali e del comando a mento durante la reclinazione.



// PEDANE ELEVABILI ELETTRICAMENTE CON CONTENIMENTI ANTERIORI PER GINOCCHIA

E' possibile programmare la lunghezza e l'angolo della pedana elevabile in base alla posizione del sistema di seduta. I contenimenti anteriori per le ginocchia sono indispensabili quando si utilizza la verticalizzazione.



// FACILE MANUTENZIONE

La base non richiede grande manutenzione ed è facile da gestire. La batteria e i componenti elettrici sono facilmente raggiungibili per merito del meccanismo con posizionamento a scatto automatico.



// LUCI E FRECCE A LED

Sarete sempre visibili con le luminose luci a LED integrate nella parte posteriore della scocca per uno stile elegante.



// POTENTI MOTORI A 4 POLI

Jive Up è dotata di potenti motori a 4 poli. E' disponibile nelle versioni da 6 Km/h, 10 Km/h (std) e 13 Km/h.

DATI TECNICI

JIVE UP // CARROZZINA ELETTRONICA

Portata massima:	120 kg	Batterie:	60 Ah e 70 Ah (std)
Ruote:	Ruote motrici 14"; ruote piroettanti 6"	Stabilità dinamica:	10° (18%)
Larghezza seduta:	40 – 50 cm	Larghezza totale:	63 cm
Profondità seduta:	40 – 52 cm	Raggio di sterzata:	max. 91 cm
Angolo seduta:	0° – 22°	Autonomia (ISO 7176-4):	40 km con batterie da 70 Ah (std) 32 km con batterie da 60 Ah
Angolo schienale:	90° – 175°	Superamento massimo ostacoli:	10 cm
Funzioni di memoria della seduta:	5 posizioni predefinite: seduta, verticalizzata, sdraiata, di relax, di trasferimento, più una personalizzabile	Colori:	3 colori: rosso, blu e bianco
Velocità massima:	6 Km/h, 10 Km/h (std), 13 Km/h	Transporto (ISO 7176-19):	Sistema a 4 punti

Per maggiori informazioni sulle opzioni del prodotto consultare la scheda d'ordine presente sul nostro sito web.
Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso. In caso di bisogno contattare Sunrise Medical.
Per gli utenti ipovedenti questo documento può essere visualizzato in formato PDF sul sito www.SunriseMedical.com



Sunrise Medical S.r.l.

Via Riva, 20 - Montale
29122 Piacenza
Tel.: +39 0523 573111
Fax: +39 0523 570060
E-mail: info@sunrisemedical.it
www.SunriseMedical.com