


Soft

IL MATERASSO ANTI-DECUBITO MODULARE CON SISTEMA DUAL A DOPPIO STRATO

Indicato nella profilassi del decubito fino allo Stadio III (EPUAP), livello di rischio elevato. Combina la massima decompressione con la stabilità utile al **mantenimento della mobilità residua**. Grazie alla **struttura modulare** è possibile estrarre uno o più cubi dalla parte inferiore, nei punti interessati da pressione e dolore acuti. Permette una **decompressione individuale e personalizzata**. Raccomandato per pazienti con particolari zone del corpo (soprattutto punta ischiatica) che necessitano di decompressione mirata, che soffrono di anca spostata che può essere corretta con la rimozione mirata dei cubi, che presentano un andamento progressivo della malattia (es. sclerosi multipla, sla) o che sudano molto.

ACCESSORI: vedi sito web

MAGGIORI INFO SU: medimec.it/soft

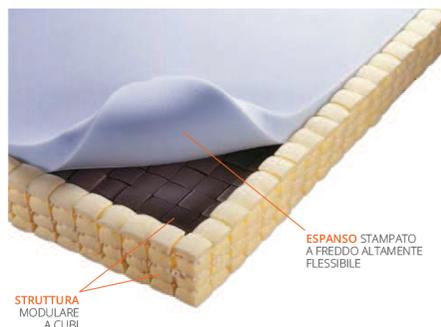

VERSIONI	12 CM R*	16 CM	16 CM R*
PORTATA MAX UTENTE	120 KG	140 KG	50 - 200 KG
MIGLIORE DEC.** FINO A	70 KG	100 KG	90 - 160 KG

KUBIVENT.



UN ARTICOLO KUBIVENT. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ: A NORMA CE.


Thera Cubus

IL MATERASSO ANTI-DECUBITO MODULARE COMPOSTO DA DUE STRATI DI CUBI REGOLABILI

Indicato nella profilassi del decubito fino allo Stadio III (EPUAP), livello di rischio elevato. I **cubi possono essere rimossi dal lato inferiore** per decomprimere, mentre la parte superiore rimane chiusa. Si garantisce una **distribuzione ottimale della pressione**, deviata sul perimetro dei cubi restanti, e una **decompressione ottimale** senza appoggio su morbido. Raccomandato per pazienti con particolari zone del corpo (cachettici o con difetti della pelle) che necessitano di decompressione mirata, che sudano molto, che soffrono di anca spostata (correggibile con la rimozione mirata di cubi), che presentano un andamento progressivo della malattia (es. sclerosi multipla, sla), che necessitano una riduzione delle forze di taglio.

ACCESSORI: vedi sito web

MAGGIORI INFO SU: medimec.it/thera-cubus

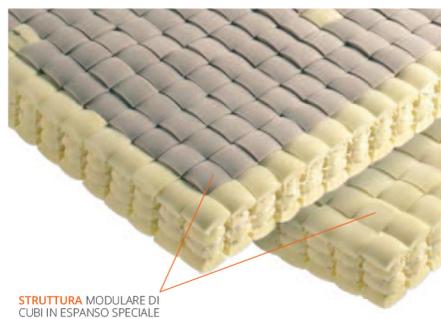

VERSIONI	10 CM	10 CM R*
PORTATA MAX UTENTE	140 KG	50 - 160 KG
MIGLIORE DEC.** FINO A	100 KG	90 - 140 KG

KUBIVENT.



UN ARTICOLO KUBIVENT. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ: A NORMA CE.

Viscola

IL MATERASSO ANTI-DECUBITO VENTILATO REALIZZATO IN ESPANSO VISCOELASTICO

ACCESSORI: vedi sito web

MAGGIORI INFO SU: medimec.it/viscola

Indicato nella profilassi del decubito fino allo Stadio II (EPUAP), livello di rischio medio. L'espanso viscoelastico **reagisce** al calore e al peso corporei e **si adatta** ad ogni forma del corpo. Parti sporgenti come spalle, anche o talloni possono affondare maggiormente e, anche sotto massima sollecitazione, viene garantita una **distribuzione uniforme della pressione**. Raccomandato per pazienti per i quali un decubito già curato deve essere sottoposto ad ulteriore trattamento, che, sulla base di malattie preesistenti, si raccomandano per una profilassi antidecubito con appoggio su morbido, che devono essere sdraiati in modo speciale (testa in alto/piedi in basso) che necessitano una riduzione delle forze di taglio.

VERSIONI	15 CM	20 CM R*
PORTATA MAX UTENTE	140 KG	50 - 160 KG
MIGLIORE DEC.** FINO A	100 KG	90 - 140 KG

KUBIVENT.



UN ARTICOLO KUBIVENT. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ: A NORMA CE. LEGENDA: L = LARGHEZZA; P = PROFONDITÀ; H = ALTEZZA; ANT = ANTERIORE; POS = POSTERIORE; MAX = MASSIMO; MIN = MINIMO; MAN = MANUALE; ELE = ELETTRONICO. TOLLERANZE ± 1,5 CM. * RIGIDO. ** DECOMPRESSIONE. ATTENZIONE: LA DITTA PRODUTTRICE SI RISERVA CAMBIAMENTI TECNICI E/O ESTETICI SENZA PREAVVISO. È ASSOLUTAMENTE NECESSARIO RISPETTARE LE INDICAZIONI DI SICUREZZA DEL COSTRUTTORE.

