



WHERE YOU WANT TO BE.

Sapphire^{®2}





Sapphire^{®2}

Smontalo,
caricalo in auto,
portalo con te!





Smontabile

Per trasportare in modo facile il tuo Sapphire^{®2}, rimuovere semplicemente il sedile, togliere le batterie e tirare la leva posteriore per separare la parte anteriore da quella posteriore dello scooter. E' davvero facile! (Allo stesso modo si rimonta facilmente!).



Sistema di smontaggio Sterling[®] del sedile, veloce e senza fili o connessioni

Trasportabile

Adesso lo Sapphire^{®2} può essere trasportato nell'auto. Fortunatamente, essendo uno degli scooter più leggeri della sua categoria, questo non è più un problema alle doppie maniglie sulle batterie e sulla parte posteriore del telaio. Permettono di sollevare e maneggiare le parti in modo comodo e sicuro.



Grazie alle sue grandi batterie Sterling^{®2} ti può portare lontano!



Il manubrio può essere piegato completamente per il trasporto

Confortevole

Ora sei pronto! Stendi le gambe e approfitta del comfort che ti offre Sapphire^{®2}: hai lo stesso spazio per le gambe che avresti con uno scooter a tre ruote con la stabilità delle quattro ruote, manubrio regolabile, maniglie avvolgenti, comandi accessibili e facili da usare.



Comandi accessibili e facili da usare



Ampio spazio per le gambe

Sapphire^{®2}




Regolabile da
420 a 640 mm




Regolabile da
420 a 550 mm



430 mm
520 mm

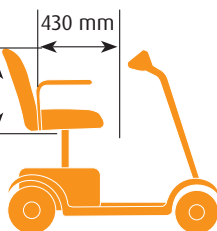

960 mm

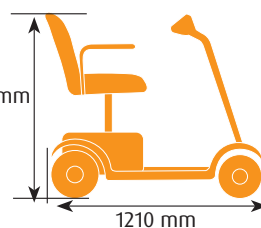

1210 mm



590 mm

Dati tecnici

Versione	4 ruote	Peso batteria	12 kg cad.
Velocità	6,5 km/h	Peso totale quando chiuso/smontato	22,5 kg
Batterie	35 Ah	Diametro di sterzata	2150 mm
Caricabatterie esterno	5 Ah	Pendenza massima superabile	24° con 113 kg di peso
Autonomia massima*	30 km	Pendenza massima superabile	18° con 150 kg di peso
Colore	Blu e Rosso	Spazio per inversione	1615 mm
Portata massima	150 kg	Altezza da terra	95 mm
Peso totale	79 kg	Copertoni	Pneumatici
Parte più pesante (parte anteriore)	22,5 kg	Ruote anteriori	225 mm (9")
Peso sedile	12,5 kg	Ruote posteriori	265 mm (10,5")
Peso unità di guida	19,5 kg	Luci	si

* Il peso dell'utente, le condizioni del terreno e del clima possono influire sull'autonomia e sulla pendenza superabile.

Per maggiori informazioni su opzioni e accessori, fare riferimento alla scheda d'ordine.
Tutte le informazioni possono essere soggette a cambiamenti senza notifica. Contattare Sunrise Medical per ogni richiesta.
Per gli utenti ipovedenti questo documento può essere visualizzato in formato PDF sul sito www.SunriseMedical.com.



pb_SAPPHIRE2_it_IT_REV1

Sunrise Medical s.r.l.

Via Riva, 20 - Montale
29122 Piacenza
Tel.: +39 0523 573111
Fax: +39 0523 570060

www.SunriseMedical.com