

Suprema



MADE IN ITALY



Suprema

SUPER • SLIDE • RELAX



🇬🇧 The chair **SUPREMA**, in all its versions, has been designed to give a higher **freedom of movement** to those people who have to use a chair to move indoors comfortably.

The Suprema has been **equipped with a double battery** to offer a **wider autonomy** when operating in indoor spaces; thus meaning both home and at work. The Suprema allows you to move freely in **narrow spaces** and access cramped rooms as well as bathrooms, it is **practical and silent** and its base is provided with pivoting wheels and driving steering wheels. On request, the sales network is available for demonstration at home.

🇩🇪 Der Rollstuhl **SUPREMA** ermöglicht in allen Versionen ein bequemes und komfortables Leben im Innenbereich, indem er die Bewegungsfreiheit und das Handlungsfeld des Nutzers erweitert.

Wegen seiner **Ausstattung mit einer Batterie** stellt der Rollstuhl **Suprema größtmögliche Autonomie** im häuslichen und beruflichen Umfeld sicher.

Der **praktische** Rollstuhl ist äußerst **geräuscharm** und hat ein schlichtes und funktionales Design. Er ist mit lenkbaren Antriebsrädern und schwenkbaren Rollen versehen, wodurch leichter Zugang zu **engen Räumen** wie auch zu Gemeinschaftseinrichtungen ermöglicht wird.

Auf Anfrage wird das Gerät am gewünschten Einsatzort vorgeführt und erprobt.

ACCESSORIES • ZUBEHÖR

cod. **NE001**



🇬🇧 5 cm. Padded Lateral Sides
🇩🇪 Abnehmbare Seitenteile

cod. **NE003 (right)** - cod. **NE004 (left)**
cod. **NE005 (Only mod. Slide)**



🇬🇧 Lateral leg support
🇩🇪 Seitliche Beinstützen

cod. **NE007**



🇬🇧 Plastic Footrest
🇩🇪 Kunststoff-Fußstütze

cod. **NE008**



🇬🇧 Adjustable Leg support
🇩🇪 Hochstellbare Beinstütze



mod. **SUPER**

Code/Artikel-Nr.: E72000

It has been designed to allow seat's **vertical motion** from a minimum height of **43 cm** to a maximum height of **74 cm** from the ground.

Dieses Modell hat eine stufenlos **verstellbare Sitzhöhe** von minimal **43 cm** bis maximal **74 cm**.



mod. **RELAX**

Code/Artikel-Nr.: E62000

It has been designed to allow **seat's vertical motion** from a minimum height of **43 cm** to a maximum height of **65 cm** from the ground, it **also** features the **tilting movement of the seat** up to **12°**. Maximum tilted height **84 cm**.

Dieses Modell hat eine **stufenlos verstellbare Sitzhöhe** von minimal **43 cm** bis maximal **65 cm**. Außerdem kann der Sitz um bis zu **12° nach hinten geneigt** werden. In geneigter Stellung beträgt die höchstmögliche Position der vorderen Sitzkante **84 cm**.



mod. **SLIDE**

Code/Artikel-Nr.: E82000

It has been designed to allow **seat's vertical motion** from a minimum height of **43 cm** to a maximum height of **74 cm** from the ground, it **also** allows a **seat excursion** of maximum **20 cm** onwards.

Die **Sitzhöhe** dieses Modells ist **stufenlos verstellbar** von minimal **43 cm** bis maximal **74 cm**. Zusätzlich kann die **Sitzfläche** um maximal **20 cm** nach vorne **herausgefahren** werden.




TECHNICAL DATA SHEET • TECHNISCHE DATEN

 The **SUPREMA** chair has been designed to move **ON FLAT SURFACES**, only and **IN INDOOR SPACES**. Complying with the dimensions shown in the picture, it is also possible to overcome slight obstacles and / or hollows.

 Der Rollstuhl **SUPREMA** ist **ausschließlich für die Anwendung auf der Ebene im Innenbereich** vorgesehen. Dennoch ist es möglich, kleinere Unebenheiten zu überwinden, wenn sich diese im Rahmen der hier angegebenen Maße befinden.

		Maximum weight Max. Trag- sportgewicht	Seat's vertical motion Höhenverstellung des Sitzes	Seat's horizontal motion Ausfahrsmöglichkeit des Sitzes	Seat tilting Neigung des Sitzes	Max. height tilted Max. Höhe geneigt	Speed Geschwindig- keit KM/h
SUPREMA Super	53	120	Min. 43 - Max. 73 cm	-	-	-	max. 1,23
SUPREMA Slide	55	120	Min. 43 - Max. 73 cm	Min. 0 - Max. 20 cm	-	-	max. 1,23
SUPREMA Relax	55	120	Min. 43 - Max. 65 cm	-	Min. 0 - Max. 12°	84 cm	max. 1,23

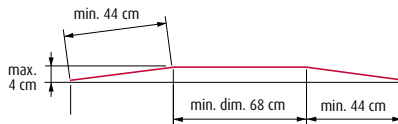

TECHNICAL FEATURES • TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN



- **Dry battery** (no maintenance is required) 12V - 26Ah
- Battery charge status indicator
- All kinds of motion are controlled by 12V c.c. electric motors
- **Built-in electronic battery charger**
- **Automatic system to select the empty battery to be recharged**
- Led indicating that the battery is completely charged
- Electronic board to control motion
- Operation is controlled through a user-friendly Joystick which allows the user to govern 1st and 2nd speed
- Seat motion button of the delayed type as to avoid unintended operation
- Seat Vertical motion starting and arresting gradually
- Operational autonomy of **the battery: 3H 30'** hours for **continuous motion**
- **Automatic disabling** of the electric motor, in case it is not used for more than **4 minutes**
- Emergency / Switch off button
- System security that disables run motion when reaching maximum lifting position (only for models Super and Slide)
- Lifting armrests
- Adjustable footrest
- Padded seat Anatomically-designed and variable-density with fire retardant, stain resistant coating
- **Demonstration and free training course at costumer's home**
- **After-sale technical service provided by T.G.R. authorised service centres**
- **24 month warranty**

The data are indicative and not binding. T.G.R. reserves the right to change them at any time.



- Wiederaufladbarer, wartungsfreier 12V 26AH **Bleiakku**
- Batterieladestandsanzeige
- Alle Bewegungen erfolgen über 12 V c.c. Elektromotoren
- **Eingebautes elektronisches Batterieladegerät**
- **Automatische Steuerung der Batteriewahl**
- LED zur Anzeige des Batterieladestands während des Ladevorgangs
- Joystick zur Laufsteuerung und zur Regelung der Geschwindigkeit
- Taster zur Wahl zweier Fahrgeschwindigkeiten, die mittels des Joysticks reguliert werden können
- Funktionstasten zur Sitzbewegung mit automatischer Einschaltverzögerung
- Höhenverstellung mit sanfter Anlauf- und Stoppfunktion
- Durchschnittliche Laufleistung der Batterie **3,5 Stunden im Dauerfahrbetrieb**
- Automatische Abschaltung nach 4 Minuten ohne Betätigung
- Not-Aus-Taste
- Sicherheitseinrichtung, die den Fahrbetrieb unterbindet, wenn die Sitzposition für sicheres Fahren zu hoch ist (nur bei den Modellen SUPER und SLIDE)
- Hochklappbare Armlehnen bei allen Modellen
- Einstellbare Fußstütze
- Sitz mit anatomischer Polsterung in abgestufter Festigkeit mit schwer entflammbarem Überzug
- **Vorführung und Bedienungseinweisung am Einsatzort**
- **Technischer Kundendienst durch autorisierten TGR-Service**
- **24 Monate Garantie**

Die genannten Produktdaten sind nicht bindend. T.G.R. behält sich eventuelle Aktualisierungen vor.

Rev. 09_2024

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
SUPREMA Super	62	72	-	56	19,5	47	45,5	42,5	42,5	58	98±128	-
SUPREMA Slide	62	72	-	56	19,5	47	45,5	42,5	42,5	58	98±128	-
SUPREMA Relax	62	72	81	56	19,5	47	45,5	42,5	42,5	58	98±123	24±29

Follow carefully and strictly the prescriptions, instructions and warnings given on the use and maintenance manual.

Die Anweisungen der Bedienungsanleitung sind genauestens zu beachten und zu befolgen.



TGR srl - Via Lombardia, 12 - 40064 Ozzano Emilia (Bologna)
Tel. 051 6523511 www.tgr.it - email: tgr@tgr.it

T.G.R. GmbH - Löffelholzstraße 20, Haus 8 Ost - 90441 Nürnberg - Germany
Tel. (+49) 0911 94184700 - Fax (+49) 0911 94184701
http://www.tgr-deutschland.de - e-mail info@tgr-deutschland.de

