



Schienale Tarta



Tarta esprime il perfetto connubio tra lo stile italiano e la funzionalità di uno schienale ergonomico, confortevole e personalizzabile.



Un'idea rivoluzionaria, realizzata con materiali innovativi.

Tarta è dotato di una possibilità di personalizzazione estrema, con un design premiato con il Reddot award.



reddot design award




Schienale Tarta



Tutti i materiali sono studiati per il massimo della performance. Le doghe sono in alluminio anodizzato.

Le vertebre sono in ABS caricato a vetro. L'acciaio armonico dei componenti di collegamento utilizzati all'interno delle vertebre, se sottoposto a deformazione, mantiene una memoria sulla posizione originale, consentendo al sistema caratteristiche uniche di flessibilità e resistenza.

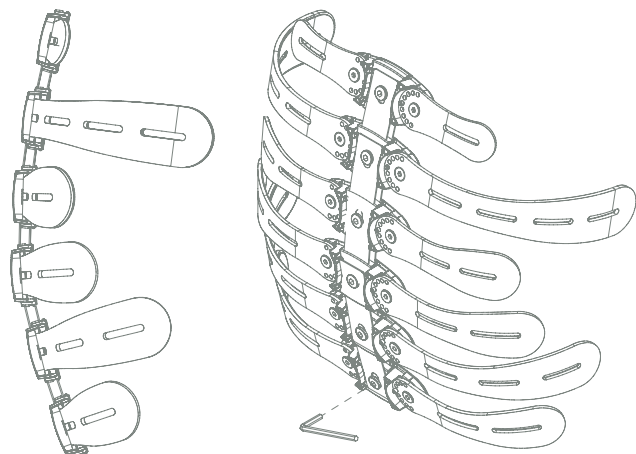

Tarta consente una duttilità e possibilità di personalizzazione estrema. La struttura è una "colonna centrale", la normale colonna vertebrale, sulla quale si innestano le doghe laterali in alluminio.

Al numero desiderato di vertebre, si possono applicare doghe e "pad" (cuscinetti) di diverse forme.

I cuscinetti imbottiti (in schiuma 40 kg/m³, con finitura in tessuto traspirante anallergico), consentono di dare un supporto localizzato, adattandosi in modo perfetto, permettendo al sistema un confort ottimale.





Schienale Tarta



Tarta è un ottimo connubio tra contenimenti e supporti leggeri, che lasciano però libertà di movimento e sostegno alla parte dorsale. È dotato di grande flessibilità “dinamica”: è possibile personalizzare il grado di fissazione o di ritorno elastico della parte centrale.



Una caratteristica distintiva rispetto agli schienali “tradizionali” è la possibilità di adeguarsi perfettamente al tronco del paziente; questa diventa fondamentale in quelle patologie che necessitano di misure molto asimmetriche tra la larghezza della seduta e la larghezza del tronco.

La flessibilità di Tarta ha ripercussioni positive anche sui contenimenti laterali che, rispetto a quelli “più tradizionali” e rigidi, “cedono parzialmente grazie all’elasticità delle doghe” permettendo dei piccoli movimenti laterali e di torsione del tronco aiutando poi il paziente a ritornare nella posizione originale.

La flessibilità della colonna permette inoltre di assecondare sia una postura attiva in fase di auto-spinta, che una postura di “riposo”. Quando un appoggio completo del tronco del paziente consente alla colonna dello schienale di flettere si apre l’angolo di seduta, dando un supporto completo e confortevole ed evitando la classica “retroversione del bacino”.





Schienale Tarta



L'idea iniziale è stata poi "standardizzata", grazie all'esperienza acquisita, nei sei modelli di schienale più richiesti. Questi modelli sono suddivisi in una versione con doghe standard e in quella a doghe "curve" cioè avvolgenti. Ciascuna delle due versioni è disponibile in quattro semplici misure: Small, Medium, Large, Extralarge.



4 vertebre standard



4 vertebre contour (avvolgente)



5 vertebre standard



5 vertebre contour (avvolgente)



6 vertebre standard



6 vertebre contour (avvolgente)



Schienale Tarta



Lo schienale permette anche una grande personalizzazione estetica.
 È possibile scegliere doghe di diversi colori, anche con effetto "soft touch".
 Le doghe sono personalizzabili con i seguenti colori:



bianco



verde lime



arancio



rosso fiammante



azzurro

Il servizio di aerografia permette di produrre pezzi unici, di grande impatto visivo. Eccone alcuni esempi:





Schienale Tarta



L'idea innovativa alla base di Tarta ha permesso di estenderne l'applicazione al di fuori dell'ambito medico, con soluzioni personalizzate per varie tipologie di utenti e di ambienti.



POSIZIONAMENTI

ACCESSORI Schienale Tarta

Un ulteriore tocco estetico e funzionale è fornito dalle borse porta oggetti.

È disponibile una versione molto capiente, con tre vani separati e da apporre sotto la seduta di una carrozzina rigida. Altro accessorio è la tasca porta oggetti da apporre sullo schienale della carrozzina.

Tarta Bag



Tarta Bag viene fissata con un velcro, tra il telo di seduta e il cuscino. I vani separati permettono di trasportare la giacca o indumenti nella tasca principale, oggetti di valore e oggetti per la cura e igiene personale in compartimenti separati, per sicurezza e discrezione.

Codice articolo	Descrizione
TBAG	Tarta Bag: borsa portaoggetti per carrozzina rigida

Tarta Pocket



Tarta Pocket viene fissata nella parte posteriore della carrozzina, sullo schienale Tarta. È dotata di gancetti per il fissaggio alle doghe dello schienale.

Codice articolo	Descrizione
TPOCK	Tarta Pocket: tasca posteriore per carrozzina