

Seating

Standing

Sleeping

Therapy

JENX[®]
Positioning for life



Ausili Terapeutici Jenx

Una gamma di prodotti colorata, semplice e flessibile per
coadiuvare trattamenti di supporto o terapie specifiche



Sempre di supporto...

Jenx Limited, Wardsend Road, Sheffield S6 1RQ, United Kingdom
tel: +44 (0) 114 285 3376
email: export@jenx.com
www.jenx.com

JENX[®]
Positioning for life



Ausili Terapeutici Jenx



La gamma di apparecchiature terapeutiche di Jenx comprende ausili luminosi e facili da usare di cui sia i bambini che gli adulti possono iniziare rapidamente a beneficiare senza sottoporsi a una valutazione formale.

Il design semplice della gamma Therapy fa sì che possa offrire vantaggi a diversi utenti all'interno di un reparto anziché essere limitati a un solo individuo. Possono aiutare con trattamenti di supporto o terapie specifiche come il drenaggio posturale o la posizione prona e possono essere utilizzati come parte di programmi terapeutici regolari.

La gamma Therapy comprende articoli versatili e flessibili, che offrono divertimento, comfort e risultati per utenti con una vasta gamma di esigenze di sviluppo; ci sono cilindri e cunei da scavalcare, materassini su cui sdraiarsi, tavolini e sedie per consentire all'utente di prendere parte a tutte le sue attività preferite a terra.

Ziggy Jenx

Ziggy offre un'esperienza unica nel posizionamento.

Ziggy viene utilizzato per supporto, terapia, riposo e gioco e può essere utilizzato in diversi modi. Questi includono; promuovere attività come gattonare, supportare l'equilibrio quando utilizzato per sedersi a cavalcioni o su un lato e sviluppare il posizionamento ponendo lo Ziggy dietro o davanti all'utente per aiutare a mantenere una postura generale del corpo.

Questo ausilio altamente adattabile ha una sezione trasversale quadrata e può essere piegato in diversi punti per creare molte forme diverse. Può anche essere facilmente trasportato, quindi se sei lontano da casa e hai bisogno di un supporto per un bambino piccolo, piega semplicemente Ziggy a forma di "U" e posizionalo sul pavimento.

Tutti possono trovare un uso per lo Ziggy, la domanda è: quanti ne puoi inventare tu?

Sempre incoraggiante

Le apparecchiature terapeutiche possono migliorare la visione del mondo dell'utente e fagli trarre benefici in vari modi.

Favorisce l'equilibrio e lo sviluppo muscolare.



Aiuta la digestione, lo svuotamento dell'intestino e della vescica.



Aiuta la libertà di esplorare ed essere creativi.



Offre opportunità per aumentare le abilità sociali.



Aiuta il controllo posturale e la stabilità.



Aiuta l'attività e la funzionalità.



Fornisce riposo e relax, riducendo al minimo la fatica.



Fornisce nuove prospettive e modalità di partecipazione.

Gli utenti ottengono enormi benefici psicologici e fisici dai programmi terapeutici utilizzando attrezzature che possano favorire miglioramenti fisici, sociali e di sviluppo.

Specifiche tecniche:

Misure:	Unità	Misura 1	Misura 2
lunghezza x larghezza x altezza	mm	1200 x 100 x 100	1200 x 150 x 150

CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Confortevole

Generosamente imbottito per fornire un supporto morbido e confortevole.

CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Facile da pulire

Le fodere per lo Ziggy sono lavabili in lavatrice e asciugabili in asciugatrice, rendendo davvero facile mantenere il prodotto pulito. Ziggy è completamente rivestito in tessuto impermeabile, lavabile e antibatterico, si pulisce facilmente e rimane igienico.



CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Flessibile e Versatile

Può essere piegato per offrire supporto all'intero corpo, agli arti e alle articolazioni in vari modi complessi e specifici. Le forme vengono trattenute sotto una leggera pressione, mentre la sua lunga lunghezza consente di formare interi cerchi di supporto, se necessario.

Ziggy può essere utilizzato per supportare quasi chiunque in qualsiasi posizione. Funziona bene con il **Dreama™**, quando si desidera supportare una posizione definita dell'intero corpo o degli arti.

Cunei, Cilindri e Materassini Jenx

Una gamma di supporti morbidi, colorati e confortevoli, di varie forme e dimensioni, che possono essere utilizzati per creare occasioni di gioco e per trattamenti terapeutici specifici.

Cunei:

Possono essere utilizzati sia in posizione prona che supina. Sono inoltre disponibili accessori opzionali per migliorare il controllo posturale e la stabilità.

Materassini:

Questi sono realizzati su misura in base alle dimensioni e alla forma che l'utente richiede. Quando hai deciso di cosa hai bisogno, contattaci!

Cilindri:

Possono essere utilizzati in posizione sdraiata per sostenere entrambe le gambe all'altezza delle ginocchia. Ciò tende ad aumentare la stabilità e aiuta a prevenire che le gambe rotolino lateralmente o i colpi di vento.

I Cilindri sono anche un ottimo aiuto per migliorare l'equilibrio da seduti e per praticare il sit to stand, mantenendo una posizione dell'anca neutra o abdotta.

Sempre Attenti Caratteristiche e vantaggi eccezionali

CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Facile gestione

Le coperture facili da pulire, idrorepellenti e ignifughe rendono il tuo oggetto sicuro e piacevole da usare. Il materiale è anche antimicrobico, quindi questi ausili sono ottimi da utilizzare in terapie con più bambini.

CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Colori durevoli e vivaci

Le coperture realizzate in tessuto resistente (e 5 diverse opzioni di colore) prolungano la vita del tuo prodotto.

CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Gamma di accessori

I **cunei** utilizzati per la posizione prona possono includere **una cinghia** per mantenere l'utente centrato, **pareti laterali** per prevenire che gli utenti attivi rotolino giù dal cuneo e **divaricatori** per mantenere una posizione neutra o abdotta dell'anca.

Questi accessori possono essere utilizzati anche in abbinamento ai **cilindri** per la posizione supina, per offrire una posizione comoda alle gambe riducendo la pressione nella cavità addominale; particolarmente utili subito dopo un pasto.



Sempre configurabili Accessori per i cunei



Blocco di abduzione

Aiuta a mantenere una posizione neutra o abdotta dell'anca sui **cunei**. Disponibile in 2 misure.



Pareti laterali

Questi aiutano a impedire all'utente di rotolare giù dal cuneo.



Cinghia standard

La **cinghia** mantiene l'utente centrato sul **cuneo**. Può essere utilizzata con o senza pareti laterali.

Specifiche tecniche dei cunei:

(Vedere sopra l'immagine per a,b,c e d)

Misure	Unità	Misura 1	Misura 2	Misura 3	Misura 4	Misura 5
a x b x c x d	mm	600 x 190 x 600 x 20	500 x 150 x 500 x 20	1200 x 350 x 600 x 20	920 x 300 x 600 x 20	600 x 210 x 600 x 50


Specifiche tecniche dei cilindri:

Misure	Unità	Misura 1	Misura 2	Misura 3	Misura 4
lunghezza x diametro	mm	600 x 300	900 x 300	1200 x 300	900 x 350

Materassini:

Realizzati su misura secondo le vostre specifiche.

Ogni articolo è disponibile in una gamma di 5 colori vivaci tra cui scegliere:

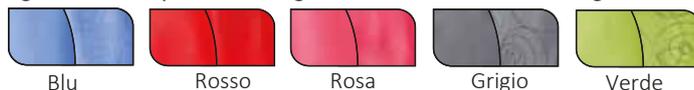

* Manufactured in a combination of both plain and patterned fabric

Side Lying Board Jenx

Una superficie regolabile che offre comfort supportato agli utenti durante il riposo o durante le attività di gioco. La posizione laterale è un'ottima posizione in cui recuperare energie e anche per unirsi agli amici in classe.

Offre un posizionamento comodo e sicuro; l'angolo della superficie di appoggio sia per la posizione sdraiata che per la schiena del Side Lying Board può essere facilmente regolato per impedire all'utente di rotolare in avanti. Il supporto su tutta la lunghezza significa anche che gli utenti si sentiranno comodi e rilassati, con una superficie sufficientemente ampia da consentire all'utente di sentirsi completamente sicuro.

La Side Lying Board offre un supporto efficace per coloro che hanno uno scarso controllo posturale, un basso tono muscolare o hanno la tendenza a curvarsi lateralmente. La superficie imbottita consente inoltre all'utente di essere supportato in modo sicuro e confortevole durante il riposo o le attività.

Sempre attenti caratteristiche e vantaggi eccezionali

CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Superficie di appoggio comoda e regolabile

La comoda superficie imbottita su cui sdraiarsi è sufficientemente ampia da consentire all'utente di sentirsi sicuro. L'angolo della superficie può essere modificato per inclinare leggermente l'utente all'indietro, per evitare il rotolamento in avanti.



CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Supporto per la schiena regolabile

Supporto completo per l'utente significa sicurezza e relax. Lo schienale può essere angolato per evitare che l'utente rotoli in avanti o per regolare la posizione.

CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Ampie cinture

Per una maggiore sicurezza, vengono utilizzate cinghie larghe per mantenere l'utente posizionato correttamente. Le cinghie verranno normalmente utilizzate attorno al torace e ai fianchi, ma ciascun utente potrebbe richiedere un supporto leggermente diverso.



Nella nostra gamma Therapy è disponibile anche il **Ly-on** ed è un'opzione alternativa qualora fosse necessario ulteriore supporto per soddisfare le esigenze dell'utente.

Ly-on è la piattaforma ideale per costruire una postura strutturata ma allo stesso tempo sicura e confortevole, per utenti che hanno esigenze posturali o mediche complesse. La base versatile offre un'ampia gamma di regolazioni in altezza e i 15 gradi di inclinazione in entrambe le direzioni consentono di modificare la distribuzione del peso per facilitare la gestione della pressione.

Side Lying Board specifiche tecniche:

Side Lying Board disponibile solo in verde

Misure	Unità	Misura 2	Misura 3	Misura 4	
Range di età	appross.	mesi - anni	9 mesi - 4 anni	3 anni - 9 anni	8 anni - adulti
Peso utente	max	kg	80	80	80
Angolo panca	reclinazione	gradi	15°	15°	15°
Angolo schienale	indietro - avanti	gradi	25 - 90	25 - 90	25 - 90
Dimensioni panca	larghezza x lunghezza	mm	555 x 1335	650 x 1640	740 x 1935
Da terra alla panca	altezza	mm	590	625	760
Altezza sponda laterale	altezza	mm	330	350	400
Pedana	larghezza x lunghezza	mm	410 x 950	480 x 1250	680 x 1860

Therapy Bench Jenx

Offre una base ideale per una varietà di attività come lo sviluppo della posizione seduta e dell'equilibrio, l'equilibrio dinamico e il miglioramento della postura.

Therapy Bench è disponibile in 2 diverse misure con l'opzione di mezza lunghezza e di lunghezza intera in ciascuna misura, per adattarsi ad utenti con un peso massimo di 85 kg. Entrambe le dimensioni sono regolabili in altezza, con gambe di bloccaggio sicure. Sono inoltre disponibili tre profondità di cuscino intercambiabili o l'opzione di un cuscino semicircolare, che la rendono un'attrezzatura estremamente versatile da utilizzare con diversi utenti in un unico ambiente.

I **cuscini** sono fissati tramite chiusura a strappo e sono tutti rivestiti in vinile facile da pulire, idrorepellente e ignifugo, che contiene un agente antimicrobico per facilitare il controllo delle infezioni in un ambiente multiutente.

Il design robusto consente ai terapisti di sedersi con l'utente sulla panca per offrire ulteriore supporto, se necessario. Il **cuscino piatto** può essere utilizzato per l'equilibrio e lo stretching, mentre il **cuscino semicircolare** può essere utilizzato dentro o fuori dalla panca per il rafforzamento e lo stretching del torso.

Sempre attenti caratteristiche e vantaggi eccezionali

CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Cuscini

Sia il cuscino **piatto** che quello **semicircolare** sono realizzati in vinile antimicrobico, facile da pulire e semplice da staccare e scambiare.

CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Altezza regolabile

L'altezza della panca terapeutica può essere facilmente regolata utilizzando la manopola. Le regolazioni dell'altezza sono facilmente incrementabili e le gambe si bloccano saldamente in posizione, garantendo una base stabile ad una altezza appropriata per ciascun utente.

Therapy Bench misura 2 lunghezza intera



CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Supporti pelvici

Forniscono supporto per una posizione seduta stabile. Comprendono cuscinetti di supporto laterali regolabili flip away, per consentire un facile accesso. Forniti con cover. (Solo per l'uso con i cuscini da 25 mm o 50 mm).

Divaricatore

Fornisce una semplice abduzione per garantire la giusta posizione all'utente. Viene fornito con cover. (Solo per l'uso con i cuscini da 25 mm o 50 mm).

Therapy Bench misura 2 mezza lunghezza



Blocchi per ginocchia

Disponibili in 2 misure, blocchi semplici da usare con alloggi per ginocchia completamente regolabili che possono essere utilizzate per il posizionamento delle gambe e creare abduzione, adduzione e gestire i colpi di vento.

Therapy Bench specifiche tecniche:

Therapy Bench disponibile solo in verde

Misure	Unità	Therapy Bench	Therapy Bench	Therapy Bench	Therapy Bench
		Lunghezza intera misura 1	Mezza lunghezza misura 1	Lunghezza intera misura 2	Mezza lunghezza misura 2
Altezza utente	max	kg	85	85	85
Da terra alla panca <small>(senza cuscino)</small>	altezza	mm	165 - 250	165 - 250	235 - 395
Panca	lunghezza x larghezza	mm	980 x 200	480 x 200	980 x 250
Cuscino piatto	lunghezza x larghezza	mm	1000 x 250	500 x 250	1000 x 300
Cuscino piatto	profondità	mm	25 o 50 o 100	25 o 50 o 100	25 o 50 o 100
Cuscino semicircolare	lunghezza x larghezza x altezza	mm	500 x 250 x 125	500 x 250 x 125	500 x 300 x 150
Pedana	lunghezza x larghezza	mm	965 x 428	465 x 428	965 x 409

Corner Seat & Nursery Table Jenx

Corner Seat

Un sistema di seduta a terra regolabile a che fornisce supporto per bambini da circa 6 mesi a 10 anni.

Il Corner Seat include uno schienale regolabile in altezza e può essere utilizzato con o senza il supporto per la parte superiore della schiena. È incluso anche un **blocco di abduzione** per aiutare a mantenere il bambino nella giusta postura, posizionando il bacino correttamente allo schienale della seduta.

Il posizionamento sulla linea mediana è mantenuto dal design angolare del sistema e, se preferisci avere uno schienale piatto con ali laterali, sono disponibili piccoli **cuscini triangolari** da posizionare sullo schienale per fornire questa opzione.

Nursery Table

Un tavolino ampio e robusto che offre infinite opportunità di gioco.

La superficie in plastica per le attività in può essere utilizzata piana o inclinata come un cavalletto e comprende un telaio regolabile in altezza per soddisfare le esigenze di ogni bambino. Può essere utilizzato con grande efficacia anche con il Corner Seat, con una cinghia corta che collega i due ausili in uso, per evitare che il bambino ribalti il tavolo.

La superficie è facile da pulire e il design sagomato su un lato consente al bambino le attività da tavolo. Il resto del bordo riduce anche il rischio che gli oggetti scivolino dal tavolo.

Sempre attenti caratteristiche e vantaggi eccezionali

CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Posizionamento del tronco

Le robuste "ali" e il design degli angoli aiutano a mantenere la simmetria della colonna vertebrale del bambino.

CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Seduta a terra

Un primo semplice sistema per introdurre i bambini alla seduta a terra. La seduta con le gambe allungate aiuta a mantenere la distensione dei muscoli dietro il ginocchio.

CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Altezza regolabile

Il Nursery Table può essere facilmente regolato in altezza. La regolazione è continua e non incrementale, così ogni bambino può avere il tavolino esattamente all'altezza giusta per lui. Questa caratteristica consente l'utilizzo di questo ausilio in sinergia con il Corner Seat o altri sedute da pavimento, oppure da bambini che sono in grado di stare seduti senza aiuto.

CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Supporto per le spalle

Il supporto superiore regolabile può essere utilizzato per sostenere la testa o le spalle.

CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Robusto e luminoso

Tavolino robusto con una superficie ampia e liscia; abbastanza grande da consentire a un bambino di giocare o esercitarsi con facilità nella maggior parte delle attività.


CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Profilo ritagliato

La sagomatura del tavolo offre ai bambini la possibilità di essere circondati dal piano di lavoro, il che significa che anche i bambini che hanno difficoltà a portare le mani in avanti avranno sostegno per le braccia.



Corner Seat disponibile in 5 vivaci colori:

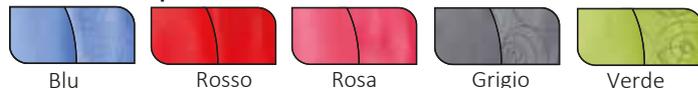

*Prodotto in una combinazione di tessuto a tinta unita e fantasia

Sempre configurabile Accessori



Corner Seat blocco di abduzione

Per l'abduzione durante il long-leg sitting, il **blocco di abduzione** è regolabile per garantire la corretta posizione del bambino.



Corner Seat cuscini triangolari

Per chi preferisce avere un appoggio piatto sulla schiena. I **cuscini triangolari** possono essere utilizzati anche accanto alle gambe per impedire l'extrarotazione.

Corner Seat specifiche tecniche:

	Misure	Unità	Misura 1	Misura 2	Misura 3
Range di età	approssimativo	mesi - anni	6 mesi - 2 anni	1 anno - 6 anni	4 anni - 10 anni
Peso utente	max	kg	25	35	50
Altezza supporto schiena superiore	min - max	mm	315 - 425	440 - 620	500 - 680
Altezza supporto schiena inferiore	max	mm	165	235	235
Larghezza bacino	max	mm	330	390	495
Profondità seduta	max	mm	350	370	465

Side Lying Board specifiche tecniche:

	Misure	Unità	Misura 1	Misura 2	Misura 3
Misure panca	lunghezza x larghezza	mm	510 x 605	510 x 605	510 x 705
Altezza panca	min - max	mm	190 - 280	245 x 345	290 x 440
Angolo panca <small>(dalla posizione orizzontale)</small>	indietro - avanti	gradi	40° - 40°	40° - 40°	40° - 40°
Portata massima	max	kg	20	20	20
Distanza fra le gambe della panca	larghezza	mm	570	570	670

Distributore per l'Italia:

Medimec International srl
Via Proventa 52
48018 Faenza (RA)



@JenxLtd



@JenxLtd



@JenxLtd

